

MELAG Pro-Class

Самые продаваемые паровые стерилизаторы в мире




500 000 решений MELAG по всему миру

Непревзойденное качество —
вы можете на нас положиться.

Частные практики и клиники по всему миру пользуются преимуществами качественного оборудования MELAG, изготавливаемого в Германии. Откройте для себя преимущества надежных и высокопроизводительных автоклавов серии Pro-Class для безопасной стерилизации инструментов.

О пользователях оборудования MELAG в вашей стране можно узнать, перейдя по ссылке: www.melag.com/ru/отзывы

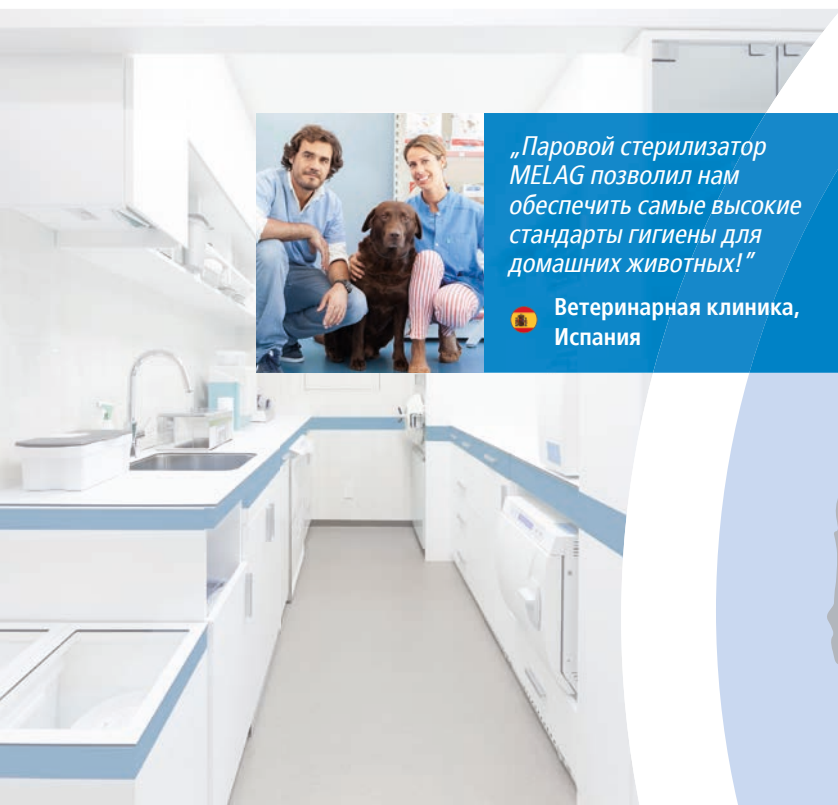

„Паровой стерилизатор MELAG позволил нам обеспечить самые высокие стандарты гигиены для домашних животных!“

Ветеринарная клиника,
Испания



„Надежный автоклав Vacuklav® позволяет значительно экономить время и обеспечивает высочайший уровень безопасности как для пациентов, так и для персонала.“

Франк Бахман,
Германия



„Оборудование серии Pro-Class обеспечивает первоклассное качество и самые высокие технологические стандарты.“

Первый частный
стоматологический центр,
Украина




„Надежность устройства, низкие затраты на обслуживание и превосходная поддержка со стороны MELAG убедили нас приобрести паровой стерилизатор серии Pro-Class.“

Platinum Orthodontics,
Гана



„Теперь ежедневный рутинный процесс может быть преобразован в простой и интуитивно понятный набор действий, высвобождающих дополнительное время для лучшего обслуживания наших пациентов.“

Дентекс, стоматологический
и учебный центр, Россия

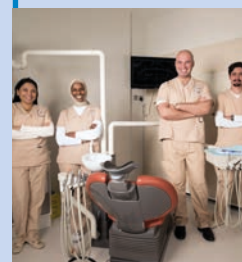

„В компании MELAG мы нашли отличного партнера, который позволяет оптимизировать рабочие процессы и обеспечивает наивысшие стандарты гигиены.“

Sparkle Dental Boutique,
Абу-Даби



„Приобретение системного решения MELAG позволяет экономить время и деньги.“

Клиника 28CliniC,
Япония



„Системное решение MELAG обеспечивает быстрый и безопасный процесс обеззараживания.“

Prosthodontic Associates,
Австралия



MELAG Pro-Class

Наша компания — как раз то, что вам нужно.

Многолетний опыт и специализация в области инфекционного контроля гарантируют создание самых надежных и инновационных решений в области обеззараживания инструментов. Паровые стерилизаторы серии Pro-Class отличаются простотой в использовании, долговечностью и наивысшим качеством. Кратко о наших преимуществах:



Богатый опыт:
Компания занимается медицинским оборудованием с 1951 года



Доверие:
Поставлено свыше 500 000 решений по всему миру



Высокое качество:
Сделано в Германии



Инновации:
450 специалистов в Берлине



Системное решение:
Все оборудование для обеззараживания инструментов от одного поставщика



Основные преимущества

Высокие технические характеристики

Большая вместимость и короткое время цикла обеспечивают эффективные рабочие процессы.

Безопасность


Встроенный интерфейс документирования процессов обеспечивает максимальную надежность технологического процесса.

Универсальность

Широкий ассортимент продукции включает в себя устройства с тремя вариантами глубины камеры как с подключением к системе подачи воды, так и работающие автономно.

Удобство использования

Концепция «4 клавиш» и цифровые инструменты MELAG обеспечивают интуитивно понятное управление.

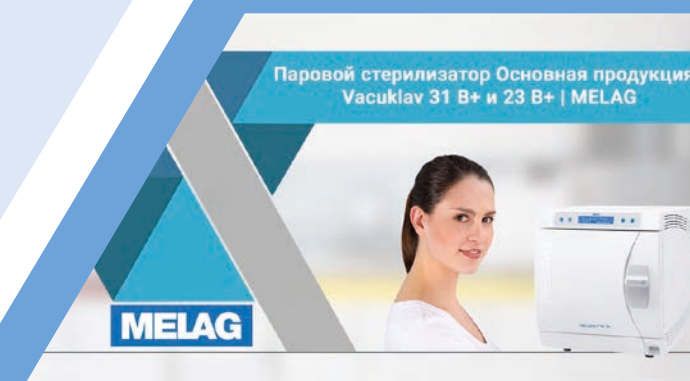

Чтобы больше узнать о наших изделиях, посмотрите следующее видео:
www.melag.com/ru/мультимедиа



Универсальное решение:

Vacuklav® 30 B+

Паровой стерилизатор с глубиной камеры 35 см и подключением к системе подачи воды



Vacuklav® 31 B+

Автономный паровой стерилизатор с глубиной камеры 35 см



Vacuklav® 23 B+

Автономный паровой стерилизатор с глубиной камеры 45 см



Vacuklav® 24 B+

Паровой стерилизатор с глубиной камеры 45 см и подключением к системе подачи воды



Vacuklav® 24 BL+

Паровой стерилизатор с глубиной камеры 60 см и подключением к системе подачи воды



Особенности изделий серии Pro-Class

Эти преимущества уникальны.

Больше времени на работу с пациентами: Научно-исследовательская работа в нашей компании ставит перед собой цель добиться эффективного и безопасного рабочего процесса в ходе обеззараживания инструментов. Наши стерилизаторы, как с подключением к системе подачи воды, так и работающие автономно, позволяют экономить время и деньги за счет коротких циклов стерилизации, интуитивно понятного управления и универсальности документирования процессов.



Высокие технические характеристики

Быстрый процесс стерилизации для вашей практики или клиники: Быстрая программа (включая предварительное вакуумирование) позволяет стерилизовать распакованные инструменты **всего за 15 минут***, а универсальная программа стерилизации поможет обработать большое количество запакованных инструментов всего за 28 минут.*

Компания MELAG поставляет широкий ассортимент вставок для промывочных кассет, подходящих под ваши индивидуальные потребности. Дополнительные комплектующие позволяют **загрузить до 7 кг инструментов в паровой стерилизатор**.

* без сушки



Безопасность

Паровые автоклавы MELAG контролируют все важные **параметры процесса при помощи высокоточной микропроцессорной системы управления**, которая обеспечивает высочайшие стандарты безопасности. Журналы программ гарантируют полное соответствие нормативным требованиям и сохраняются при помощи последовательного интерфейса.

Единая система документирования процессов обеспечивает максимальную гибкость: Процесс документирования можно настроить под ваши нужды при помощи устройства записи на карту памяти MELAflash CF card, MELAnet Box, принтера печати наклеек MELAprint® 44 или программного решения для утверждений MELAtrace®.



Универсальность

Все системные решения серии Pro-Class соответствуют требованиям для стерилизационных отделений: как паровые стерилизаторы с подключением к системе подачи воды, так и работающие автономно. Встроенные водяные баки и запатентованная система воздушного охлаждения Vacuklav® 31 B+ и Vacuklav® 23 B+ обеспечивают **полную независимость и простоту установки**.

В паровых стерилизаторах серии Pro-Class с подключением к системе подачи воды используется **высокоэффективная вакуумная технология**. Использование модуля водоподготовки MELAG для автоматической подачи и слива воды сокращает рабочую нагрузку и экономит время и деньги.



Удобство использования

Простота использования автоклавов серии Pro-Class позволяет вам полностью сконцентрироваться на лечении пациентов: Проверенная **концепция «4 клавиш» MELAG** улучшает рабочий процесс и позволяет избежать операционных ошибок.


В дополнение к концепции интуитивной работы, наши **цифровые решения выводят процессы обеззараживания инструментов на новый уровень**. Узнайте об этих инновационных мультимедийных решениях на веб-сайте MELAG.

Цифровые инструменты для интеллектуального рабочего процесса


Преимущества цифровых инструментов описаны на нашем сайте.



Мультимедийные материалы
Вы можете ознакомиться с более 280 видео, чтобы узнать о безопасном обеззараживании инструментов:
www.melag.com/ru/мультимедиа

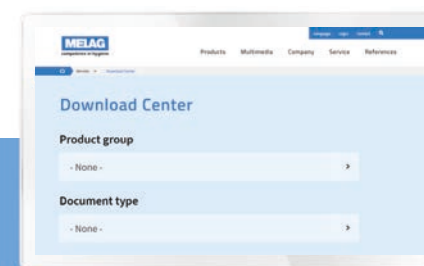

Центр загрузки
Доступ к документам MELAG в любое время и в любом месте:
www.melag.com/ru/сервис/центр-загрузки

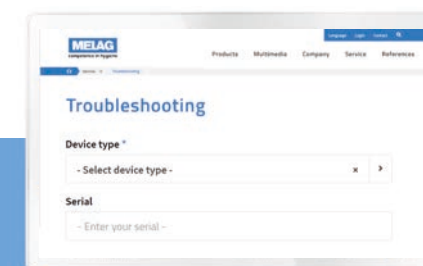

Поиск и устранения неисправностей
Ввод номера неисправности для получения мгновенных решений:
www.melag.com/ru/service/troubleshooting

Системное решение MELAG

Оборудование для обеззараживания инструментов от одного поставщика.

Паровые стерилизаторы серии Pro-Class — важный элемент эффективного рабочего процесса обеззараживания инструментов. Идеально сбалансированное системное решение MELAG поможет вам сэкономить время и деньги, при этом обеспечивая максимальную защиту для пациентов и персонала.

Воспользуйтесь преимуществами системных решений от компании MELAG — ведущего поставщика оборудования для инфекционного контроля:



Персональный подход:
Единый партнер для связи по всем вопросам



Эффективность:
Снижение расходов благодаря полной совместимости различных приборов



Оптимизация рабочих процессов:
Полная согласованность всех выполняемых операций

Повышение качества обеззараживания инструментов: Паровые стерилизаторы MELAG можно объединить с мойками-дезинфекторами MELAtherm® для эффективной очистки и дезинфекции, с упаковочными машинками MELAseal® для безопасной упаковки инструментов, а также с удобной программой документирования и утверждения MELAtrace® для того, чтобы обеспечить идеальный рабочий процесс в клинике или частной практике.



Процесс обеззараживания инструментов:



✓ Очистка и дезинфекция в мойке-дезинфекторе – MELAtherm®



✓ Упаковка с помощью упаковочных машинок – MELAseal®



✓ Стерилизация при помощи автоклавов серии – Pro-Class



✓ Ведение отчетности и аттестация в системе – MELAtrace®



✓ Печать этикеток на принтере – MELAprint® 60

Совершенство в каждой детали

Выберите свой паровой стерилизатор серии Pro-Class.

Воспользуйтесь всеми преимуществами стерилизаторов серии Pro-Class: Системное решение MELAG включает в себя множество комплектующих, при помощи которых вы сможете адаптировать рабочий процесс под свои нужды, тем самым обеспечив наилучшие результаты обеззараживания инструментов.



Система загрузки

Наши системы загрузки обеспечивают оптимальное использование стерилизационной камеры.




Держатель A Plus
включен в комплект поставки для установки пяти лотков (для одиночных инструментов) или трех стерилизационных контейнеров MELAstore (для наборов инструментов).




Лотки:
Арт. № 00230 для Vacuklav® 23 / 24 B+
Арт. № 00280 для Vacuklav® 30 / 31 B+

Система MELAstore®:
Арт. № 01181 для MELAstore®-Tray 100
Арт. № 01191 для MELAstore®-Box 100

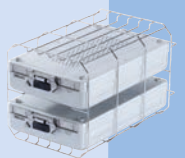

Держатель D
может использоваться для загрузки двух стерилизационных контейнеров системы MELAstore®:

Арт. № 01182 для MELAstore®-Tray 200
Арт. № 01192 для MELAstore®-Box 200

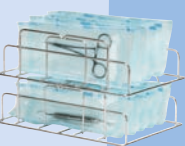

Держатель фольги
обеспечивает вертикальную стерилизацию упакованных инструментов для достижения идеальной сушки

Арт. № 22420 для Vacuklav® 23 / 24 B+
Арт. № 22410 для Vacuklav® 30 / 31 B+



Документирование

Паровые стерилизаторы серии Pro-Class обеспечивают составление требуемой по закону документации и утверждение при помощи современного средства вывода.



MELAtrace®
для профессионального документирования, аттестации и отслеживания всех этапов процесса обеззараживания инструментов
артикульный номер 21138



MELAnet Box
позволяет автоматически перенести все журналы на компьютер и в сеть клиники
артикульный номер 40296



MELAflash CF-Card Printer
позволяет просто и легко сохранять все журналы парового стерилизатора на карте CF
артикульный номер 01039



MELAprint® 44
позволяет печатать протоколы стерилизации на бумаге
артикульный номер 01144



Водоподготовка

Установки для очистки воды MELAdem® обеспечивают высокое качество деминерализованной воды для защиты парового стерилизатора и ваших инструментов.



MELAdem® 40
ионный обменник для клиник и частных практик, в которых выполняется до трех циклов стерилизации в день
артикульный номер 01049



MELAdem® 47
высокоэффективный модуль обратного осмоса для клиник и частных практик с необходимостью в частой стерилизации
артикульный номер 01047



MELAdem® 53 / 53 C
установка для очистки воды высокой производительности для MELAtherm® и трех дополнительных устройств
артикульный номер 01038



MELAjet®
упрощает промывку инструментов деминерализованной водой*
артикульный номер 27300



Регулярные проверки


Для оценки результатов стерилизации требуется контроль партий. Компания MELAG предлагает безопасные испытательные системы для паровых стерилизаторов класса B.



MELAcontrol®
Хеликс-тест с 250 индикаторными полосками обеспечивает надежный контроль партии стерилизации
артикульный номер 01080



MELAcontrol® PRO
многоцветный Хеликс-тест для еще более экономичного контроля партии
артикульный номер 01075

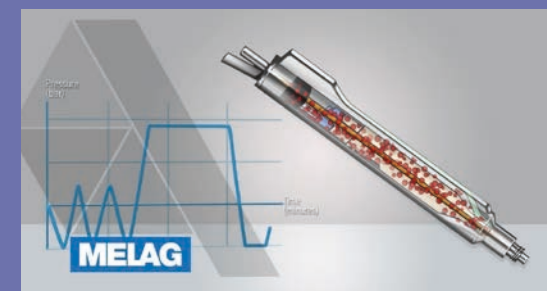

Чтобы подробнее узнать о процессе стерилизации с использованием автоклава класса B, перейдите по ссылке:
www.melag.com/ru/мультимедиа

* Совместим с MELAdem® 40 и MELAdem® 47

Технические параметры

Цифры и факты

Программы стерилизации		Vacuklav® 31 B+ Vacuklav® 23 B+	Vacuklav® 30 B+ Vacuklav® 24 B+	Vacuklav® 24 BL+	Сушка
Сокращенная программа S*	134°C, Длительность выдержки: 3,5 мин	15 мин.	15 мин.	20 мин.	5 мин.
Сокращенная программа B**	134°C, Длительность выдержки: 5,5 мин	30 мин.	28 мин.	32 мин.	10 мин.
Универсальная программа	134°C, Длительность выдержки: 5,5 мин	30 мин.	30 мин.	35 мин.	20 мин.
Щадящая программа	121°C, Длительность выдержки: 20,5 мин	45 мин.	40 мин.	48 мин.	20 мин.
Антиприоновая программа	134°C, Длительность выдержки: 20,5 мин	45 мин.	45 мин.	50 мин.	20 мин.

* Только для неупакованных инструментов

** Макс. нагрузка 1,5 кг в упакованном или неупакованном виде

	Vacuklav® 30 B+	Vacuklav® 31 B+	Vacuklav® 23 B+	Vacuklav® 24 B+	Vacuklav® 24 BL+
Тип устройства	С подключением к системе подачи воды	Автономные	Автономные	С подключением к системе подачи воды	С подключением к системе подачи воды
Объем камеры	Длина 35 см x диаметр 25 см		Длина 45 см x диаметр 25 см		Длина 60 см x диаметр 25 см
Объем камеры*	17 л		23 л		29 л
Загрузка	5 кг инструментов 2 кг текстильных изделий	5 кг инструментов 1,8 кг текстильных изделий	5 кг инструментов 1,8 кг текстильных изделий	7 кг инструментов 2,5 кг текстильных изделий	7 кг инструментов 2,5 кг текстильных изделий
Габаритные размеры устройства (Ш x В x Г)	42,5 x 49,5 x 66 см	42,5 x 49 x 62 см	42,5 x 49 x 74 см	42,5 x 49,5 x 70,5 см	42,5 x 49,5 x 83,5 см
	Устройство подходит для стола с крышкой 50 см		Устройство подходит для стола с крышкой 60 см		Устройство подходит для стола с крышкой 70 см
Вес	45 кг	45 кг	50 кг	48 кг	53 кг
Электропитание	230 В / 50/60 Гц		230 В / 50/60 Гц		230 В / 50/60 Гц
Энергопотребление	2.100 W		2.100 W		2.100 W

** Значения в литрах округлены

Системные решения, инновации и качество

Компания MELAG была основана в 1951 году. Это семейное предприятие, специализирующееся на выпуске оборудования для обеззараживания, предназначенного для медицинских учреждений. Заводы компании расположены только в Германии. Их общая площадь достигает 25 000 м², а число сотрудников составляет 450. Все они упорно работают над сохранением ведущих позиций компании MELAG в производстве средств обеззараживания медицинских инструментов.

© Melag 2020. Все права защищены.

ООО «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» официальный представитель в Украине, сертифицированный сервисным центром. 01024,

Украина, г. Киев, ул. Богомольца 7/14, оф. 182. Тел./факс: +38 044 360 03 00 info@ren-med.com.ua

www.ren-med.com.ua