

Пристосування для операційних столів



Пристосування для операційних столів

ЗМІСТ

ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛОЕР» (LOJER)

- 4** Секції операційного столу і матраци
- 8** Опори для рук і столики-підставки для операцій на руці і кисті
- 13** Затискачі
- 15** Анестезія. Інфузійні стойки
- 17** Опори і ремені
- 28** ЛОР і нейрохірургія
- 30** Ортопедія. Травматологія

- 32** Інші пристосування
- 36** Положення пацієнта на операційному столі



Група компаній «Лоєр» (Lojer) - 30 років досвіду у виробництві операційних столів

Високо оцінювана покупцями всього світу, група компаній Lojer є Вашим надійним партнером, якому Ви можете довіряти відносно вироблених компанією пристосовувань для операційних столів. Виготовляючи повний спектр високоякісних виробів на власних підприємствах у Фінляндії, маючи надійну мережу послуг з постачання виробів у будь-яку точку світу, а також десятиліття досвіду роботи, компанія Lojer надає клієнтам гарантію ефективного співвідношення ціна-якість.

Досвід роботи

Дизайн виробів компанії Lojer спрямований на зручність у використанні, ергономічність в роботі і зручність для пацієнта, а також на забезпечення легкості при очищенні і догляді. Ми постійно вкладаємо кошти в розробку пристосування для операційних столів, орієнтованих на потреби користувачів, а також створюємо інноваційні рішення, спрямовані на задоволення запитів наших клієнтів.

Гарантія якості

Пристосування виробляються групою компаній Lojer на наших сучасних виробничих потужностях відповідно до діючих стандартів, згідно з суворими вимогами відносно якості і з використанням найкращих матеріалів. Сертифікація згідно із стандартами системи якості ISO 9001 (з 1994 року) і ISO 13485 є запорукою відповідального відношення нашої компанії до питань якості. Наші вироби проходять контроль готової продукції перед доставкою клієнтові, що дозволяє нам переконатися в їх відповідності найсуворішим вимогам. Усі наші вироби мають маркування СЕ (європейська відповідність) - знак нашої якості, відповідальності і прихильності питанням безпеки.

Надійність поставок

Група компаній Lojer постійно намагається побудувати свою роботу так, щоб бути орієнтованою на запити клієнтів і конкурентоздатною. Політика групи компаній Lojer націлена на повне задоволення запитів клієнта, що забезпечується безкомпромісним наслідуванням вказаних вище заяв і гарантій.

Використовувані позначення



Максимальна вага пацієнта



Безпечне робоче навантаження



Сумісність із операційними столами Scandia



Вага виробу



Сумісність з бічними рейками стандарту ЄС



Діаметр штанги



Водонепроникний матеріал із зварними швами



Антибактеріальний



Біологічна оцінка



Антистатичний захист



Вогнестійкий матеріал



Регулювання однією рукою



Діапазон висоти



Розмір коліс



Кількість функцій виробу



Пристосування, які додатково поставляються

Секції операційного столу і матраци

Високоякісні додаткові секції для операційних столів були розроблені групою компаній Lojer для доповнення операційних столів і розширення сфери їх застосування в різних хірургічних втручаннях. Модулі секцій для столів легкі у використанні, а надійний і безпечний механізм замикання робить їх простими при з'єднанні і від'єднанні від операційних столів. Модулі секцій для столів спроектовані з особливим упором на безпеку пацієнтів.

В наявності є два типи матраців для модулів секцій до операційних столів: Матраци з пружнов'язкої піни мають якісну двошарову структуру, в якій верхній шар виконаний з піни з ефектом пам'яті. Така піна реагує на вагу і тепло тіла, підлаштовуючись під форму тіла пацієнта. Є в наявності матраци завтовшки 75 мм і 120 мм. Матеріал поверхні покриття є біосумісним, вогнестійким і антистатичним.

Матраци з литого поліуретану (ПУ) легко очищаються і мають довгий термін служби. ПУ матраци мають товщину 65 мм, вони виконані з вогнетривкого і антистатичного матеріалу без застосування латексу.




OT1020

Головна секція з подвійною артикуляцією

- різноманітні варіанти регулювання дозволяють обрати правильне положення пацієнта і оптимальне бічне положення
- регулювання кута $+37^{\circ}/-58^{\circ}$, а регулювання за висотою: 135 мм
- регулювання кута за допомогою пневматичних пружин
- розмір головної секції: 550x230 мм

Необхідні матраци: OT1021/ OT1022/ OT1023

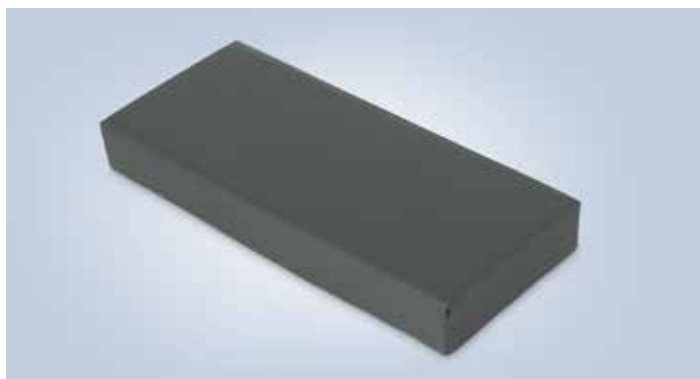

OT1021

Матрац з пружнов'язкої піни, 75мм для головної секції

- високоякісна двуслойная структура з пружнов'язким поверхневим шаром
- м'який і зручний для пацієнта
- розмір матраца : 550x230 мм

Також є в наявності:

- OT1022 Матрац з пружнов'язкої піни, 120 мм для головної секції**
- OT1023 Матрац литий, 65 мм для головної секції**



OT1030

Модуль для операцій на плечі

- легко встановлюється на операційному столі
- дозволяє встановлювати оптимальне напівлежаче положення
- регульована опора для голови типу "шолом" забезпечує безпеку при позиціонуванні пацієнта
- включає зручні матраци з пружнов'язкої піни, 75 мм



SS1070 Бічна опора
SS5070 Ремінь для фіксації пацієнта





OT2050
Спинна секція для ЛОР-хірургії, коротка

- трапецієвидна форма дозволяє отримати ближчий доступ до голови пацієнта
- вузький підголовник, що окремо поставляється, може використовуватися за наявності жорстко закріпленого адаптера
- розмір: 550x200 мм

Необхідні матраци: OT2051/ OT2052

SC



OT2051
Матрац з пружнов'язкої піни 75мм для ЛОР-хірургії, короткий

- високоякісна двошарова структура з пружнов'язким поверхневим шаром
- м'який і зручний для пацієнта
- розмір матраца : 550x200 мм

Також є в наявності:

OT2052 Матрац з пружнов'язкої піни 120 мм для ЛОР-хірургії, короткий




OT4050
Спинна секція для ЛОР-хірургії, довга

- трапецієвидна форма довгої секції для ЛОР- хірургії дозволяє надати легкий доступ ближче до місця проведення операції
- інше приладдя може кріпитися на бічних рейках
- вузький підголовник, що окремо поставляється, може використовуватися за наявності жорстко закріпленого адаптера
- розмір: 550x400 мм

Необхідні матраци: OT4051/ OT4052

SC

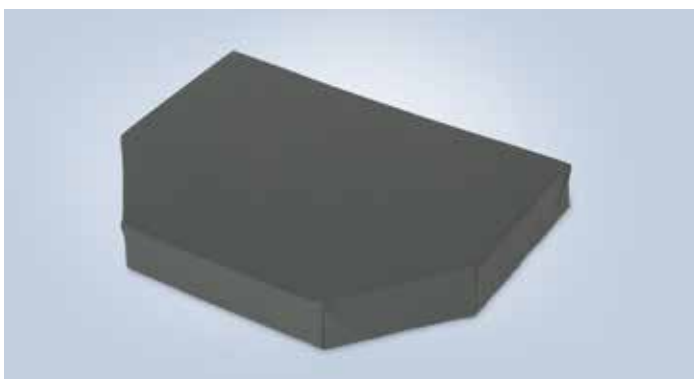

OT4051
Матрац з пружнов'язкої піни 75мм для ЛОР-хірургії, довгий

- високоякісна двошарова структура з пружнов'язким поверхневим шаром
- м'який і зручний для пацієнта
- розмір матраца : 550x400 мм

Також є в наявності:

OT4052 Матрац з пружнов'язкої піни 120 мм для ЛОР-хірургії, довгий






OT5010
Розсувна ножна секція, пара

- розведення кожної секції на 90°, діапазон кута +26°- 90° - легко регулюється
- довжина: 690 мм

Необхідний матрац: OT5011




SS5040 Ремінь для ножної секції

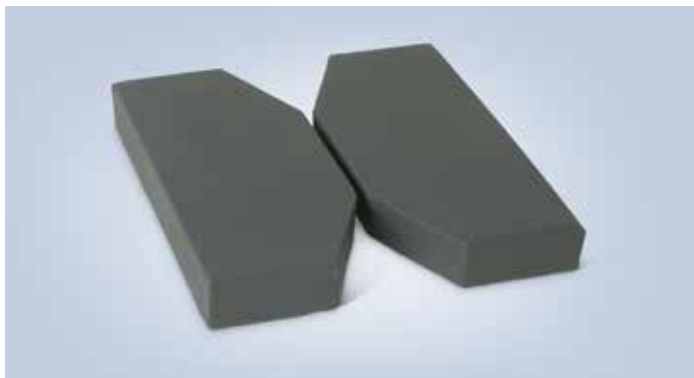

OT5011
Матрац з пружнов'язкої піни 75 мм для розсувної ножної секції, пара

- високоякісна двошарова структура з пружнов'язким поверхневим шаром
- м'який і зручний для пацієнта
- розмір: 265 x 630 мм

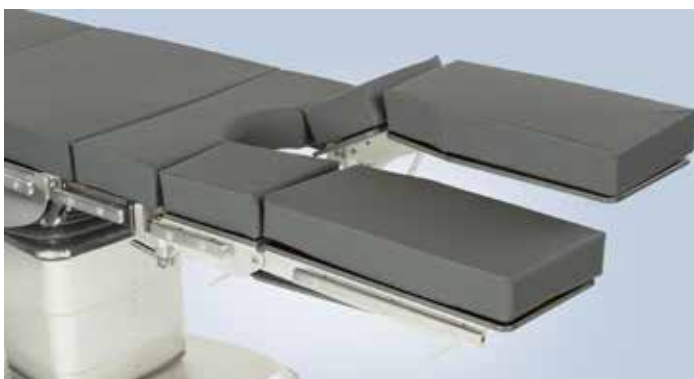


OT5020
Розділена ножна секція з подвійним зчленуванням, пара

- розділена ножна секція дозволяє відводити ногу на кут 90° і забезпечувати оптимальне положення ноги
- легко регулюється, діапазон кута +26°/-90°, додаткова регулювання в колінній частині
- довжина: 810 мм

Необхідний матрац: OT5021



SS5040 Ремінь для ножної секції

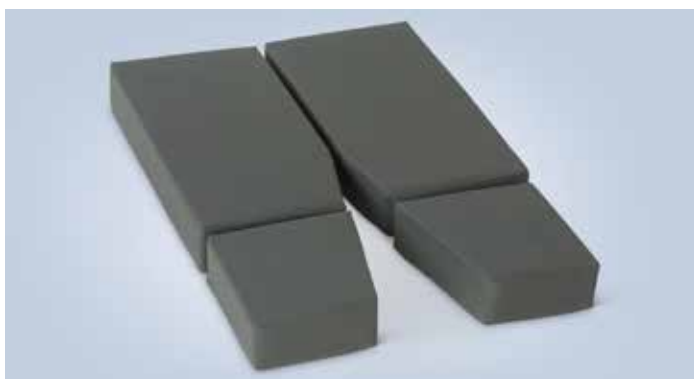

OT5021
Матрац з пружнов'язкої піни 75 мм для розділеної ножної секції

- високоякісна двошарова структура з пружнов'язким поверхневим шаром
- м'який і зручний для пацієнта
- розмір: 240 x 740 мм






OT5030
Полегшена опора для ніг

- легка по вазі і у використанні
- розмір: 550x820 mm


Необхідний матрац: OT5031

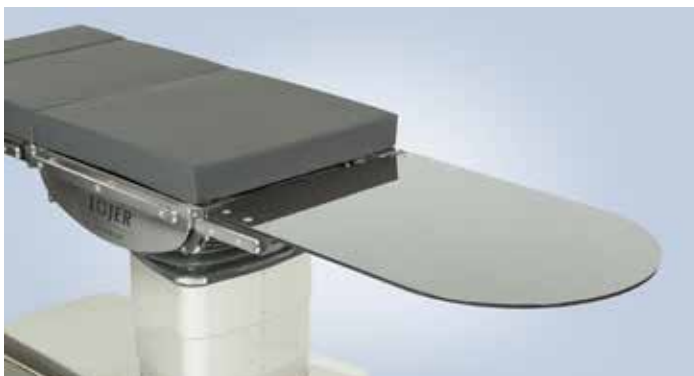

OT5040
Опора з вуглепластика


- опора з вуглепластика дозволяє виконувати необхідні і великі процедури рентгенографії
- без металевих частин, що виступають, під опорою
- розмір: 550x820 mm

Необхідний матрац: OT5031

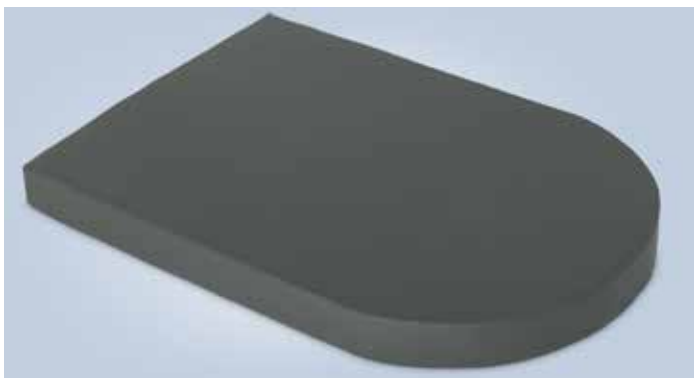

OT5031
Матрац з пружнов'язкої піни 75 мм для полегшеної опори для ніг і опори з вуглепластика

- високоякісна двошарова структура з пружнов'язким поверхневим шаром
- м'який і зручний для пацієнта
- розмір: 550x820 mm

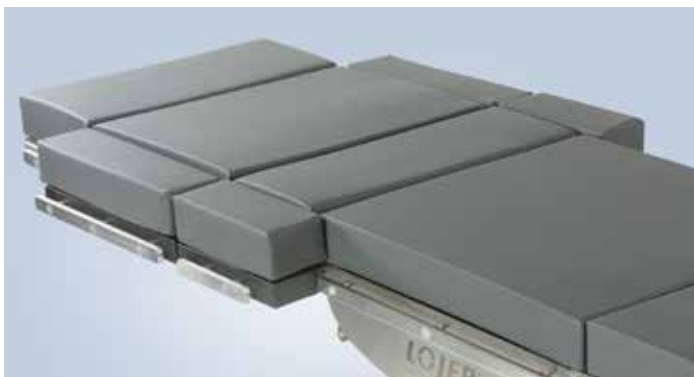

OT6010
Розширювальні секції, короткі, пара

- для розширення ложа столу, в комплекті з матрацами 75 мм
- легко встановлюється на рейці для пристосувань за допомогою важільного затискного механізму
- розмір: 100x250 mm

OT6020
Розширювальні секції, довгі, пара

- для розширення ложа столу, в комплекті з матрацами 75 мм
- легко встановлюється на рейці для пристосувань за допомогою важільного затискного механізму
- розмір: 100x400 mm



Опори для рук і столики-підставки для операцій на руці і кисті

Наш асортимент продукції включає опори для руки, починаючи від жорстко закріплюваних базових моделей до моделей на шарнірах, які можуть регулюватися однією рукою. Також є в наявності ремені, що окремо поставляються, до опор для рук для забезпечення знаходження руки пацієнта на опорі впродовж усієї операції. Регульовальні важелі на регульованих моделях і рейкові затискачі (підігнані стандартно до опор для руки) виконані з антимікробного матеріалу (латунь, схвалена Агентством з довілля охорони(США)).

Наша високоякісна пружнов'язка піна, яка має двошарову структуру, рекомендується у використанні з опорою для рук. Її матеріал допомагає запобігти різним видам затискань і ушкоджень нервів, є приємним у використанні і легенею в очищенні. Поліуретан (ПУ) - це поверхневий матеріал, який є антибактеріальним, антистатичним, вогнетривким, не дратівливим шкіру, стійким до дії вологи і здатним витримати дію дезінфектантів. В якості альтернативи опора для руки може бути обладнана литою подушкою, яка є довговічною, легко очищуваною і антистатичною.

Наш асортимент підставок-столиків для операцій на руці і кисті руки включає як прямокутну модель, так і ергономічну модель, виконану у формі пісочного годинника. Матеріали для наших підставок-столиків для операцій на руці і кисті відбираються так, щоб забезпечити оптимальні умови для якісної рентгеноскопії. Регулюючі ручки на ніжках підставки-столика для операцій на руці і кисті виконані з антимікробної латуні. Для підставки-столика для операцій на руці і кисті потрібно використання окремого м'якого покриття, яке є високоякісним антибактеріальним, антистатичним і вологостійким ПУ матеріал покриття.



AB1110
Опора для руки, стандартна, із затискачем

- закріплена, проста і зручна для користувача опора для руки з важільним затискачем
- дозволяє регулювання по висоті і по горизонталі

довжина: 620 мм
ширина: 170 мм
стрижень: 150 мм

Необхідні подушки: AB3010/ AB3110



AB2110 Опора для руки із затискачем
AB2120 Опора для руки із затискачем, коротка

- регульована однією рукою опора для руки з важільним затискачем
- шарнірне з'єднання дозволяє регулювання по висоті і по куту нахилу в широкому діапазоні
- регулююча ручка з антимікробним покриттям

довжина: 620/470 мм
ширина: 170 мм
стрижень: 150 мм

Необхідні подушки: AB3010/ AB3110, коротка AB3020





AB2130 Опора для руки із затискачем
AB2140 Опора для руки із затискачем, коротка

- модель з подовженою штангою
- регульована однією рукою опора для руки з важільним затискачем
- шарнірне з'єднання дозволяє регулювання по висоті і по куту нахилу в широкому діапазоні
- регулююча ручка з антимікробним покриттям

довжина: 620/ 470 мм
 ширина: 170 мм
 стрижень: 280 мм

Необхідні подушки: AB3010/ AB3110, коротка AB3020



AB2210 Опора для руки з поворотним затискачем
AB2220 Опора для руки з поворотним затискачем, коротка

- регульована однією рукою опора для руки з поворотним затискачем
- різноманітні варіанти регулювання: по висоті з поворотом по горизонталі і вертикалі, кутове регулювання в широкому діапазоні
- регулююча ручка з антимікробним покриттям

довжина: 620/ 470 мм
 ширина: 170 мм
 стрижень: 150 мм

Необхідні подушки: AB3010/ AB3110, коротка AB3020



AB2230 Опора для руки з поворотним затискачем
AB2240 Опора для руки з поворотним затискачем, коротка

- модель з подовженою штангою
- регульована однією рукою опора для руки з поворотним затискачем
- різноманітні варіанти регулювання: по висоті, з поворотом по горизонталі і вертикалі, кутова, регулювання в широкому діапазоні
- регулююча ручка з антимікробним покриттям

довжина: 620/ 470 мм
 ширина: 170 мм
 стрижень: 280 мм

Необхідні подушки: AB3010/ AB3110, коротка AB3020





AV3010

М'яка подушка до опори для руки, з пружнов'язкої піни

- преміальна подушка до опори для руки з пружнов'язким поверхневим покриттям
- двошарова структура оберігає нерви від ушкодження і знижує тиск на руку
- застібка "липучка"

довжина: 625 мм

ширина: 170 мм

товщина: 50 мм



AV3020

М'яка подушка до опори для руки, з пружнов'язкої піни, коротка

- дуже зручна подушка до опори для руки з пружнов'язким поверхневим покриттям
- двошарова структура оберігає нерви від ушкодження і знижує тиск на руку
- кріплення "липучка"

довжина: 475 мм

ширина: 170 мм

товщина: 50 мм



AV3110

Подушка до опори для руки, лита


- формована поліуретанова подушка з увігнутою поверхнею
- без використання латексу

довжина: 625 мм

ширина: 170 мм

товщина: 25 мм



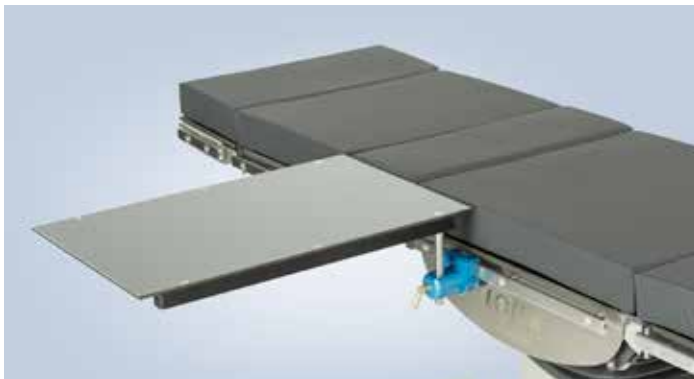


AB5010 Підставка-столик для операцій на руці і кисті

- полегшена і проста у використанні підставка-столик для операцій на руці і кисті з двома важільними затискачами
- поверхня пристосована для рентгеноскопії, площа рентгенівського знімку в центрі столу складає 350 мм
- регулюється по висоті

ширина: 400 мм • довжина: 650 мм • штанга: 135 мм
Необхідний матрац: AB6010



AB5101 Опорна ніжка

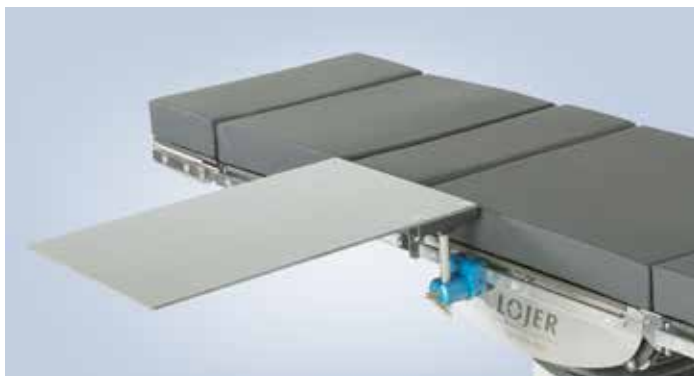


AB5050 Підставка-столик для операцій на руці і кисті, з вуглепластика

- підставка-столик для операцій на руці і кисті, з вуглепластика з двома важільними затискачами CL2010
- забезпечує проведення широкого спектру процедур хірургічної рентгеноскопії
- регулюється по висоті

ширина: 400 мм • довжина: 650 мм • штанга: 135 мм
Необхідний матрац: AB6010



AB5101 Опорна ніжка

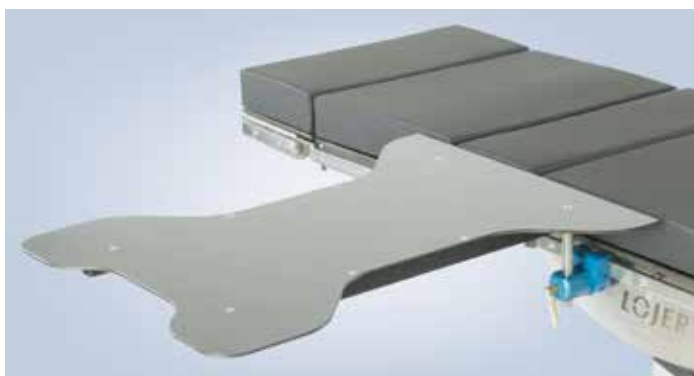

AB5100 Підставка-столик для операцій на руці і кисті руки, фігурний

- універсальна підставка-столик для операцій на руці і кисті з регульованою по висоті опорною ніжкою (AB5101) і двома важільними затискачами CL2010
- забезпечує опору для хірурга по обидві сторони
- поверхня столу пристосована для рентгеноскопії, площа рентгенівського знімку складає 300 мм
- регулюється по висоті


ширина: 600 мм • довжина: 800 мм • штанга: 135 мм
Необхідний матрац: AB6020



AB5101 Опорна ніжка

- міцна і зручна в зверненні опорна ніжка
- може кріпитися до стільниці підставки-столика для операцій на руці і кисті
- натяжне руків'я з антимікробним покриттям
- регулюється по висоті



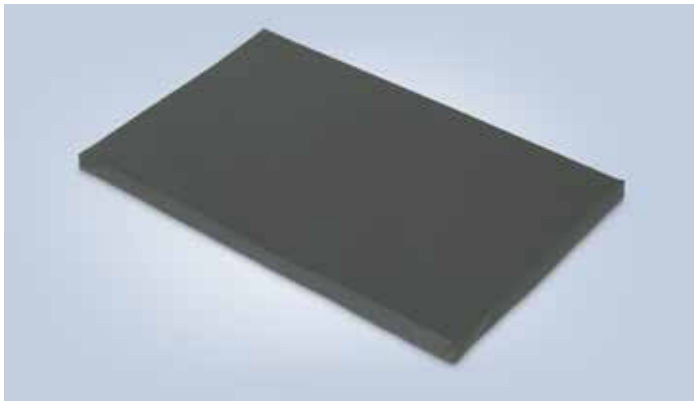

AB6010

Матрац для підставки-столика для операцій на руці і кисті

- матрац підвищеної пружності з піноматеріалу - кріплення "липучка"

ширина: 410 мм

довжина: 660 мм

товщина: 30 мм



AB6020

Матрац для фігурної підставки-столика для операцій на руці і кисті

- матрац підвищеної пружності з піноматеріалу - кріплення "липучка"

ширина: 610 мм

довжина: 810 мм

товщина: 30 мм



Затискачі

Наш широкий асортимент виробів включає якісні затискачі для фіксації на рейках операційного столу - від простих затискачів зі швидким кріпленням до багатоцільових поворотних затискачів. Ми пропонуємо варіанти затискачів, як під круглі, так і під плоскі стрижні пристосування. Проектування і виробництво затискачів в компанії Lojer сконцентоване, зокрема, на практичності і функціональності їх використання в різних ситуаціях. Великий асортимент наших виробів дозволяє легко знайти якраз той затискач, який потрібний у кожному конкретному випадку.

Затискачі виконані або з нержавіючої сталі, або з анодованого алюмінію. Алюмінієві рейкові затискачі завжди є регульовальними і замикаючими важелями, виконаними з антимікробної латуні (з використанням матеріалів, затверджених Агентством з охорони довкілля (США)).



CL1010

Затискач зі швидким кріпленням Ø 18 мм

- полегшений алюмінієвий затискач зі швидким кріпленням зручний у використанні
- натяжний важіль з антимікробним покриттям
- для використання з штангами діаметром 16-18 мм

EU
10x25



CL1110

Затискач зі швидким кріпленням Ø 20 мм

- полегшений алюмінієвий затискач зі швидким кріпленням зручний у використанні
- натяжний важіль з антимікробним покриттям
- для використання з штангами діаметром 18-20 мм

EU
10x25



CL1310

Багатофункціональний затискач зі швидким кріпленням

- полегшений, алюмінієвий багатофункціональний затискач, може використовуватися з плоскою штангою 6x25 мм і з круглою штангою Ø 18 мм
- натяжний важіль з антимікробним покриттям

EU
10x25



CL2010
Затискач-замок Ø 18 мм

- легкий і зручний у використанні алюмінієвий важільний затискач
- натяжні важелі з антимікробним покриттям
- для використання з штангами діаметром 16-18 мм

EU
10x25



CL2110
Затискач-замок Ø 18 мм, поворотний

- легкий і зручний у використанні алюмінієвий поворотно-важільний затискач
- поворотна характеристика забезпечує універсальну функціональність і можливість регулювання
- натяжні важелі з антимікробним покриттям
- для використання з штангами діаметром 16-18 мм

EU
10x25



CL3010
Поворотний затискач для штанг Ø 20 мм

- нержавіюча сталь
- для використання з штангами діаметром 18-20 мм

EU
10x25



CL3110
Поворотний затискач для стрижня Ø 20 мм, подвійного натягнення

- окремі важелі натягнення для штанги пристосування і бічної рейки
- нержавіюча сталь
- для використання з штангами діаметром 18-20 мм

EU
10x25

Анестезія. Інфузійні стійки

Анестезіологічна дуга вважається істотним пристосуванням для операційних столів. Як правило, анестезіологічна дуга використовується для розмежування стерильної робочої області і, в той же час, для захисту обличчя пацієнта. Наша лінійка продуктів включає дві опції анестезіологічних дуг – фіксована модель з неіржавіючої сталі з регуляторною ручкою з антимікробним покриттям, а також модель з полімерним покриттям, яка може кріпитися до будь-якої із сторін столу і закриватися в місці установки за допомогою окремих рейкових затисків.

Пристосування для утримання трубок є корисним пристосуванням, яке дозволяє утримувати в належному порядку наркозні і інфузійні трубки різного розміру. Гнучкий ствол дозволяє утримувати трубки в необхідному положенні, зокрема, більш товсті трубки апарату штучного дихання.

Наш асортимент стійок для переливання включає в себе моделі, які закріплюються на рейках операційного столу, а також моделі на колесах. Всі види стійок для переливання передбачають регулювання по висоті однією рукою і забезпечені чотирма гачками, кожен з яких витримує навантаження в 2 кг. Рами стійок для переливання є або хромованими, або виконаними з неіржавіючої сталі.



AI1010
Анестезіологічна дуга з поворотним зажимом

- рама з неіржавіючої сталі
- покрокова регулювання по висоті
- затяжна ручка з антимікробним покриттям
- можливість подовження за допомогою 1-2 подовжувальних рамок (AI1002)




AI1002 Подовжувальна рамка (1 шт.)



AI1110
Анестезіологічна дуга, гнучка

- кріпиться за допомогою двох затисків до рейки для кріплення пристосування з обох боків операційного столу
- легко очищається
- загальна довжина: 1600 мм

Рекомендований затискач: CL1010

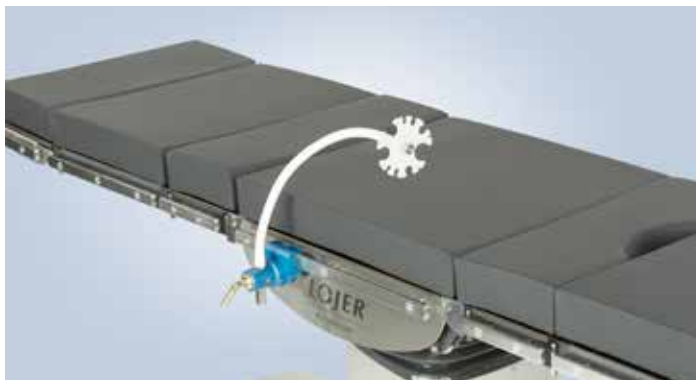

AI5000
Тримач для трубок і кабелів

- гнучкий ствол забезпечує оптимальне положення
- для безпечного закріплення дихальних трубок і кабелів для анестезіології
- дозволяє одночасне закріплення безлічі різноманітних трубок

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110



AI2010**AI2020****AI2010****Стійка інфузійна, пряма**

- кріпиться до рейки для кріплення пристосування
- інфузійна стійка, виконана з нержавіючої сталі
- 4 безпечних гачка для судин, 2,0 кг / гачок

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110

**AI2020****Стійка інфузійна, пряма, з регулюванням кута нахилу**

- з вбудованим затискачем
- стійка інфузійна, виконана з нержавіючої сталі
- з регулюванням кута нахилу, можливий нахил в будь-якому напрямку
- 4 безпечних гачка для судин, 2,0 кг / гачок
- діапазон регулювання по висоті: 410 мм

**AI2110****AI2120****AI2110****Стійка інфузійна, пересувна, пряма**

- пересувна стійка для переливання, виконана зі сталі з хромованим покриттям
- електропровідні і ті, які блокуються, одинарні колеса
- 4 безпечних гачка для судин, 2,0 кг / гачок

**AI2120****Стійка інфузійна, пересувна, для роботи у важких умовах**

- пересувна інфузійна стійка, виконана з нержавіючої сталі та алюмінію
- електропровідні і ті, які блокуються, здвоєні колеса
- 4 безпечних гачка для судин, 2,0 кг / гачок
- Можуть бути встановлені інфузійні помпи (макс. 10 кг)



Опори і ремені

Опори і ремені допомагають підтримувати пацієнта в правильному, безпечному анатомічному положенні і розподіляють тиск від контакту зі шкірою по всій поверхні тканин, що дозволяє уникнути можливих ускладнень надалі. Щоб забезпечити безпечне і оптимальне положення пацієнта під час операції потрібна величезна різноманітність опор; таким чином, наш асортимент виробів включає в себе найрізноманітніші типи, розміри і форми бічних опор, які фіксують ременів і опорних подушок. Наш асортимент продукції також включає в себе різні види ременів для кріплення тіла і кінцівок для забезпечення безпечного положення рук і ніг на операційному столі.

Всі вироблені нами бічні опори і ремені можуть очищатися з використанням звичайних засобів для чищення та розчинів. М'які частини ременів і опор є водонепроникними, а всі матеріали сприятливо впливають на шкіру.

Довговічні і легкі у використанні гелеві подушки і м'які накладки виробництва компанії Lojer призначені для застосування в умовах операційних залів, забезпечуючи якісне стан пацієнта і зменшення тиску на тіло, не забуваючи при цьому про безпеку пацієнта. Подушки збалансовані і добре прилягають до поверхні, що дозволяє медперсоналу легко звертатися з ними і регулювати їх положення, як перед операцією, так і під час її проведення. Гелеві подушки і м'які накладки виготовлені без застосування латексу і сприятливо впливають на шкіру. Подушки поставляються з двома видами матеріалів наповнення: гель-піна і гель.



SS1010

Бічна опора, жорстко закріплена

- жорстко закріплена бічна опора для артроскопії
- м'яка накладка (50 мм) призначена для зменшення тиску на тіло і запобігання ушкоджень нервів
- розмір накладки: 100x200 мм
- регулювання висоти 0-150 мм.

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110



SS1020

Бічна опора, регульована, вузька

- зручна у застосуванні бічна опора
- м'яка накладка (50 мм) призначена для зменшення тиску на тіло і запобігання ушкоджень нервів
- зтяжний важіль з антимікробним покриттям
- розмір накладки: 100x200 мм
- регулювання висоти 0-270 мм.

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110



SS1030

Бічна опора, регульована, широка

- зручна у застосуванні бічна опора
- м'яка накладка (50 мм) призначена для зменшення тиску на тіло і запобігання ушкоджень нервів
- зтяжний важіль з антимікробним покриттям
- розмір накладки: 200x200 мм
- регулювання висоти 0-270 мм.

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110





SS1040

Багатопозиційна бічна опора, вузька

- багатопозиційна бічна опора для оптимального позиціонування пацієнта
- м'яка накладка (50 мм) призначена для зменшення тиску на тіло і запобігання ушкоджень нервів
- затяжні важелі з антимікробним покриттям
- розмір накладки: 100x200 мм
- регулювання висоти 0-200 мм.

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110



SS1050

Багатопозиційна бічна опора, широка

- багатопозиційна бічна опора для оптимального позиціонування пацієнта
- м'яка накладка (50 мм) призначена для зменшення тиску на тіло і запобігання ушкоджень нервів
- затяжні важелі з антимікробним покриттям
- розмір накладки: 200x200 мм
- регулювання висоти 0-200 мм.

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110



SS1060

Багатопозиційна бічна опора, кругла

- багатопозиційна бічна опора для оптимального позиціонування пацієнта
- м'яка накладка (50 мм) призначена для зменшення тиску на тіло і запобігання ушкоджень нервів
- затяжні важелі з антимікробним покриттям
- діаметр накладки: 150 мм
- регулювання висоти 0-200 мм.

Рекомендовані затискачі: CL2010/ CL2110




SS1070

Бічна опора для плечевого модуля

- окрема бічна опора для плечевого модуля (OT1030)
- забезпечує підтримку пацієнта збоку
- розмір накладки з пружнов'язкої піни: 60x240x50 мм



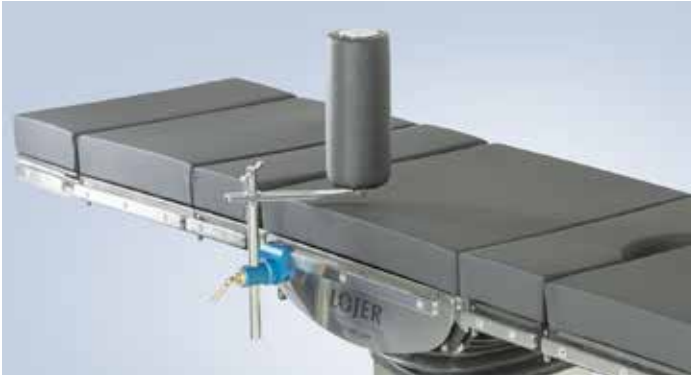

SS2010
Опорний валик, вертикальний

- легкий у використанні регульований опорний валик
- діаметр накладки: 110 мм, довжина: 270 мм

Рекомендовані затискачі: CL2010/CL2110



SS2030
Опора для гомілки

- горизонтальна опора для ноги при проведенні операцій на нозі і коліні
- діаметр накладки: 110 мм, довжина: 270 мм
- плоска штанга 6x25 мм


Рекомендований затискач: CL1310



SS2040
Опора для коліна

- опорний валик, який використовується при проведенні операцій на нозі і коліні
- придатний до використання з ортопедичним пристосуванням для витягнення
- діаметр накладки: 100 мм, довжина: 380 мм
- регулювання висоти 0-600 мм.

Рекомендований затискач: CL 2110

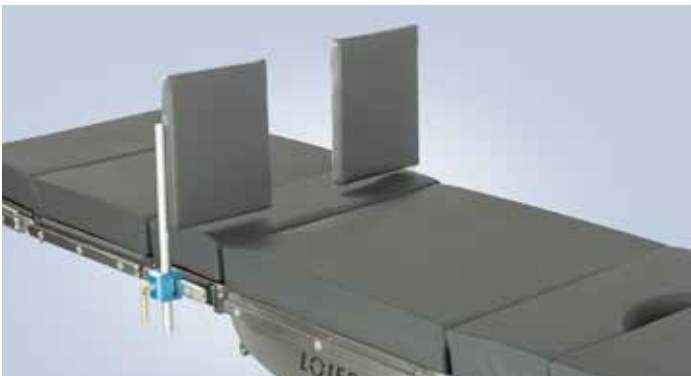

SS3010
Опири для ступень, пара

- підтримує пацієнта в різних положеннях
- кріпиться до рейки для кріплення пристосувань по обидві боки столу
- розмір накладки: 220x270 мм

Рекомендований затискач: CL1010





SS3020

Тримач для артроскопії коліна

- держатель для артроскопії коліна фіксує положення ноги при проведенні хірургічних операцій
 - плавне регулювання за допомогою рукоятки
- Рекомендовані затискачі: CL1010/CL2010



SS3030

Опори для ніг по Гопелю, пара

- полегшена, зручна у використанні опора для ніг
 - шарнірне з'єднання забезпечує оптимальне положення
 - зручні м'які края
 - закріплений фіксуючий ремінь надійно фіксує ногу в заданому положенні
 - необхідні реміні SS5030 для фіксації
- Рекомендований затискач: CL2010-2 шт.



SS3040

Упори для ніг («чобітки») з пневматичною пружиною, пара

- універсальне і легке регулювання
 - м'яка і зручна секція фіксує ступню, полегшує тиск на ногу і запобігає пошкодженню нерва
 - літотомічний діапазон + 84 ° ...- 33 °
 - діапазон відведення ноги + 25 ° ...- 9 °
 - кріплення до рейки для кріплення пристосувань за допомогою плоскої штанги
 - гранична вага пацієнта 159 кг
- Рекомендований затискач: CL1310-2 шт.



SS4010

Бічна опора для руки з ременем, багатофункціональна

- встановлювана в різні положення опора для руки з шарнірним з'єднанням
 - зтяжний важіль з антимікробним покриттям
 - подушка зпружнов'язкої піни 160x500x30 мм з кріпленням «липучка»
 - регулювання висоти 0-490 мм.
- Рекомендований затискач: CL2110






SS4040

Опора для плеча, пара

- опора забезпечує безпечне утримання пацієнта на операційному столі в положенні Тренделенбурга
- м'які і зручні подушки полегшують тиск на плече і запобігають пошкодженню нервів
- опора для плеча кріпиться до рейки для кріплення пристосувань

Рекомендований затискач: CL2110-2 шт.

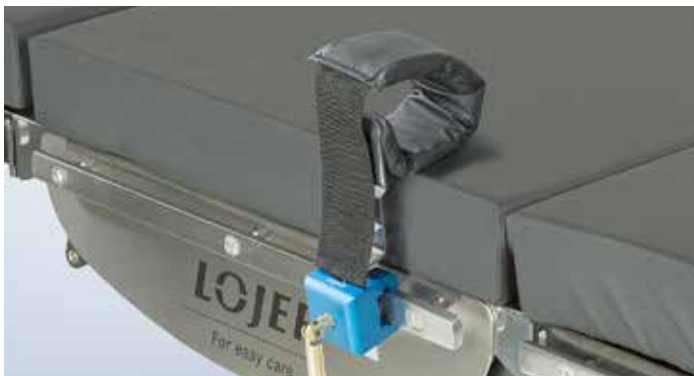


SS5010

Ремінь для зап'ястя

- м'який ремінь для зап'ястя преміум-класу з кріпленням «липучка»
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів
- зручна м'яка накладка знижує ймовірність утворення саден
- розмір накладки: 60x380 мм, загальна довжина ременя: 500 мм

Рекомендований затискач: CL1310

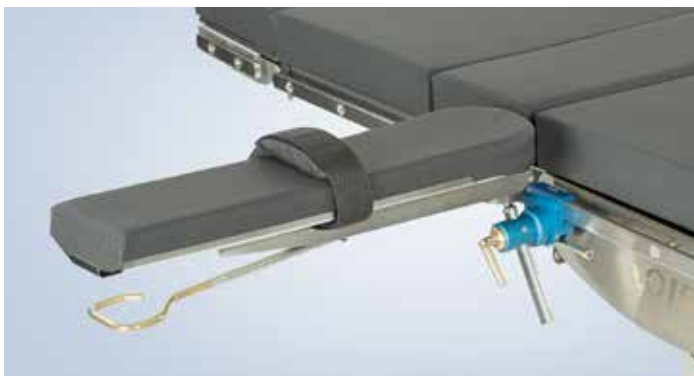

SS5020

Ремінь для опори руки

- м'який ремінь для опори руки преміум-класу з кріпленням "липучка"
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів
- зручна м'яка накладка знижує ймовірність утворення саден
- розмір накладки: 60x200 мм, загальна довжина ременя: 700 мм



SS5030

Ремінь для опори ноги

- м'який ремінь для опори ноги преміум-класу з кріпленням «липучка»
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів
- зручна м'яка накладка знижує ймовірність утворення саден
- розмір накладки: 80x300 мм, загальна довжина ременя: 950 мм





SS5040

Ремінь для ножної секції

- м'який ремінь для ножної секції преміум-класу з кріпленням «липучка»
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів
- зручна м'яка накладка знижує ймовірність утворення саден
- розмір накладки: 80x400 мм, загальна довжина ремня: 1400 мм



SS5050

Ремінь для ніг і тіла

- м'який ремінь для ніг і тіла преміум-класу з кріпленнями типу «липучка» і на гачках
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів
- зручна м'яка накладка знижує ймовірність утворення саден
- знімна м'яка накладка, розмір: 110x550 мм, загальна довжина ремня: 2200 мм



SS5055

Ремінь для ніг і тіла, широкий

- м'який ремінь для ніг і тіла преміум-класу з кріпленнями типу «липучка» і на гачках
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів
- зручна м'яка накладка знижує ймовірність утворення саден
- знімна м'яка накладка, розмір: 140x650 мм, загальна довжина ремня: 2200 мм



SS5070

Ремінь для плечевого модуля

- призначений для використання з плечовим модулем OT1030
- забезпечує підтримку і безпеку для пацієнтів

Рекомендовані затискачі: CL1110/ CL3010






SS6010
Валик під гомілку і коліно

- напівкругла подушка-опора для використання під гомілкою і колінами з метою створення ергономічної хірургічної позиції для пацієнта
- легка чистка
- розмір: 550x200x100 мм




SS6020
Валик круглий Ø 100 мм
SS6030
Валик круглий Ø 150 мм

- створює ергономічну хірургічну позицію для пацієнта
- допомагає при підготовці до операції
- легка чистка
- довжина: 500 мм

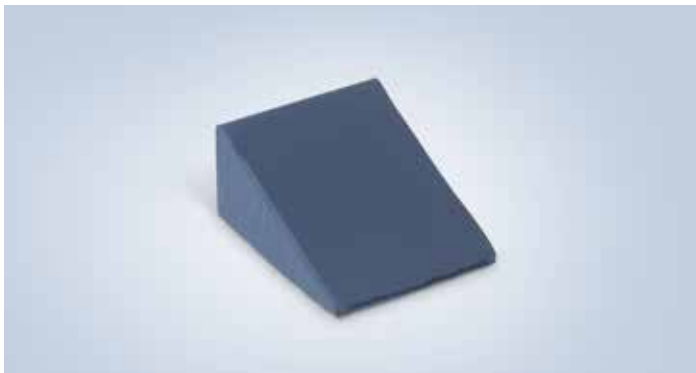

SS6040
Подушка клиноподібна, мала

- підтримує заданий стан пацієнта під час операції
- легка чистка
- розмір: 300x250x140 мм

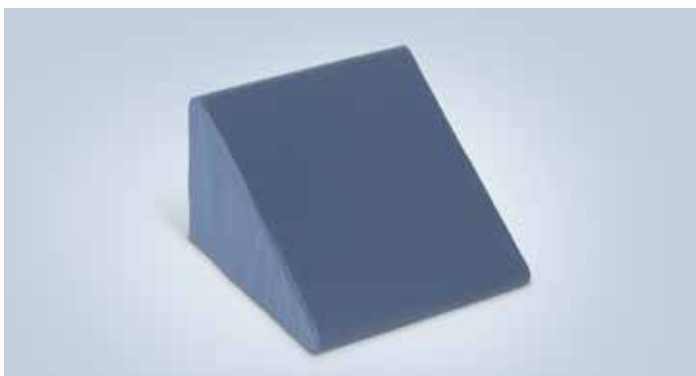

SS6050
Подушка клиноподібна, велика

- підтримує заданий стан пацієнта під час операції
- допомагає при підготовці до операції
- легка чистка
- розмір: 400x350x230 мм





SS6110

Кільце під голову (дитяче), гель-піна

SS6111

Кільце під голову (дитяче), гель

- для положення лежачи на спині
- захищає голову, обличчя, шию і вуха пацієнта під час проведення всіх типів операцій
- полегшує тиск на голову
- розмір: 140х60х35 мм



SS6120

Кільце під голову (для дорослих), гель-піна

SS6121

Кільце під голову (для дорослих), гель

- для положення лежачи на спині
- захищає голову, обличчя, шию і вуха пацієнта під час проведення всіх типів операцій
- полегшує тиск на голову
- розмір: 200х75х45 мм



SS6130

Кільце під голову в формі підкови (дитяче), гель-піна

SS6131

Кільце під голову в формі підкови (дитяче), гель

- для положення лежачи на животі
- призначено для захисту голови і обличчя пацієнта під час операції
- легкий доступ для проведення хірургічної інтубації
- розмір: 140х60х35 мм



SS6140

Кільце під голову в формі підкови (для дорослих), гель-піна

SS6141

Кільце під голову в формі підкови (для дорослих), гель

- для положення лежачи на животі
- призначено для захисту голови і обличчя пацієнта під час операції
- легкий доступ для проведення хірургічної інтубації
- розмір: 200х75х45 мм





SS6150

Підголовник для положення лежачи на животі, гель-піна

SS6151

Підголовник для положення лежачи на животі, гель

- для положення лежачи на животі
- забезпечує відмінну зручність, стійкість і підтримку під час проведення операцій
- розмір: 280x230x145 мм



SS6160

Підкладка під голову, гель-піна

SS6161

Підкладка під голову, гель

- для положення лежачи на спині
- захищає голову, обличчя, шию і вуха
- забезпечує зручне і стійке задане положення під час проведення всіх типів операцій
- розмір: 270x230x70 мм



SS6211

Підкладка до опори для руки, гелева

- захищає руку і кисть пацієнта на опорі для руки і на операційному столі
- забезпечує бездоганне полегшення тиску на руку під час різних хірургічних процедур
- рекомендується до використання з формованою подушкою до опори для руки
- розмір: 600x125x20 мм



SS6220

Контурна підкладка до опори для руки, гель-піна

SS6221

Контурна підкладка до опори для руки, гелева

- захищає руку і кисть пацієнта на опорі для руки
- призначена для забезпечення додаткової опори і стійкості
- розмір: 520x150x55 мм





SS6230

Підп'ятова подушка з чохлам, гель-піна

- захищає п'яти пацієнта
- ергономічний корпус із застібною «липучка»
- обволікання гомілки і п'яти забезпечує стійке положення
- наповнювач з піни, гелю і повітря забезпечує відмінне зниження тиску на п'яту
- включає в себе одну подушку з чохлам
- розмір: 390x260x50 мм




SS6240

Комплект підп'ятових опор, гель-піна

SS6241

Комплект підп'ятових опор, гель

- захищає п'яти пацієнта
- полегшені підп'ятові опори забезпечують максимальну зручність і опору
- включає в себе дві підкладки
- розмір: 200x110x70 мм

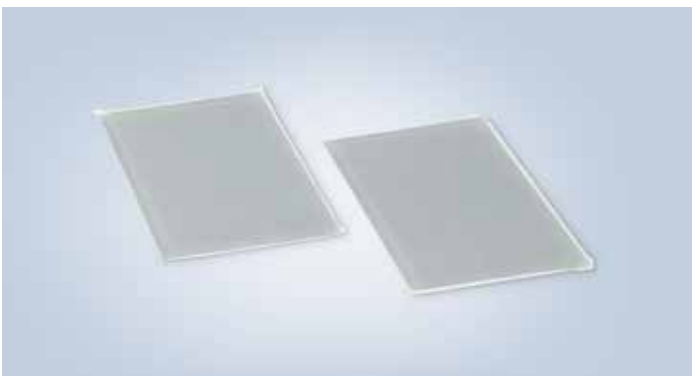

SS6251

Комплект підкладок до упорів для ніг, гель

- захищають ноги пацієнта в літотомічному положенні
- призначені для використання з вбудованою подушкою для ніг
- включає в себе дві підкладки
- розмір: 400x250x10 мм





SS6310

Валик для грудної клітини (короткий), гель-піна

SS6311

Валик для грудної клітини (короткий), гель

- для положення лежачи на животі
- забезпечує полегшення тиску на тіло і захищає від утворення пролежнів
- розмір: 300x150x100 мм




SS6320

Валик для грудної клітини (довгий), гель-піна

SS6321

Валик для грудної клітини (довгий), гель


- для положення лежачи на животі
- забезпечує полегшення тиску на тіло і захищає від утворення пролежнів
- розмір: 500x150x100 мм

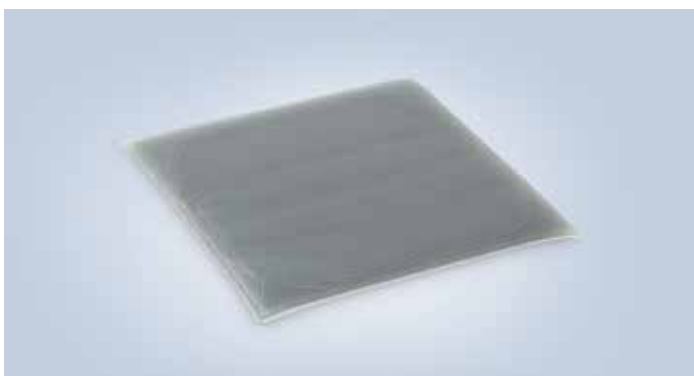

SS6330

Підкладка для операційного столу, гель-сітчаста тканина

- виконана з м'якого гелю з чохлам з 3D повітряно-сітчастої тканини
- тисячі волокон не дозволяють тілу пацієнта контактувати з поверхнею операційного столу
- виступаючий наверх м'який гель захищає шкіру під час тривалих операцій
- забезпечує зменшення тиску на тіло і зручність позиціонування
- розмір: 500x500x20 мм

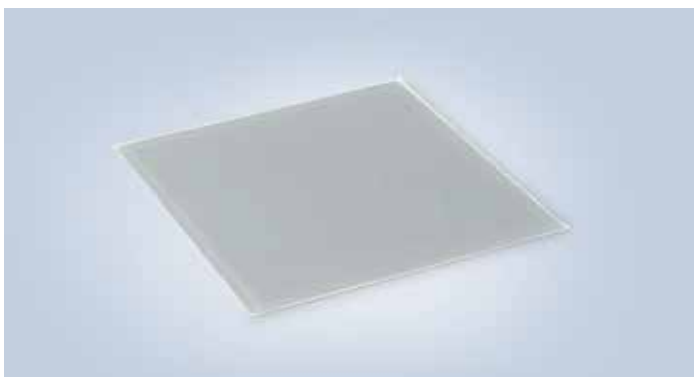

SS6331

Підкладка для операційного столу, гелева

- різні види використання при розміщенні пацієнта
- м'яка, гнучка і зручна
- значно знижує тиск на тіло від всіх типів поверхні
- розмір: 500x500x10 мм



ЛОР і нейрохірургія

Різні типи хірургічних процедур вимагають використання різних видів підголівників. Операційна позиція, яка використовується при кожній з процедур, визначає необхідний тип підголівника. Деякі підголівники можуть кріпитися безпосередньо на операційному столі, для інших потрібно використовувати адаптер (сумісний з Mayfield®).

Регулювання багатьох з вироблених нами підголівників: регулювання базового кута і реверсне регулювання полегшують дві вбудовані пневматичні пружини. Пневматичні пружини дозволяють легко провести регулювання кутів нахилу. Жорстке, безпечне положення пацієнта, а також широкий діапазон і плавний характер регулювання дозволяють легко знайти ергономічне і анатомічно правильне положення пацієнта.

Багато підголівників забезпечені знімними м'якими накладками, що полегшує процедуру очистки. Матеріалом накладок є або пружнов'язка піна, або поліуретан (ПУ).



HR1100
Адаптер для спеціальних типів підголівників

- призначений для вузьких підголівників і опор для зап'ястя (HR5000)
- легко встановлюється на секціях операційного столу


SC



HR1120
Підголівник з подвійною артикуляцією, вузький

- універсальна можливість регулювання дозволяє оптимально фіксувати пацієнта в заданому положенні під час хірургічних операцій
- регулювання по куту нахилу за допомогою пневматичних пружин
- регулювання по куту: + 37 ° / -58 ° і за висотою: 135 мм
- особливо підходить для використання зі спинними секціями для ЛОР-операцій (OT2050 і OT4050)
- необхідний матрац для головної секції VEF 75 мм
- слід використовувати адаптер для HR1100

2x
function

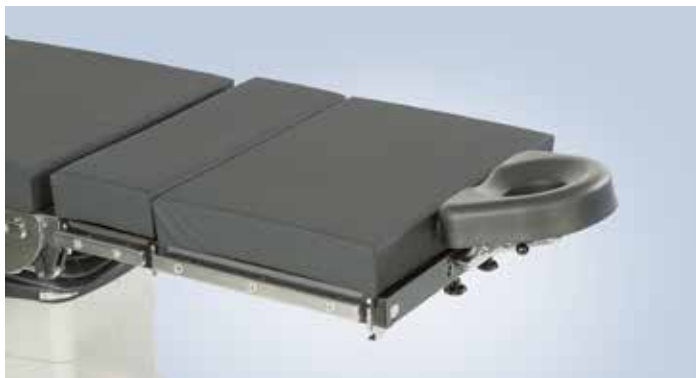

HR1130
Підголівник для ЛОР, пластичної та офтальмологічної хірургії

- багатопозиційний підголівник для ЛОР, пластичної та офтальмологічної хірургії
- в подушці передбачено чашоподібне поглиблення для підтримки стійкого положення голови під час операції
- слід використовувати адаптер для HR1100

2x
function



HR1140
Підголівник для нейрохірургії, варіант А

- дозволяє забезпечити найкраще положення голови пацієнта під час нейрохірургічних операцій
- призначений для легкого кріплення, швидко і надійно регулюється
- забезпечує широке розмаїття варіантів кріплення
- в комплекті з адаптером HR1100

SC



HR1150
Підголівник для нейрохірургії, варіант В

- включає в себе варіант А
- оснащений виключно м'якими гелевими накладками
- ідеальний для проведення операцій з положенням пацієнта як лежачи на животі, так і лежачи на спині
- в комплекті з адаптером HR1100

SC



HR1160
Підголівник для нейрохірургії, варіант С

- включає в себе варіанти А + В
- при кріпленні на поперечному адаптері є ідеальним засобом для проведення операцій, коли потрібно, щоб пацієнт знаходився в сидячому положенні

Рекомендований затискач: CL 2110

SC



HR5000
Регульована опора для зап'ястя

- опора для зап'ястя для додання стійкості рукам хірурга при операціях ЛОР, пластичної та офтальмологічної хірургії
- опорні штанги з м'яким покриттям
- може регулюватися по горизонталі і по вертикалі
- потребує використання адаптера HR1100

SC

2x
function

Ортопедія. Травматологія

Ортопедичний пристрій для витягування виробництва компанії Lojer і приладдя до нього забезпечують контрольовану і безпечну фіксацію пацієнта в положенні лежачи на спині при проведенні операцій на стегні або на нижніх кінцівках. Та кінцівка, що не піддається хірургічному втручанню, може підтримуватися, якщо необхідно, опорою для ноги, або кріпитися за використання опори типу «стремено», що також дозволяє одночасно використовувати ще одну, більш коротку опору. Ортопедичний пристрій для витягування кріпиться до операційних столів, вироблених компанією Lojer, за допомогою адаптера. Стандартний розмір опорних колодок: M; S, але також є в наявності і розміри L.

Наш асортимент продукції включає в себе також і інші пристрої для витягування, такі як пристрої для витягування плеча і зап'ястя. Для отримання більш докладної інформації зв'яжіться з нашою службою клієнтської підтримки.



TD1000
Ортопедична приставка для витягування

- універсальний пристрій для витягування для ортопедичного та травматологічного лікування переломів і проведення артроскопії стегна
- регулюється по горизонталі і по вертикалі
- легкий доступ при розміщенні скоби для витягнення



TD1010
Пристрій тяговий для витягування ноги

- дає можливість регулювання кута нахилу при лікуванні переломів
- встановлюється з приналежністю TD1030 Затискач для ортопедичного пристрою для витягування
- вимагає використання опори для коліна SS2040 для забезпечення протитяги.



TD1020
Опора для ноги с подушкой

- надає опору для ноги пацієнта при ортопедичному та травматологічному лікуванні
- регулюється по висоті
- розмір подушки: 190 x 500 мм
- потрібне використання затискача TD1030





TD1030
Затискач для ортопедичної приставки

- призначений для рейок ортопедичної приставки
- для штанг з діаметром 20 мм

SC



TD1040
Додаткова рейка до ортопедичної приставки

- призначений для рейок ортопедичної приставки
- можливість з'єднання зі стандартними рейковими затискачами, європейського розміру

SC

Інші пристосування

Хірургічні процедури часто вимагають використання різних пристосувань для оптимальної фіксації пацієнта з анатомічної точки зору, як того вимагають умови різних процедур. Такі пристосування повинні бути практичними і легкими у використанні. Повний асортимент продукції компанії Lojer включає пристосування для найбільш часто зустрічних анатомічних позицій для проведення операцій.

Компактні візки для пристосувань виробництва компанії Lojer мають малу площу підґрунтя і полегшують зберігання і переміщення частин і модулів операційного столу, а також інших пристосувань. Допоміжні візки спроектовані таким чином, щоб бути максимально місткими і легкими у використанні.



OA1010
Приставка для ламінектомії

- пристосування для фіксації пацієнта при операції на хребті
- регульована ширина: 490-550 мм
- з можливістю плавного підйому за допомогою ручки
- включає в себе подушки
- регулювання висоти 150-270 мм



OA1020
Приставка для фіксації пацієнта при операції хребта

- для операцій на хребті
- включає в себе дві бічні опори

Рекомендовані затискачі: CL3010/CL3110



OA1030
Приставка для операцій на нирках

- елеватор для спини і нирки з ручкою підйому, що обертається





OA1040

Приставка для проктологічних операцій

- підтримує пацієнта в колінно-ліктьовому положенні при проведенні проктологічних процедур
- регульована висота: 490-690 мм
- включає в себе бічні рейки



OA2110

Стіл для інструментів, з кріпленням на бічній рейці

- додатковий стіл для збільшення кількості інструментів, наявних у хірурга
- затяжна ручка з антимікробним покриттям
- регулюється по горизонталі і по вертикалі
- Рекомендований затискач: CL2110
- розмір столика 325x355 мм.



OA3010

Візок для приладдя

- візок для простого і компактного зберігання різних речей для операційного залу
- легко переміщується
- 4 коліщата, які блокуються



OA3020

Візок для секцій операційного столу

- компактний і універсальний візок для зберігання різних секцій операційного столу
- полегшує переміщення та зберігання важких секцій столу
- 4 коліщата, які блокуються





OA4010
Ножна педаль

- дозволяє здійснювати регулювання положень операційного столу ногою
- три програмовані функції
- може бути використано в будь-якій точці операційного столу зважаючи на наявність довгого мережевого шнура

SC



OA4020
Тримач для рентгенівських касет

- тримач для рентгенівських касет
- з кріпленням до операційного столу
- підходить для касет з максимальним розміром 465x390 мм

SC



OA4030
Подовжувач бокової рейки

- додаткова рейка для пристосування
- кріпиться до бічної рейки за допомогою вбудованого затискача

EU
10x25



OA4040
Ручки для переміщення столу, пара

- полегшує переміщення операційного столу
- кріпляться до бічних рейок за допомогою вбудованого затискача
- зтяжні важелі з антимікробним покриттям

EU
10x25



OA4100
Підкладне судно 9 л з дренажем

- прямокутне судно з нержавіючої сталі
- встановлюється на бічних рейках операційного столу
- легке у використанні через наявність направляючої рами
- сито дозволяє проходження рідин в чашку
- чашка з ситом легко очищається і знімається

SC




OA4110
Підкладне судно 6 л без дренажу

- кругле судно з нержавіючої сталі
- легко переміщується на шарнірному з'єднанні
- чашка легко очищається і знімається
- включає затискач CL2010

SC

Положення лежачи на спині, операції на руці і кисті

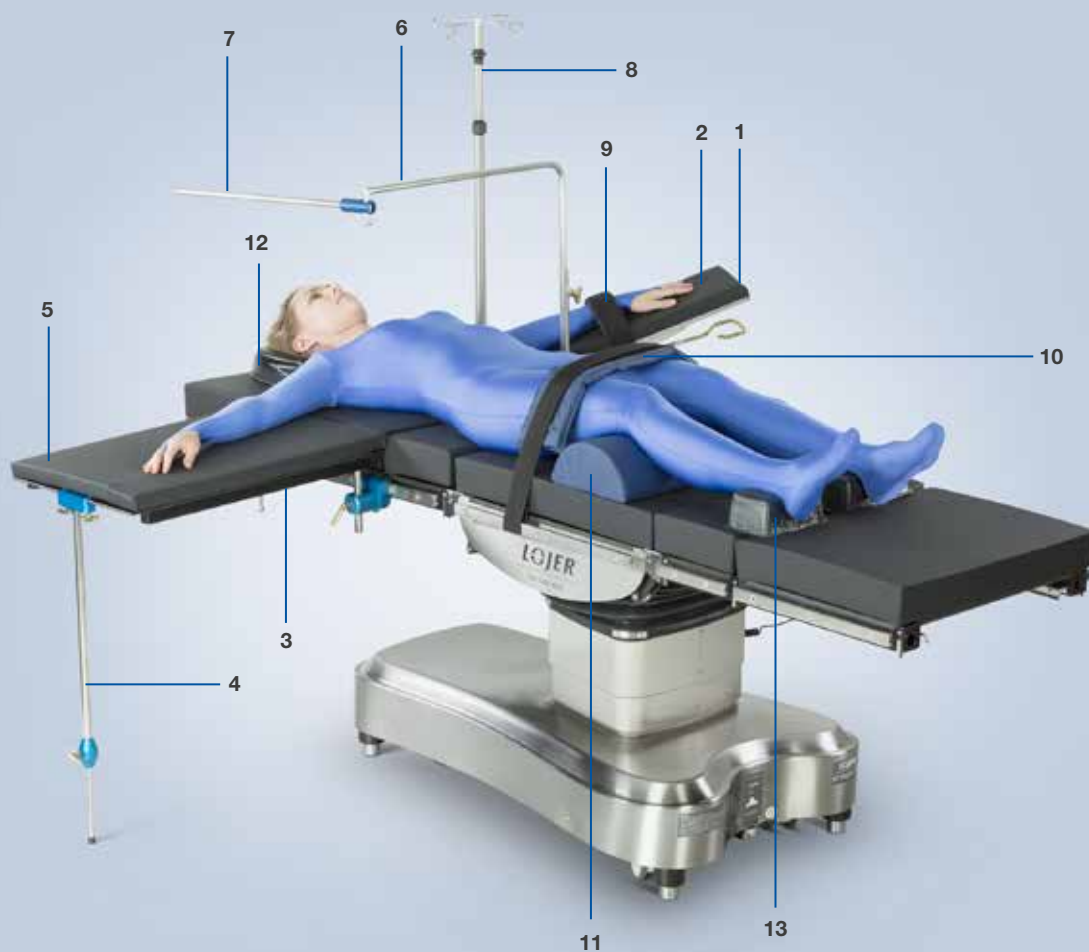

Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	AB2110	Опора для руки з затискачем	1	8
2	AB3010	М'яка подушка до опори для руки	1	10
3	AB5010	Підставка-столик для операцій на руці і кисті руки з 2 затискачами	1	11
4	AB5101	Опорна ніжка	1	11
5	AB6010	Матрац до підставки-столику для операцій на руці і кисті руки	1	12
6	AI1010	Анестезіологічна дуга з поворотним зажимом	1	15
7	AI1002	Подовжувальний важіль	1-2	15
8	AI2020	Стійка для переливання, пряма, з регулюванням кута нахилу	1	16
9	SS5020	Ремінь для опори руки	1	21
10	SS5050	Ремінь для ніг і тіла	1	22
11	SS6010	Подушка для гомілки і коліна	1	23
12	SS6160	Підкладка під голову, гель-піна	1	25
13	SS6240	Комплект підп'яточних опор, гель-піна	1	26

Положення лежачи на спині, ЛОР/пластична/офтальмологічна хірургія



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	OT4050	Спинна секція для ЛОР-операцій, довга	1	5
2	OT4051	Матрац з пружнов'язкої піни 75 мм для ЛОР-операцій, довгий	1	5
3	AB2110	Опора для руки з поворотним затискачем	1	8
4	AB3010	М'яка подушка до опори для руки	1	10
5	CL1010	Затискач з швидким кріпленням Ø 18 мм	2	13
6	AI1110	Анестезіологічна дуга, гнучка	1	15
7	AI2020	Стійка для переливання, пряма, з регулюванням кута нахилу	1	16
8	SS5020	Ремінь для опори руки	1	21
9	SS5050	Ремінь для ніг і тіла	1	22
10	SS6010	Подушка для гомілки і коліна	1	23
11	SS6120	Кільце під голову (для дорослих), гель-піна	1	24
12	SS6240	Комплект підп'яточних опор, гель-піна	1	26
13	HR1120	Підголівник з подвійним зчленуванням, вузький	1	28

Положення лежачи на спині, артроскопія коліна



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	OT5010	Розсувна ножна секція	1	6
2	OT5011	Матрац з пружнов'язкої піни 75 мм для розсувної ножної секції	1	6
3	AB2110	Опора для руки з поворотним затискачем	2	8
4	AB3010	М'яка подушка до опори для руки	2	10
5	CL2010	Затискач-замок	1	14
6	AI1010	Анестезіологічна дуга з поворотним затискачем	1	15
7	AI1002	Подовжувальний важіль	1-2	15
8	AI2120	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
9	SS3020	Тримач для артроскопії коліна	1	20
10	SS5020	Ремінь для опори руки	2	21
11	SS5040	Ремінь для ножної секції	1	22
12	SS6160	Підкладка під голову, гель-піна	1	25
13	SS6240	Комплект підп'яточних опор, гель-піна	1	26
14	SS6310	Валик для грудної клітини, короткий, гель-піна	1	27

Положення лежачи на животі, хірургія хребта



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	AB2210	Опора для руки з поворотним затискачем	2	9
2	AB3010	М'яка подушка до опори для руки, з пружнов'язкої піни	2	10
3	AI1010	Анестезіологічна дуга з поворотним затискачем	1	15
4	AI1002	Подовжувальний важіль	1-2	15
5	AI2120	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
6	SS5020	Ремінь для опори руки	2	21
7	SS5050	Ремінь для ніг і тіла	1	22
8	SS6010	Подушка під гомілку і коліно	1	23
9	SS6150	Підголовник для положення лежачи на животі, гель-піна	1	25
10	SS6320	Валик для грудної клітини, довгий, гель-піна	2	27
11	SS6330	Підкладка для операційного столу, гель-сітчаста тканина	1	27

Літотомічне положення, для гінекологічної та урологічної хірургії



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	AB2110	Опора для руки з затискачем	2	8
2	AB3010	М'яка подушка до опори для руки	2	10
3	CL2110	Затискач-замок, поворотний	2	14
4	AI1010	Анестезіологічна дуга з поворотним затискачем	1	15
5	AI1002	Подовжувальний важіль	1-2	15
6	AI2120	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
7	SS3030	Опора для ніг з подушкою і ременями	1	20
8	SS5020	Ремінь для опори руки	2	21
9	SS6160	Підкладка під голову, гель-піна	1	25
10	SS6251	Комплект підкладок до стремена для ноги, гель	1	26
11	OA4100	Підкладне судно 9 л з дренажем	1	35

Напівлежаче положення, операції на плечі



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	OT1030	Модуль для операцій на плечі	1	4
2	AB2240	Опора для руки з поворотним затискачем, коротка	1	9
3	AB3020	М'яка подушка до опори для руки, коротка	1	10
4	CL1010	Затискач з швидким кріпленням Ø 18 мм	2	13
5	AI2120	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
6	SS1070	Бічна опора для операцій на плечі	1	18
7	SS3010	Опора для ступень	1	19
8	SS5020	Ремінь для опори руки	1	21
9	SS5050	Ремінь для ніг і тіла	1	22
10	SS6010	Подушка під гомілку і коліно	1	23

дод. OT2010 2 0-секційний, типу «штир-гніздо»

1

Положення для нейрохірургії



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	AB2240	Опора для руки з поворотним затискачем, коротка	2	9
2	AB3020	М'яка подушка до опори для руки, коротка	2	10
3	CL1010	Затискач з швидким кріпленням Ø 18 мм	2	13
4	AI2120	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
5	SS3010	Опора для ступень, пара	1	19
6	SS5020	Ремінь для опори руки	2	21
7	SS5050	Ремінь для ніг і тіла	1	22
8	SS6010	Подушка під голінь і коліно	1	23
9	HR1100	Адаптер для спеціальних типів підголівників	1	28
10	HR1140	Підголівник для нейрохірургії, варіант А	1	29

Також є в наявності:

- HR1150** Підголівник для нейрохірургії, варіант В (включає в себе А + В)
- HR1160** Підголівник для нейрохірургії, варіант С (включає в себе А + В + С)

Положення на боці



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	AB2210	Опора для руки з поворотним затискачем	1	9
2	AB3010	М'яка подушка до опори для руки	1	10
3	CL2110	Затискач-замок, поворотний	4	14
4	AI1010	Анестезіологічна дуга з поворотним затискачем	1	15
5	AI1002	Подовжувальний важіль	1-2	15
6	AI2120	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
7	SS1020	Бічна опора, регульована, вузька	1	17
8	SS1050	Багатопозиційна бічна опора, широка	1	18
9	SS1060	Багатопозиційна бічна опора, кругла	1	18
10	SS4010	Бічна опора для руки, з ременем	1	20
11	SS5020	Ремінь для опори руки	1	21
12	SS5050	Ремінь для ніг і тіла	1	22
13	SS6120	Кільце під голову, гель-піна	1	24
14	SS6240	Комплект підп'яточних опор, гель-піна	1	26
15	SS6330	Підкладка для операційного столу, гель-сітчаста тканина	1	27

Положення лежачи, упор на коліна для хірургії хребта



Виріб:

№	Код	Найменування	Кількість виробів	Сторінка
1	AB2210	Опора для руки з поворотним затискачем	2	9
2	AB3010	М'яка подушка до опори для руки	2	10
3	CL2110	Затискач-замок	2	14
4	AI1010	Анестезіологічна дуга з поворотним затискачем	1	15
5	AI1002	Подовжувальний важіль	1-2	15
6	AI2020	Стійка для переливання, пересувна, для роботи у важких умовах	1	16
7	SS5020	Ремінь для опори руки	2	21
8	SS6010	Подушка під гомілку і коліно	1	23
9	SS6140	Кільце під голову в формі підкови, гель-піна	1	24
10	SS6330	Підкладка для операційного столу, гель-сітчаста тканина	1	27
11	OA1020	Приладдя для фіксації пацієнта при хірургії хребта 20-секційний, типу «штир-гніздо»	1	32
доп.	OT2010		1	





Продажі більш ніж в 30
країнах світу

Фото: Лікарня Нео (Фінляндія)

LOJER[®] *For easy care*



HygTech Alliance