



DESIGN / BUILD / INNOVATE
DISEÑAR / CONSTRUIR / INNOVAR
ПРОЕКТУВАННЯ / ВИРОБНИЦТВО / ІННОВАЦІЇ

GENERAL CATALOGUE CATÁLOGO GENERAL ЗАГАЛЬНИЙ КАТАЛОГ



2025









30 YEAR SERVICE LIFE
AÑOS DE VIDA ÚTIL

DESIGN

All products are designed at our factory in Pamplona.

Our design guidelines are functionality, ergonomics, asepsis, a tasteful design.

BUILD

The components used are mainly manufactured in Spain and Germany.

We cooperate with a network of approximately 60 suppliers.

The components designed by Insausti technical office are manufactured in suppliers production plants.

All trolleys and accessories are assembled upon request at our factory in Pamplona.

INNOVATE

Insausti products are developed for health professionals who think long-term and wish to offer their patients an excellent human and technical service.

ПРОЕКТУВАННЯ

Усі продукти розроблені на нашому заводі в Памплоні.

Наші принципи проектування — функціональність, ергономічність, асептика, вишуканий дизайн.

ВИРОБНИЦТВО

Компоненти, які використовуються, в основному виробляються в Іспанії та Німеччині.

Ми співпрацюємо з мережею постачальників, що налічує близько 60 постачальників

Компоненти, розроблені технічним офісом Insausti, виготовляються на заводах постачальників.

Усі візки та аксесуари збираються на замовлення на нашому заводі в Памплоні.

ІННОВАЦІЇ

Продукція Insausti розроблена для медичних працівників, які думають довгостроково та хочуть запропонувати своїм пацієнтам відмінне людське та технічне обслуговування.

INDEX ЗМІСТ

1 - TECHNICAL FEATURES	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
2 - MEDICAL TROLLEYS	МЕДИЧНІ ВІЗКИ	
LOW TROLLEYS	НИЗЬКІ ВІЗКИ	16
MULTIFUNCTION	БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ	
SQS SERIES	СЕРІЯ	18
300 SERIES	СЕРІЯ	22
PLASTER TROLLEY	ВІЗОК ДЛЯ ГІПСУВАННЯ	28
DIFFICULT INTUBATION / ISOLATION	СКЛАДНА ІНТУБАЦІЯ / ІНФЕКЦІЙНІ ВІДДІЛЕННЯ	29
MRI MPT		30
OPERATING ROOM	ОПЕРАЦІЙНІ	
ANAESTHESIA	АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ	33
CATHETER TROLLEYS	ВІЗКИ ДЛЯ КАТЕТЕРІВ	38
STORAGE TROLLEYS	ВІЗКИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	40
EMERGENCY	ВІЗКИ ДЛЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ	
SQM SERIES	СЕРІЯ	44
PAEDIATRIC	ПЕДІАТРИЧНІ	46
100 SERIES	СЕРІЯ	47
TREATMENT	ПРОЦЕДУРНІ	
SQM SERIES	СЕРІЯ	52
100 SERIES	СЕРІЯ	54
TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES	ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ З КАСЕТАМИ	60
UNIT DOSE MEDICATION	ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ	62
TRANSPORT TROLLEYS	ТРАНСПОРТНІ	68
3 - BASIC TROLLEYS	БАЗОВІ ВІЗКИ	
SQS SQUARE TROLLEYS	КВАДРАТНІ ВІЗКИ	74
OPEN TROLLEYS	ВІДКРИТІ ВІЗКИ	75
300 SIMPLE TROLLEYS	ПРОСТІ ВІЗКИ	76
300 DOUBLE TROLLEYS	ПОДВІЙНІ ВІЗКИ	78
LOW TROLLEYS	НИЗЬКІ ВІЗКИ	80
SQM SQUARE TROLLEYS	КВАДРАТНІ ВІЗКИ	82
100 SIMPLE TROLLEYS	ПРОСТІ ВІЗКИ	83
4 - ACCESSORIES	АКСЕСУАРИ	84

TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SQUARE TROLLEY КВАДРАТНИЙ ВІЗОК

~~ISO~~ 480 x 480 mm мм



SQS




SQM



DOUBLE TROLLEY ПОДВІЙНИЙ ВІЗОК

ISO 900 x 630 mm мм

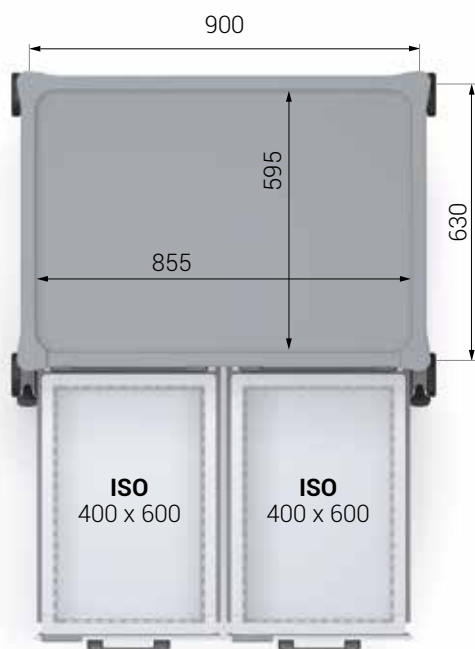

300 SERIES СЕРІЯ



TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


SIMPLE TROLLEY ПРОСТИЙ ВІЗОК

ISO 640 x 480 mm мм

ISO International Organization for Standardisation, ISO norm 3394
600 x 400 mm ISO drawers. Standard, interchangeable with hospital ISO furniture

ISO Міжнародна організація стандартизації, стандарт ISO 3394

Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм. Стандартні, взаємозамінні з лікарняними меблями ISO

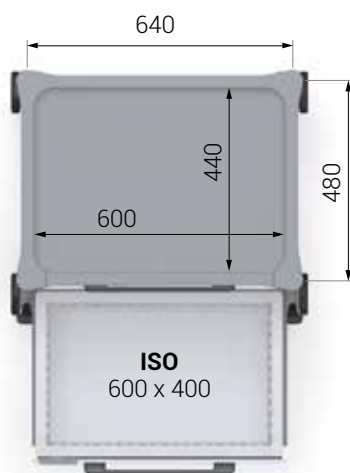

Drawer Вставні корзини шухляд ISO 50

56

Drawer Вставні корзини шухляд ISO 100

110

Drawer Вставні корзини шухляд ISO 200

200


LOW НИЗЬКИЙ



300 SERIES СЕРІЯ



100 SERIES СЕРІЯ

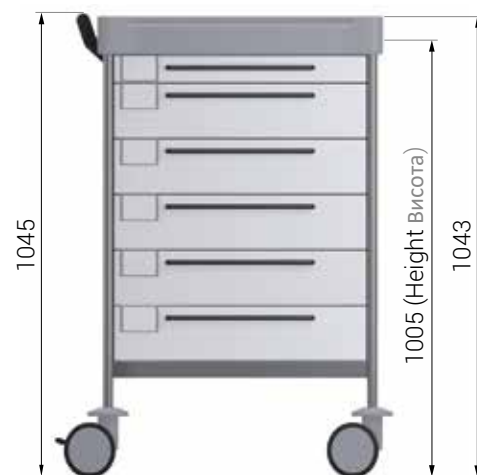

TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SQUARE TROLLEY КВАДРАТНИЙ ВІЗОК СС

~~ISO~~
480 x 480 mm мм

SOFT CLOSING SLIDES (Optional)
No closing noise is produced
Operating room, reanimation area, ICU

НАПРЯМНІ (СЛАЙДЕРИ) М'ЯКОГО
ЗАКРИТТЯ (додатково)
Закривається без звуку.
Операційна, реанімація, відділення
інтенсивної терапії



ASF



Prepared for elevated accessories

Підготовлений до додаткових аксесуарів

PE SANITIZED
ДЕЗІНФІКОВАНО



Ergonomic handle

Ергономічна ручка

Total opening
Steel ball-bearing slides
with retention system, 20 kg

Повне відкриття
Сталеві напрямні на
шарикопідшипниках із
системою кріплення,
20 кг.

PP SANITIZED
ДЕЗІНФІКОВАНО



Front stop
It protects the slide against
strong impacts when closing

Передній обмежувач
Захищає направляючі від
сильних ударів під час закриття



Prepared for ref. 32R, 37R, 39, 50, 51, 57

Підготовлено до арт. 32R, 37R, 39, 50, 51, 57

TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIMPLE TROLLEY ПРОСТИЙ ВІЗОК **CE**

DOUBLE TROLLEY ПОДВІЙНИЙ ВІЗОК **CE**

ISO

640 x 480 mm мм

900 x 630 mm мм

SOFT CLOSING SLIDES (Optional)

No closing noise is produced

Operating room, reanimation area, ICU

НАПРЯМНІ (СЛАЙДЕРИ) М'ЯКОГО
ЗАКРИТТЯ (Додатково)

Закриття без звуку.

Операційна, реанімація, відділення
інтенсивної терапії



ASF Simple trolley Простий візок

ASFN Double trolley Подвійний візок



Prepared for elevated accessories

Підготовлений до додаткових аксесуарів

PE SANITIZED

ДЕЗІНФІКОВАНО



Cap Tapón

Ergonomic handle

Ергономічна ручка

Total opening

Steel ball-bearing slides with
retention system, 20 kg

Повне відкриття

Сталеві напрямні на
шарикопідшипниках із
системою утримання, 20 кг

PE SANITIZED

ДЕЗІНФІКОВАНО



ABS

Front stop

It protects the slide against
strong impacts when closing

Передній обмежувач

Захищає направляючі від
сильних ударів при закриванні

Prepared for ref. 32L, 37L, 32NL, 37NL

Підготовлено до арт. 32L, 37L, 32NL, 37NL

TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MONOBLOC STRUCTURE МОНОБЛОЧНА СТРУКТУРА

AISI-304 stainless steel

Assembly with rivets and TIG welding

Side panels prepared for accessories (holes with caps)

Нержавіюча сталь AISI-304

Монтаж за допомогою заклепок та зварювання TIG.

Бічні панелі підготовлені для аксесуарів (отвори із заглушками)



PE, PP SANITIZED ДЕЗІНФІКОВАНО

Withstand disinfectants for the elimination of pathogens

Withstand 100% pure alcohol (not diluted), bleach, detergent, soap solutions, oils, polish, aqueous ammonia, chlorhexidine

Withstand constant cleaning protocols, they do not degrade

Дезінфікуючі засоби протистоять збудникам хвороб

Стійкий до 100% чистого спирту (нерозбавленого), відбілювачів, миючих засобів, мильних розчинів, масел, жирів, водного аміаку, хлоргексидину

Вони витримують постійні протоколи очищення, не псуються

PE, POLYETHYLENE WORK SURFACE

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВА

Protection on all 4 sides

Захист з усіх 4 сторін



TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PP, POLYPROPYLENE SQUARE DRAWERS

~~ISO~~ **480 x 480 mm мм**

PP, ШУХЛЯДИ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ КВАДРАТНІ

Polypropylene drawers, PP, manufactured in a single piece with slots for optional dividers.
Heights 57, 130 mm.

Поліпропіленові висувні шухляди, PP, виготовлені цільними деталями з прорізами для додаткових перегородок. Висота 57, 130 мм.



ISO DRAWERS ВСТАВНІ КОРЗИНИ ШУХЛЯД ISO 600 x 400 mm ISO 640 x 480 mm мм

ABS ISO drawers of standard dimensions according to ISO 3394.
Heights 50, 100, 200 mm.

900 x 630 mm мм

Вставні корзини шухляд ISO ABS зі стандартними розмірами
відповідно до ISO 3394. Висота 50, 100, 200 мм.



TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SQS SERIES СЕРІЯ - 480 x 480 mm (mm)

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Конструкція робочої поверхні дозволяє легко керувати візком
- Колеса Ø 100 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом

CE



300 SERIES СЕРІЯ - ISO 640 x 480 mm (mm)

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Конструкція робочої поверхні дозволяє легко керувати візком
- Колеса Ø 100 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом

CE



300 SERIES СЕРІЯ - ISO 900 x 630 mm (mm)

- The work surface design allows you to move the trolley easily
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Конструкція робочої поверхні дозволяє легко керувати візком
- Колеса Ø 100 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом

CE



700 SERIES СЕРІЯ - ISO 640 x 480 / 900 x 630 mm (mm)

- Phenolic or methacrylate doors
- Key locking
- Handles, left side
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Двері з фенолу або метакрилату
- Замок з ключем
- Ручки, зліва
- Колеса Ø 100 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом



TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

ВИСОКО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SQM SERIES СЕРІЯ - 480 x 480 mm (mm)

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm simple wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Ручка піднята, ліва сторона
- Бампери для захисту від ударів
- Прості колеса Ø 125 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом



CE



100 SERIES СЕРІЯ - ISO 640 x 480 mm (mm)

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm double wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Ручка піднята, ліва сторона
- Бампери для захисту від ударів
- Подвійні колеса Ø 125 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом



CE



500 SERIES СЕРІЯ - 480 x 480 mm (mm) - 640 x 480 mm (mm) - 900 x 570 mm (mm)

- Elevated push handle, left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm simple wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Ручка піднята, ліва сторона
- Бампери для захисту від ударів
- Одинарні колеса Ø 125 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом



600 SERIES СЕРІЯ - 640 x 480 / 900 x 630 mm (mm)

- Phenolic or methacrylate doors
- Key locking
- Handles, both sides
- Ø 125 mm double wheels, 2 antistatic, 2 with dual lock
- Двері з фенолу або метакрилату
- замок з ключем
- Ручки, з обох боків
- Подвійні колеса Ø 125 мм, 2 антистатичні, 2 з подвійним замком



Fixed wheel
Фіксоване колесо



Swivel wheel
Колесо, що обертається



Locked wheel
Заблоковане колесо



TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SQUARE TROLLEY КВАДРАТНИЙ ВІЗОК

Drawer colour Кольорові шухляди



W White Білий



B Blue Синій



R Red Червоний

SIMPLE TROLLEY / DOUBLE TROLLEY ПРОСТИЙ ВІЗОК/ ПОДВІЙНИЙ ВІЗОК

Front drawer colour Кольорові передньої панелі шухляд



W White Білий



B Blue Синій



F Lilac Бузковий



G Green Зелений



Y Yellow Жовтий



R Red Червоний

600 / 700 SERIES СЕРІЯ

Doors Двері



DN HPL phenolic, light grey
HPL фенольний, світло-сірий



TT Transparent methacrylate
Прозорий метакрилат

TECHNICAL FEATURES ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Plastic material. ISO norm 7810 identification card, international standard

Пластиковий матеріал. Ідентифікаційна картка стандарту ISO 7810, міжнародний стандарт

SQUARE TROLLEY КВАДРАТНИЙ ВІЗОК

Each drawer includes as standard one white card

Кожна шухляда стандартно містить білу картку

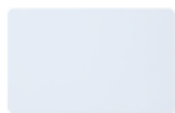

White card
Біла картка

SIMPLE TROLLEY / DOUBLE TROLLEY ПРОСТИЙ ВІЗОК / ПОДВІЙНИЙ ВІЗОК

Each drawer includes as standard one card holder and one white card

Кожна шухляда стандартно включає тримач карток і білу картку



Card holder
Тримач карток



White card
Біла картка

COLOUR CARDS (Optional) КОЛЬОРОВІ КАРТКИ (Додатково)



CR Red Червона



CG Green Зенена



CP Pink Рожева



CB Blue Синя



CO Orange Помаранчева



CF Lilac Бузкова



CY Yellow Жовта



CN Grey Сіра



SQ061 W.CR.CP.CO.CY.CG.CB

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT

~~ISO~~

НИЗЬКІ ВІЗКИ, ЗМЕНШЕНА ВИСОТА

CE

480 x 480 mm мм

GYNECOLOGY, PHLEBOTOMY, OUTPATIENTS CLINICS

ГІНЕКОЛОГІЯ, ФЛЕБОТОМІЯ, АМБУЛАТОРІЯ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

- ОДНОРАЗОВИЙ КОНТЕЙНЕР
- СПИРТ, ХЛОРГЕКСИДИН В БАНОЧКАХ

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЬНИКИ (Додатково)



8 DMQ, 6 DSQ



Q002LW B

SQ061M4LW B.26LW(R1Q)

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT

НИЗЬКІ ВІЗКИ, ЗМЕНШЕНА ВИСОТА

CE

~~ISO~~

480 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

To store it under 900 mm work tables

For users working in sitting position

Зберігається під робочими столами шириною 900 мм

Для користувача, який працює в положенні сидючи



Q011LW W

SQ064M4LW W.26LW(R2Q).33R.50

Phlebotomy Флеботомія



Q001LW B

SQ061M4LW B.32R



Q003LW W

SQ061M4LW W.26LW(R1Q).30.33L



Q004LW W

SQ061M4LW W.26(RA4Q.A5).32R

ISO 640 x 480 mm мм



3100LW W

362M5LW W.32R



3103LW B

362M5LW B.32L.33R.50



3105LW G

362M5LW G.26(RA4.A5).32R

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ SQS SERIES СЕРІЯ CЄ

~~ISO~~

480 x 480 mm мм

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, КАРДІОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, АМБУЛАТОРІЇ КЛІНІКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ



DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

Q091 B

SQ061 B.26(RA4Q.A5).32R

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ SQS SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
480 x 480 mm мм

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, КАРДІОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, АМБУЛАТОРІЇ КЛІНІКИ



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



8 DMQ, 8 DSQ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР



FOLD
DOWN TRAY

СКЛАДНА
ПОЛИЧКА-
ПІДСТАВКА

Q096 W

SQ061 W.26(RA4Q.A5).30.32L

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИ SQS SERIES СЕРІЯ CЄ

~~ISO~~

480 x 480 mm мм

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS ВІДДІЛЕННЯ

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, КАРДІОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, АМБУЛАТОРІЇ КЛІНІКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



8 DMQ, 8 DSQ

ALCOHOL, CHLORHEXIDINE JARS

СПИРТ, ХЛОРГЕКСИДИН В БАНКАХ

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

FOLD
DOWN TRAY

СКЛАДНА
ПОЛИЧКА-
ПІДСТАВКА



Q092 W.(6)CP

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ SQS SERIES СЕРІЯ СЕ

480 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



Q024 W
SQ021 W.26LW(R1Q)



Q025 W
SQ022 W.32R



Q027 B
SQ021TXQ B.26M(R75QM)



Q054 B
SQ061 B.32R



Q058 B
SQ061 B.32R.46



Q063 W
SQ061 W.32L.33R.50



Q064 W
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32L.33R.50



Q072 B
SQ061 B.30.32L



Q077 W
SQ061 W.26LW(R1Q).30.33L

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, КАРДІОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, АМБУЛАТОРІЇ КЛІНІКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- СПИРТ, ХЛОРЕКСИДИН
В БАНКАХ
- КОРОБКА З
РУКАВИЧКАМИ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР



Contaminated
waste on right side

Забруднені
відходи з правого
боку

WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ



3151 B

365 B.26LW(R1).33R.50

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, КАРДІОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, АМБУЛАТОРІЇ КЛІНІКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS
- DISPOSABLE CONTAINER
- СПИРТ, ХЛОРГЕКСИДИН
В БАНКАХ
- ОДНОРАЗОВИЙ КОНТЕЙНЕР

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

3 GLOVE BOX

3 КОРОБКИ
З РУКАВИЧКАМИ



WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ

3133 W

365 W.26LW(R1).46.50

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ OPEN TROLLEY ВІДКРИТІ ВІЗКИ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

ICU, CARDIOLOGY, DRESSING, OUTPATIENTS CLINICS

ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, КАРДІОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, АМБУЛАТОРІЇ КЛІНІКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



Retention stop rails

Напрявні з утримуючим упором



365AB

CENTRAL SUPPORT (Optional)

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДТРИМКА (Додатково)



26LW(R1)

SIDE SUPPORT (Optional)

БІЧНА ПІДТРИМКА (Додатково)



32R

BIN (Optional)

ВІДРО (Додатково)



50AB - 13 Litres Літрів

50BAB - 2 x 13 Litres Літрів

51AB - 26 Litres Літрів

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ
300 SERIES СЕРІЯ **CE**

ISO
640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



3102 B
322 B.32R



3107 G
333 G.32R



3105 Y
332 Y.26LW(R1)



3129 W
365 W.32R



3127 B
365 B.32R.46



3153 W
365 W.(2)32L.33R.50



3140 B
365 B.26LW(R1).30.46.50



3157 W
365 W.26(R1.R1).33R.50



3145 G
365 G.26(RA5.A5.R1).32R

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

TRAUMATOLOGY, DRESSING, SURGERY

ТРАВМАТОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗКИ, ХІРУРГІЯ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS
- GLOVE BOX

- СПИРТ, ХЛОРЕКСИДИН
В БАНКАХ
- КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



(2)H5/8, (6)H10/4, (2)H20/4

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР



3820 B

N365 B.26LW(R1N).32NR

MULTIFUNCTION БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ 300 SERIES SERIE C€

ISO

900 x 630 mm мм

TRAUMATOLOGY, DRESSING, SURGERY

ТРАВМАТОЛОГІЯ, ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНІ, ХІРУРГІЯ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



3808
N305.26LW(R1N)



3800 G
N322 G.26LW(R1N)



3818 W
N365 W.26LW(R1N)



3830 Y
N365 Y.26(R2N.R1N)



3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR



3850 G
N365 G.26(RA4N.A5).32NR



3860 W
N362M12 W.26(RA4N.A5).(2)32NR

PLASTER TROLLEY ВІЗОК ДЛЯ ГІПСУВАННЯ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
900 x 630 mm мм

Stainless steel AISI-304 monobloc structure.

Polyethylene work surface, PE

LXN Stainless steel protection, resists contact with fiberglass bandages

Моноблочна структура з нержавіючої сталі AISI-304

Робоча поверхня поліетиленова, PE

LXN Захист з нержавіючої сталі, стійкий до контакту з бинтами зі скловолокна

BANDAGE SHELF ROLLS

ПОЛИЦЯ ДЛЯ РУЛОНІВ БИНТІВ

5 dividers, adjustable

5 розділювачів, регулюються



R12N

1 PLASTER-BASIN SUPPORT

1 ОПОРА ДЛЯ РАКОВИНИ З ГІПСОМ

8.8 litres, PC transparent

Removable, supports on ref. 37NR

8.8 літрів, PC прозорий

Знімний, кріпиться на арт. 37NR



49



3892 W

N322 W.LXN.26(R12N.R2N).37NR.49

DIFFICULT INTUBATION Складна інтубація

300 SERIES СЕРІЯ C €

ISO
640 x 480 mm мм



3702 W
364M6 W.12B.14.32R



3708 W
364M6 W.12B.14.26LW(R2).32R.36.44L

SUCTION UNIT SUPPORT
(Optional)
ПІДСТАВКА ДЛЯ АСПІРАТОРА
(Додатково)



39

ISOLATION Інфекційні відділення

300 SERIES СЕРІЯ C €

ISO
640 x 480 mm мм

Infection control

To store protective disposable material, clothes, caps, masks, gloves, hose

Інфекційний контроль

Для зберігання одноразових засобів захисту, одягу, головних уборів, масок, рукавичок, тощо



3732 Y
366M6 Y.46



3738 Y
366M6 Y.46.48L.51

GOWN SUPPORT
(Optional)
ПІДТРИМКА ДЛЯ
ХАЛАТІВ (Додатково)



41

MRI ROOM КАБІНЕТ МРТ

CE

ISO

640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



3 Tesla

Certificate of MRI conformance
Сертифікат відповідності для МРТ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

SYRINGES

ПРОЗОРИ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

KEY LOCKING

(Optional)

ЗАМОК З КЛЮЧЕМ
(Додатково)



10MR

3 GLOVE BOX HOLDER
(Optional)

ТРИМАЧ ДЛЯ 3 КОРОБОК
З РУКАВИЧКАМИ
(Додатково)



46

- DISPOSABLE
CONTAINER
- GLOVE BOX

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК

BIN (Optional)
ВІДРО (Додатково)



50MR - 13 Litres Літрів

51MR - 26 Litres Літрів



3607MRI G

365MRI G.26(RA4.A5).32R

Anaesthesia

Анестезіологічний

MRI ROOM КАБІНЕТ МРТ

CE

ISO

640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

Trolley manufactured with antimagnetic materials
4 antistatic wheels with brake

Візок виготовлений з антимагнітних матеріалів
4 антистатичні колеса з гальмами



3 Tesla

Certificate of MRI conformance
Сертифікат відповідності для МРТ



305MRI

Multifunction

Багатофункціональний



3102MRI B

322MRI B.32R

Multifunction

Багатофункціональний



3126MRI W

364MRI W.32R

Multifunction

Багатофункціональний



3129MRI Y

365MRI Y.32R

Multifunction

Багатофункціональний



3232MRI R

365MRI R.12MR.14.(2)32R.36MR.41

Emergency

Невідкладна допомога



706MRI OP.(2)60.(4)72.73

Storage

Зберігання

OPERATING ROOM ОПЕРАЦІЙНІ



ANAESTHESIA АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
900 x 630 mm мм

OPERATING ROOM

ОПЕРАЦІЙНА



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

- MEDICATION
LABELS
DISPENSER
- GLOVE BOX
- ДИСПЕНСЕР
ЕТИКЕТОК
ДЛЯ ЛІКІВ
- КОРОБКА
ДЛЯ РУКАВИЧОК



DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



(2)H5/16, (6)H10/4, (2)H20/4

**DISPOSABLE
CONTAINER**

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

3956 G

N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

ANAESTHESIA АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ

300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА, ОПЕРАЦІЙНА, РЕАНІМАЦІЙНА



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/16, (3)H10/4, H20/4



- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК

3607 G

365 G.26(RA4.A5).32R

ANAESTHESIA АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

OPERATING ROOM

ОПЕРАЦІЙНА



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

- MEDICATION LABELS DISPENSER
- GLOVE BOX

- ДИСПЕСЕР ЕТИКЕТОК ДЛЯ ЛІКІВ
- КОРОБКА ДЛЯ РУКАВИЧОК

FOLD
DOWN TRAY

СКЛАДНА
ПОЛИЧКА-
ПІДСТАВКА



3684 B

365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

ANAESTHESIA АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИ 300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

EMERGENCY ROOM, OPERATING ROOM, REANIMATION AREA

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА, ОПЕРАЦІЙНА, РЕАНІМАЦІЙНА



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

ANAESTHESIA TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНИЙ ВІЗОК ПІДГОТУВАНИЙ ДО ЦИФРОВАННЯ

COMPUTER

КОМП'ЮТЕР

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

ОПОРА VESA,
3 ПОЛОЖЕННЯ,
РЕГУЛЮЄТЬСЯ

- DISPOSABLE
CONTAINER
- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE
JARS

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- СПИРТ, ХЛОРГЕКСИДИН
В БАНКАХ

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

FOLD
DOWN TRAY

СКЛАДНА
ПОЛИЧКА_
ПІДСТАВКА



3695 W

362M6TX W.26M(R75M).30.(2)32L

ANAESTHESIA АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ
300 SERIES СЕРІЯ **CE**

ISO
640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



3613 W
362M6 W.26(RA4.A5).32R



3611 G
365 G.26(RA4.A5).27EV.32R



3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L



3680 Y
365 Y.26(RA5.A5.R1).30.33L



3609 Y
365 Y.26(RA4.A5).(2)32R.33L



3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L



3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L



3694 W
362M6 W.26(RA4.A5.R2).30.32L

CATHETER TROLLEY ВІЗОК ДЛЯ КАТЕТЕРІВ 700 SERIES СЕРІЯ

ISO
640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

Adjustable shelf, phenolic
600 x 400 mm ISO drawers

Регульована полиця, фенол
Корзини ISO 600 x 400 мм

DN Light grey doors Світло-сірі двері

TT Transparent doors Прозорі двері



706 DN.60CAT

CATHETERS SHELF
ПОЛИЧКА ДЛЯ КАТЕТЕРІВ
25 hooks 25 гачків



60CAT

CATHETERS RAIL, 3 HOOKS
(Optional)
РЕЙКА ДЛЯ КАТЕТЕРІВ, 3 ГАЧКА
(Додатково)

Catheters maximum height 1780 mm
Максимальна висота катетерів 1780 мм



R7CAT3

CATHETER TROLLEY ВІЗОК ДЛЯ КАТЕТЕРІВ 700 SERIES СЕРІЯ

ISO
900 x 630 mm мм



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

Adjustable shelf, phenolic
400 x 600 mm ISO drawers

Регульована полиця, фенол
Корзини ISO 400 x 600 мм

DN Light grey doors Світло-сірі двері

TT Transparent doors Прозорі двері



720 TT.62CAT.(2)62.(4)72.73

CATHETERS SHELF
ПОЛИЦЯ ДЛЯ КАТЕТЕРІВ
15 hooks 15 гачків



62CAT

CATHETERS RAIL, 4 HOOKS
(Optional)
РЕЙКА ДЛЯ КАТЕТЕРІВ, 4 ГАЧКИ
(Додатково)

Catheters maximum height 1780 mm
Максимальна висота катетерів 1780 мм



R7CAT4

STORAGE TROLLEY ВІЗОК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 700 SERIES СЕРІЯ

ISO

900 x 630 mm мм

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Doors with key locking
400 x 600 mm ISO drawers
Maximum capacity 10 + 10 = 20 ISO drawers 100 mm height

Моноблочна конструкція з нержавіючої сталі AISI-304
Монтаж за допомогою заклепок і зварювання TIG
Двері з замком на ключ
Корзини ISO 400 x 600 мм
Максимальна місткість 10 + 10 = 20 корзин ISO висотою 100 мм

DN Light grey doors Світло-сірі двері

TT Transparent doors Прозорі двері

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)



68B

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
ПОЛИЦЯ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ (Додатково)



62 - 400 x 600 mm мм

RETENTION STOP (Optional)
УТРИМУЮЧИЙ СТОПЕР (Додатково)
1 set per drawer 1 комплект на шухляду



TR



720 DN.(3)62.(6)72.(2)73

STORAGE TROLLEYS ВІЗКИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ 700 SERIES СЕРІЯ

**ISO
640 x 480 mm**

RETENTION STOP (Optional)
УТРИМУЮЧИЙ СТОПЕР (Додатково)
1 set per drawer 1 комплект на шухляду



TR

DN Light grey doors Світло-сірі двері

TT Transparent doors Прозорі двері

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)



68



706 OP.(8)72.73



706 DN.(3)60.(2)72.73



706 DN.(2)60.(4)72.73



706 DN.(2)60.(2)72.(2)73



706 DN.(6)72.(2)73

EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА



EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА



EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

SQM SERIES СЕРІЯ CЄ

~~ISO~~
480 x 480 mm мм



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SIMPLE WHEELS ОДИНАРНІ КОЛЕСА Ø 125 мм



Bexen cardio

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

ПІДСТАВКА ДЛЯ
ДЕФІБРИЛЯТОРА
2 ОСІ ПОВОРОТУ

SERUM

ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

CPR BOARD

СРР ДОШКА

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

ГАЗОВИЙ БАЛЛОН
Ø 110/140

DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



12 DMQ, 8 DSQ

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК

SEAL LOCKING
ЗАМОК ДЛЯ
ПЛОМБ



Q260 R

SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40

EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА SQM SERIES СЕРІЯ СЄ

~~ISO~~
480 x 480 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

Security, manual locking
Numbered disposable seals

Безпека, ручне блокування
Одноразові номерні пломби

SIMPLE WHEELS ОДИНАРНІ КОЛЕСА Ø 125 mm



SUCTION UNIT SUPPORT (Optional)
ПІДСТАВКА ДЛЯ АСПІРАТОРА (Додатково)



39



Q222 R
SQ161 R.12.14.36.40
Primary care Первинна допомога



Q272 B
SQ161 B.12.14.34.36.40



Q299 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.39.40



Q224 R
SQ161 R.12.14.26LW(R7Q).
28EV.32R.34.36.40

BROSELOW PAEDIATRIC EMERGENCY

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ДЛЯ ДІТЕЙ

100 SERIES СЕРІЯ CЄ

ISO

640 x 480 mm мм

BROSELOW PAEDIATRIC TAPE (Optional)
ПЕДІАТРИЧНА СТІЧКА BROSELOW (Додатково)



TBR

SERUM

ІНФУЗІЙНА СТІЙКА



600 x 400 mm ISO drawers

HBR Broselow 9 colour card holder set
4 drawers divided into 2 equal parts

Корзини ISO 600 X 400 мм

HBR Набір тримачів карток Broselow 9 кольорів
4 шухляди розділені на 2 рівні частини

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

ГАЗОВИЙ БАЛОН
Ø 110 / 140



DRAWER WITHOUT DIVIDER

ШУХЛЯДА БЕЗ РОЗДІЛЬНИКА

EACH DRAWER LOCKING
WITH SEAL

ЗАКРИВАННЯ
КОЖНОЇ ШУХЛЯДИ НА
ПЛОМБУ

AUXILIARY DRAWER
WITHOUT DIVIDER

ДОПОМІЖНА
ШУХЛЯДА БЕЗ
РОЗДІЛЬНИКА

1200 W

164M6 W.HBR.12B.14.36.40.(4)DS10

EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

100 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

DOUBLE WHEELS ПОДВІЙНІ КОЛЕСА Ø 125 мм



DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/16, (3)H10/4, H20/4

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES

ПІДСТАВКА ДЛЯ
ДЕФІБРИЛЯТОРУ
2 ОСІ ПОВОРОТУ

SERUM

ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

CPR BOARD

СРР ДОШКА

GAS BOTTLE
Ø 110 / 140

ГАЗОВИЙ БАЛОН
Ø 110 / 140

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК

SEAL LOCKING

ЗАМОК ДЛЯ
ПЛОМБ



1296 R

165 R.12.14.28.32R.34.36.40

EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

100 SERIES СЕРІЯ CE

ISO
640 x 480 mm мм



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



(2)H5/16, (3)H10/4, H20/4

DEFIBRILLATOR
2 ROTATION AXLES
ПІДСТАВКА ДЛЯ
ДЕФІБРИЛЯТОРУ, 2 ОСІ
ПОВОРОТУ



SERUM

ІНФУЗІЙНА СТІЙКА

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

GLOVE BOX

КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК

CPR BOARD

CPR ДОШКА

GAS BOTTLE

Ø 110 / 140

ГАЗОВИЙ БАЛОН

Ø 110 / 140

- DISPOSABLE CONTAINER
- GLOVE BOX

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- КОРОБКА ДЛЯ
РУКАВИЧОК
SEAL LOCKING

ЗАМОК ДЛЯ
ПЛОМБ

1210 R

162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).28EV.32R.34.36.40

EMERGENCY НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА 100 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

Security, manual locking. Numbered disposable seals
Безпека, ручне замикання. Одноразові номерні пломби

SIMPLE WHEELS Ø 125 mm (Optional)
ОДИНАРНІ КОЛЕСА Ø 125 мм (Додатково)



WS12



1270 R.AXWD12.WS12
165 R.AXWD12.WS12.12.14.28.36.40
Primary care Первинна допомога



1272 B.AXWD12.WS12
165 B.AXWD12.WS12.12.14.34.36.40



1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1254 R
165 R.12.14.32R.34.36.40.46



1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39.40



1224 R
165 R.12.14.26LW(R7).28EV.
32R.34.36.40



TREATMENT ПРОЦЕДУРНИ



TREATMENT ПРОЦЕДУРНІ SQM SERIES СЕРІЯ СЕ

~~ISO~~
480 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

TREATMENT TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

ПРОЦЕДУРНИЙ ВІЗОК ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДО ЦИФРУВАННЯ

COMPUTER

КОМП'ЮТЕР

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

ПІДТРИМКА
VESA 3
ПОЛОЖЕННЯ,
РЕГУЛЮЄТЬСЯ

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- СПИРТ, ХЛОРЕКСИДИН
В БАНКАХ

3 GLOVE BOX

3 КОРОБКИ
ДЛЯ РУКАВИЧОК

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



4 DMQ, 8 DSQ

FOLD
DOWN TRAY

СКЛАДНА
ПОЛИЧКА-
ПІДСТАВКА

WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ



Q190 W

SQ161TXQ W.26M(R75QM).30.32L.46.50

TREATMENT ПРОЦЕДУРНІ SQM SERIES СЕРІЯ СЕ

~~ISO~~
480 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

SIMPLE WHEELS ОДИНАРНІ КОЛЕСА Ø 125 mm



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ



Q102 W
SQ122 W.32R.50



Q105 B
SQ132 B.32R.50



Q126 W
SQ161 W.32L.33R.50
Phlebotomy Extracciones



Q106 W
SQ161 W.32R.46.50



Q108 W
SQ161 W.27.32R.46.50



Q112 W
SQ161 W.32R.46.48L.50



Q136 B
SQ161 B.26LW(R1Q).33R.46.50



Q142 B
SQ161 B.30.32L.46.50



Q158 W
SQ161 W.26(RA5Q.A5.R1Q).
30.33L.46.50

TREATMENT ПРОЦЕДУРНІ
OPEN TROLLEY ВІДКРИТІ ВІЗКИ **CE**

ISO
640 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ



Retention stop rails
 Направляючі з упором

CENTRAL SUPPORT (Optional)
 ЦЕНТРАЛЬНА ПІДТРИМКА (Додатково)



26LW(R1)

- DISPOSABLE CONTAINER
 - GLOVE BOX

- ОДНОРАЗОВИЙ
 КОНТЕЙНЕР
 - КОРОБКА ДЛЯ
 РУКАВИЧОК



WASTE BIN
 ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ

165AB.32R.50AB

TREATMENT ПРОЦЕДУРНІ 100 SERIES СЕРІЯ CE

ISO
640 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

DOUBLE WHEELS ПОДВІЙНІ КОЛЕСА Ø 125 мм



DIVIDERS (Optional)

РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

- DISPOSABLE CONTAINER
- ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS

- ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР
- СПИРТ,
ХЛОРСЕКСИДИН В
БАНКАХ

3 GLOVE BOX

3 КОРОБКИ
ДЛЯ РУКАВИЧОК



WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ

1606 B
165 B.32R.46.50

TREATMENT ПРОЦЕДУРНІ 100 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SYRINGES

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H5/8, (3)H10/4, H20/4

ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE JARS

СПИРТ, ХЛОРГЕСКИДИН В БАНКАХ

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР



Contaminated waste
on right side

Забруднені відходи з
правого боку

WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ

3 GLOVE BOX

3 КОРОБКИ
ДЛЯ РУКАВИЧОК



1638 W

165 W.26(RA4.A5.R1).33R.46.50

TREATMENT ПРОЦЕДУРНІ 100 SERIES СЕРІЯ CЕ

ISO
640 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SIMPLE WHEELS Ø 125 mm (Optional)
ОДИНАРНІ КОЛЕСА Ø 125 мм (Додатково)



WS12



1601 W.AXWD12.WS12
122 W. AXWD12.WS12.32R.50



1602 G.AXWD12.WS12
133 G.AXWD12.WS12.32R.50



1607 W
165 W.32R.33L.46.50



1608 W
165 W.27.32R.46.50



1672 B
165 B.26(RA4.A5).32R.46.50



1625 B
165 B.32L.33R.46.50



1636 G
165 G.26LW(R1).33R.46.50



1642 B
165 B.30.32L.46.50

UNIT DOSE MEDICATION ДЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ



UNIT DOSE MEDICATION для лікарських засобів



TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES

ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ З КАСЕТАМИ

600 SERIES СЕРІЯ

HOSPITAL PHARMACY

ЛІКАРНЯНА АПТЕКА

Handles, both sides

Key locking

C5, unit dose medication cassettes

600 x 400 mm ISO drawers

Ø 125 mm simple wheels

Ручки, з обох боків

Блокування на ключ

C5, одноразові дозовані лікарські касети

Шухляди ISO 600 x 400 мм

Прості колеса Ø 125 мм

Maximum 8 cassettes - 40 patients

Максимально 8 касет - 40 пацієнтів

UPPER SUPPLEMENT (Optional)

ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)



68

Maximum 10 cassettes - 50 patients

Максимально 10 касет - 50 пацієнтів



608FAR.8MT.(6)C5.(2)72



610FAR.10MT.(10)C5

TRANSPORT TROLLEYS WITH CASSETTES ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ З КАСЕТАМИ

600 SERIES СЕРІЯ

HOSPITAL PHARMACY

ЛІКАРНЯНА АПТЕКА

Handles, both sides
Key locking, both sides
C5, unit dose medication cassettes
600 x 400 mm ISO drawers
Ø 150 mm double wheels
Maximum 8 + 8 = 16 cassettes - 80 patients

Ручки, обидві сторони
Замикання на ключ, з двох сторін
C5, касети для однодозових ліків
Шухляди ISO 600 x 400 мм
Подвійні колеса Ø 150 мм
Максимум 8 + 8 = 16 касет - 80 пацієнтів



616FAR.(2)8MT.(16)C5

ISO
850 x 640 mm мм

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)




68B

2 DUAL LOCK WHEELS
2 ПОДВІЙНИХ КОЛЕСА З БЛОКУВАННЯМ
4 antistatic 4 антистатичні



-  Fixed wheel
Фіксоване колесо
-  Swivel wheel
Колесо обертається
-  Locked wheel
Заблоковане колесо

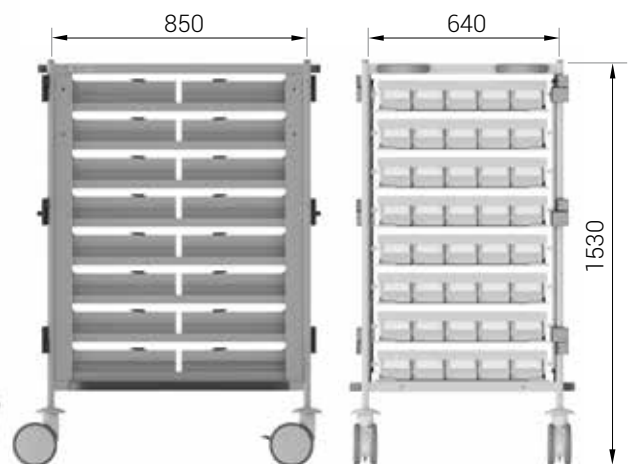

UNIT DOSE MEDICATION **ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ** 600 / 100 SERIES **СЕРІЇ СЄ**

ISO

INTERCHANGEABLE CASSETTE, 5 PATIENTS **ЗМІННА КАСЕТА, 5 ПАЦІЄНТІВ**

Compatible with pharmacy ISO furniture
Polypropylene and aluminium, grey colour
Cassette lock, epoxy painted steel
Locked cassette, card upper part hidden, lower part visible
Cassette total weight 4,6 kg.

Сумісний з аптечними меблями ISO
Поліпропілен та алюміній, колір сірий
Касетний замок, сталь з епоксидним покриттям
Касета закрита, верхня частина картки прихована, нижня частина видна
Загальна вага касети 4,6 кг




C5

MEDICATION CONTAINER **КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛІКІВ**

Capacity: 3 litres
ISO norm 7810 identification card, international standard
Appropriate for intravenous therapy medication, re-packaged medication in unit doses, pills, prefilled syringes, syrups, etc

Ємність: 3 літри
Ідентифікаційна картка стандарту ISO 7810, міжнародний стандарт
Підходить для внутрішньовенної терапії ліків, повторно упакованих ліків у стандартних дозах, таблеток, попередньо наповнених шприців, сиропів тощо

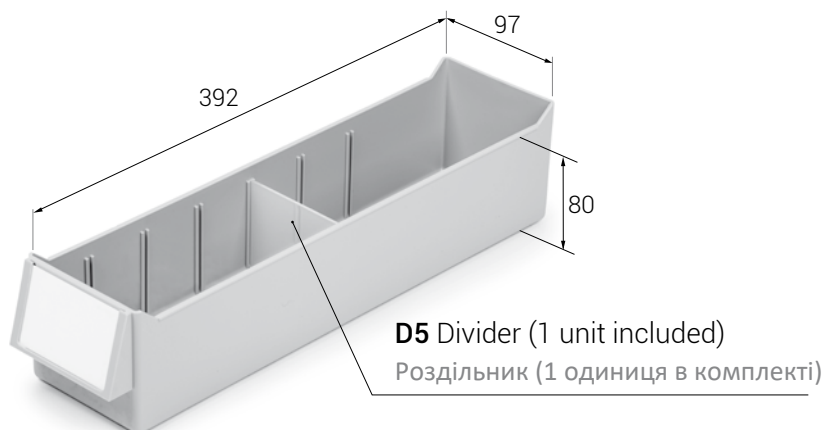

UNIT DOSE MEDICATION ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

100 SERIES СЕРІЯ CE

Key locking (included)

Блокування на ключ (в комплекті)

ISO
640 x 480 mm мм



106M6

106M6TX

Keyboard drawer, cable lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



108M6



110M6

110M6TX

Keyboard drawer, cable lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



112M6



113M6

113M6TX

Keyboard drawer, cable lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



114M6



117M6

117M6TX

Keyboard drawer, cable lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



118M6



120M6

TREATMENT - MEDICATION ПРОЦЕДУРНІ - ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ISO 100 SERIES СЕРІЯ СЕ 640 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

A single health worker performs the treatment and administers the medication to the patient

Один медичний працівник проводить лікування та вводить ліки пацієнту

SYRINGES

ПРОЗОРИ-ПЛАСТИКОВІ
КОНТЕЙНЕРИ

ALCOHOL,
CHLORHEXIDINE
JARS

СПИРТ,
ХЛОРГЕКСЕДИН
В БАНКАХ

SERUM,
PARACETAMOL DRAWER

ШУХЛЯДА ДЛЯ
СИРОВАТКИ,
ПАРАЦЕТАМОЛУ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



(2)H10/4, H20/4

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

KEY LOCKING

БЛОКУВАННЯ НА КЛЮЧ

REMOVABLE CASSETTE

ЗНІМНА КАСЕТА

WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ



Contaminated
waste on right side

Забруднені
відходи з правого
боку



1807 B

108M6 B.26(RA4.A5).(2)32L.33R.50

UNIT DOSE MEDICATION ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 100 SERIES SERIE C€

ISO
640 x 480 mm

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

DIVIDERS (Optional)
РОЗДІЛЮВАЧІ (Додатково)



H10/4, H20/4

COMMON MATERIAL
PATIENTS DRAWER

ЗАГАЛЬНА
ШУХЛЯДА ДЛЯ
ПАЦІЄНТІВ ІЗ
МАТЕРІАЛАМИ
3 GLOVE BOX

3 КОРОБКИ
З РУКАВИЧКАМИ

SERUM,
PARACETAMOL DRAWER

ШУХЛЯДА ДЛЯ
СИРОВАТКИ,
ПАРАЦЕТАМОЛУ

DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

KEY LOCKING

БЛОКУВАННЯ НА КЛЮЧ

REMOVABLE CASSETTE

ЗНИМНІ КАСЕТИ

WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ



1809 W
112M6 W.32R.46.50

UNIT DOSE MEDICATION ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 100 SERIES СЕРІЯ **CE**

ISO
640 x 480 mm мм

HOSPITALIZATION UNITS

ВІДДІЛЕННЯ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ

UNIT DOSE MEDICATION TROLLEY PREPARED FOR DIGITALIZATION

ВІЗОК ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДГОТОВЛЕНИЙ ДО ЦИФРУВАННЯ

COMPUTER

КОМП'ЮТЕР

VESA SUPPORT
3 POSITIONS,
ADJUSTABLE

ПІДТРИМКА
VESA 3 ПОЗИЦІЇ,
РЕГУЛЮЄТЬСЯ

KEYBOARD DRAWER

ШУХЛЯДА ДЛЯ
КЛАВІАТУРИ

COMMON
MATERIAL
PATIENTS
DRAWER

ЗАГАЛЬНА
ШУХЛЯДА
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ
З ПРЕПАРАТАМИ

SERUM,
PARACETAMOL DRAWER

ШУХЛЯДА ДЛЯ
СИРОВАТКИ,
ПАРАЦЕТАМОЛУ

SERUM PREPARATION

ПРИГОТУВАННЯ ІНФУЗІЙ



DISPOSABLE
CONTAINER

ОДНОРАЗОВИЙ
КОНТЕЙНЕР

KEY LOCKING

БЛОКУВАННЯ НА КЛЮЧ

REMOVABLE CASSETTE

ЗНІМНІ КАСЕТИ

WASTE BIN

ВІДРО ДЛЯ ВІДХОДІВ



1891 B

110M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50.58

UNIT DOSE MEDICATION ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
100 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм



1808 W
 108M6 W.32R.46.50

Treatment - Medication
 Процедурні - Для
 лікарських засобів



1817 W
 108M6 W.26(RA4.A5).27EV.
 (2)32L.33R.50

Treatment - Medication
 Процедурні - Для лікарських
 засобів



1813 Y
 112M6 Y.27.32R.46.50



1818 Y
 112M6 Y.(2)32L.33R.50



1894 B
 114M6 B.32R.46.50



1890 W
 106M6TX W.26M(R75M).(2)32L.32R.50



1892 B
 113M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50



1893 B
 117M6TX B.26M(R75M).(2)32L.32R.50

TRANSPORT TROLLEYS ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ

500 SERIES СЕРІЯ



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

Structure of AISI-304 stainless steel

Assembly with TIG welding

Load capacity 120 kg

Ø 125 mm simple wheels

2 antistatic, 2 with brake

Конструкція з нержавіючої сталі AISI-304

Монтаж за допомогою зварювання TIG

Вантажопідйомність 120 кг

Прості колеса Ø 125 мм

2 антистатичні, 2 з гальмом



SQ505



SQ510

480 x 480 mm мм



505



510

900 x 570 mm мм



520



530



540

INSTRUMENT TRANSPORT TROLLEYS

ВІЗКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

500 SERIES СЕРІЯ

For 600 x 300 mm containers
Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Load capacity 150 kg
Key locking
Non-airtight phenolic doors

Для контейнерів 600 x 300 мм
Моноблочна конструкція з нержавіючої сталі AISI-304
Монтаж заклепками та зварюванням TIG
Вантажопідйомність 150 кг
Блокування на ключ
Негерметичні фенольні двері

900 x 630 mm мм

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)



68B



566 DN Trolley with 2 smooth central shelves

Візок з 2 гладкими центральними полицями

567 DN Trolley with 2 perforated central shelves for ventilation

Візок з 2 перфорованими центральними полицями для вентиляції



567 DN

2 DUAL LOCK WHEELS
Ø 125 mm
2 ПОДВІЙНІ КОЛЕСА З
БЛОКУВАННЯМ
Ø 125 мм



Fixed wheel
Фіксоване колесо



Swivel wheel
Колесо повертається



Locked wheel
Заблоковане колесо



TRANSPORT TROLLEYS ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ

600 SERIES СЕРІЯ

ISO
640 x 480 mm мм

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Doors with key locking
600 x 400 mm ISO drawers
Maximum capacity 10 ISO drawers 100 mm height

Моноблочна конструкція з нержавіючої сталі AISI-304
Монтаж заклепками та зварюванням TIG
Двері з замком на ключ
Корзини ISO 600 x 400 мм
Максимальна місткість 10 корзин ISO висотою 100 мм

DN Light grey doors Світло-сірі двері
TT Transparent doors Прозорі двері



606 DN.(6)72.(2)73

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)



68

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
ПОЛИЦЯ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ (Додатково)



60 - 600 x 440 mm мм

RETENTION STOP (Optional)
УТРИМУЮЧИЙ СТОПЕР (Додатково)
1 set per drawer 1 комплект на шухляду



TR

2 DUAL LOCK WHEELS Ø 125 mm
2 ПОДВІЙНИХ КОЛЕСА З
БЛОКУВАННЯМ Ø 125 мм



-  Fixed wheel
Фіксоване колесо
-  Swivel wheel
Колесо повертається
-  Locked wheel
Колесо заблоковано

TRANSPORT TROLLEYS ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ
600 SERIES СЕРІЯ

ISO
640 x 480 mm мм



606 OP.(8)72.73



606 DN.(3)60



606 DN.(2)60.(4)72.73



606 DN.(8)72.73



631 DN.(2)60



632 DN.(2)60



651 DN



652 DN



657 DN

TRANSPORT TROLLEYS ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ

600 SERIES СЕРІЯ

ISO
900 x 630 mm мм

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
Assembly with rivets and TIG welding
Load capacity 160 kg
Doors with key locking
400 x 600 mm ISO drawers
Maximum capacity 10 + 10 = 20 ISO drawers 100 mm height

Моноблочна конструкція з нержавіючої сталі AISI-304
Монтаж заклепками та зварюванням TIG
Вантажопідйомність 160 кг
Двері з замком на ключ
Корзини ISO 400 x 600 мм
Максимальна місткість 10 + 10 = 20 корзин ISO висотою 100 мм

DN Light grey doors Світло-сірі двері

TT Transparent doors Прозорі двері

UPPER SUPPLEMENT (Optional)
ВЕРХНІЙ ДОДАТОК (Додатково)



68B

ADJUSTABLE SHELF (Optional)
ПОЛИЦЯ, ЩО РЕГУЛЮЄТЬСЯ (Додатково)



62 - 400 x 600 mm мм

RETENTION STOP (Optional) УТРИМУЮЧИЙ
СТОПЕР (Додатково)

1 set per drawer 1 комплект на шухляду




TR

2 DUAL LOCK WHEELS Ø 150 mm
2 ПОДВІЙНІ КОЛЕСА З БЛОКУВАННЯМ Ø 150 мм
4 antistatic 4 антистатичні



-  Fixed wheel
Фіксоване колесо
-  Swivel wheel
Колесо повертається
-  Locked wheel
Колесо зафіксоване

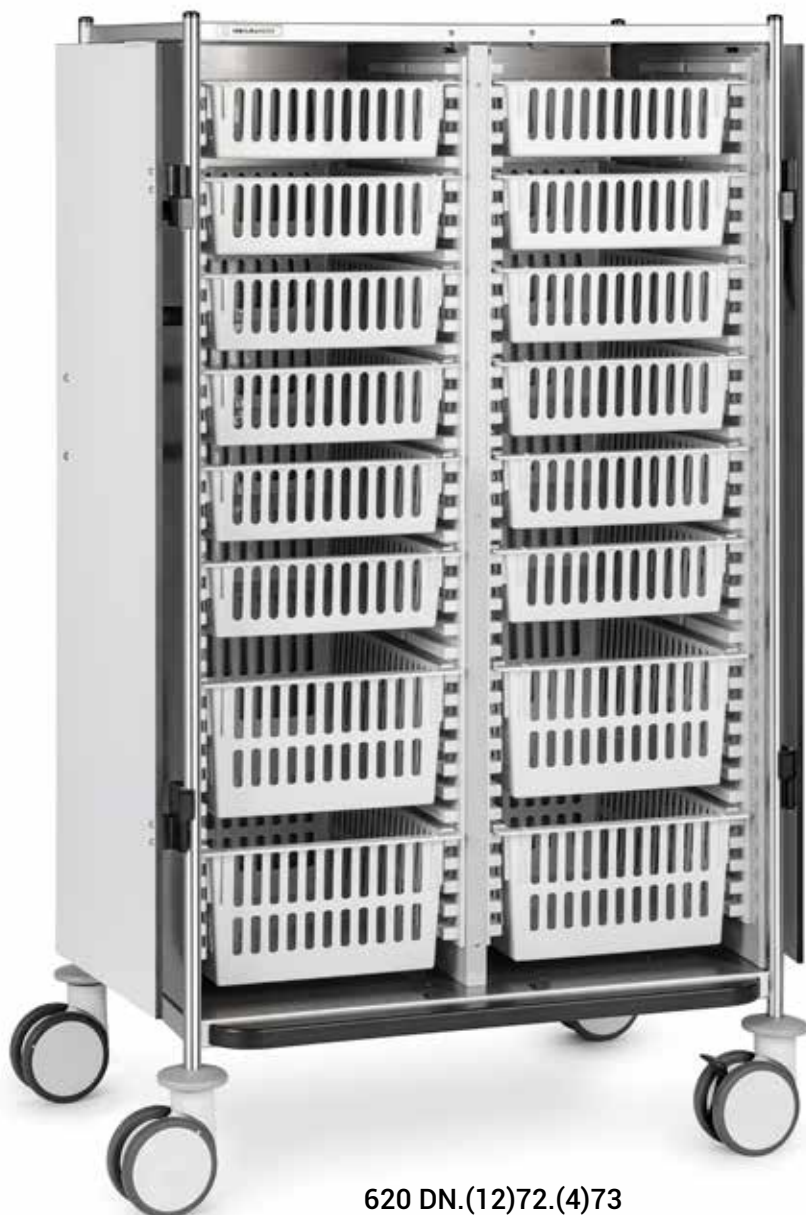

620 DN.(12)72.(4)73

TRANSPORT TROLLEYS ТРАНСПОРТНІ ВІЗКИ

600 SERIES СЕРІЯ

Monobloc structure of AISI-304 stainless steel
 Assembly with rivets and TIG welding
 Handles, both sides
 600 x 400 mm ISO drawers
 Ø 125 mm simple wheels

Моноблочна конструкція з нержавіючої сталі AISI-304
 Монтаж заклепками та зварюванням TIG
 Ручки, з обох боків
 Корзини ISO 600 x 400 мм
 Прості колеса Ø 125 мм

ISO 640 x 480 mm мм

Load capacity 100 kg
 Maximum 10 ISO drawers 100 mm height

Вантажопідйомність 100 кг
 Максимум 10 корзин ISO висотою 100 мм



610TRT.(8)72.73

2 DUAL LOCK WHEELS (Optional)
 2 ПОДВІЙНІ КОЛЕСА З БЛОКУВАННЯМ (Додатково)



-  Fixed wheel
Фіксоване колесо
-  Swivel wheel
Поворотне колесо
-  Locked wheel
Заблоковане колесо

WDD12 - Ø 125 mm - Mod. 610TRT

WDD15 - Ø 150 mm - Mod. 620TRT

ISO 880 x 680 mm

Load capacity 160 kg
 Maximum 20 ISO drawers 100 mm height

Вантажопідйомність 160 кг
 Максимум 20 корзин ISO висотою 100 мм



620TRT.(16)72.(2)73

SQUARE TROLLEYS КВАДРАТНІ ВІЗКИ

SQS SERIES СЕРІЯ СЕ

~~ISO~~

480 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



SQ010



SQ005



SQ040



SQ021

SQ021TXQ

Keyboard drawer, cable lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



SQ022



SQ032



SQ033



SQ061

SQ061TXQ

Keyboard drawer, cable lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



SQ065

OPEN TROLLEYS ВІДКРИТІ ВІЗКИ

CE

ISO
640 x 480 mm mm



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- The work surface design allows you to move the trolley without needing the push handle
- Ø 100 mm wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Конструкція робочої поверхні дозволяє переміщати візок без ручки
- Колеса Ø 100 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом



322AB



364AB



365AB



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

- Elevated push handle left side
- Bumpers for hits
- Ø 125 mm simple wheels, 2 antistatic, 2 with brake
- Піднята ручка для штовхання зліва
- Бампери для захисту від ударів
- Прості колеса Ø 125 мм, 2 антистатичні, 2 з гальмом



164AB



165AB



166AB

SIMPLE TROLLEYS ПРОСТІ ВІЗКИ
300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



310



305
305MRI



321
321MRI
321TX
Keyboard drawer, cable
lead through
Шухляда для клавіатури, кабельний
канал



322
322MRI



332
332TX
Keyboard drawer, cable
lead through
Шухляда для клавіатури,
кабельний канал



333



334



341



346

SIMPLE TROLLEYS ПРОСТІ ВІЗКИ

300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

M6 Structure for 6 100 mm ISO drawers

M6 Конструкція для 6 шухляд ISO 100 мм



364
364MRI



365
365MRI



366
366MRI



361M6



362M6
362M6TX
Keyboard drawer, cable
lead through
Шухляда для клавіатури,
кабельний канал



364M6



365M6



366M6



367M6

DOUBLE TROLLEYS ПОДВІЙНІ ВІЗКИ

300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
900 x 630 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



396LW
900 x 570 mm
Instrument table
Інструментальний стіл



398LW
1130 x 570 mm
Instrument table
Інструментальний стіл



N310



N305



N321



N322



N364



N365



N366

DOUBLE TROLLEYS ПОДВІЙНІ ВІЗКИ

300 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
900 x 630 mm мм



STATIC TROLLEYS
МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

M12 Structure for 12 100 mm ISO drawers

M12 Конструкція для 12 шухляд ISO 100 мм



N361M12



N362M12



N364M12



N365M12



N366M12



N367M12

LOW TROLLEYS, REDUCED HEIGHT НИЗЬКІ ВІЗКИ, ЗМЕНШЕНОЇ ВИСОТИ

LOW SQUARE TROLLEYS НИЗЬКІ КВАДРАТНІ ВІЗКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

~~ISO~~
480 x 480 mm мм



SQ022LW



SQ061M4LW



SQ064M4LW


LOW SIMPLE TROLLEYS НИЗЬКІ ПРОСТІ ВІЗКИ



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ

ISO
640 x 480 mm мм

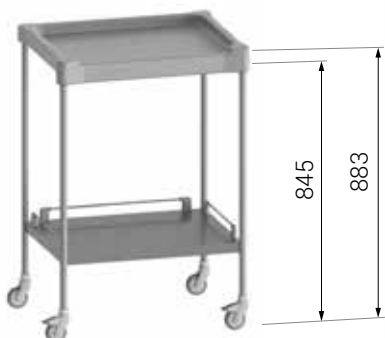

310LW

Ø 75 mm simple wheels

прості візки Ø 75 мм



361M5LW



362M5LW



364M5LW




365M5LW



366M5LW

To store it under 900 mm work tables
For users working in sitting position

Для зберігання під робочими столами 900 мм.
Для користувачів, які працюють сидячи

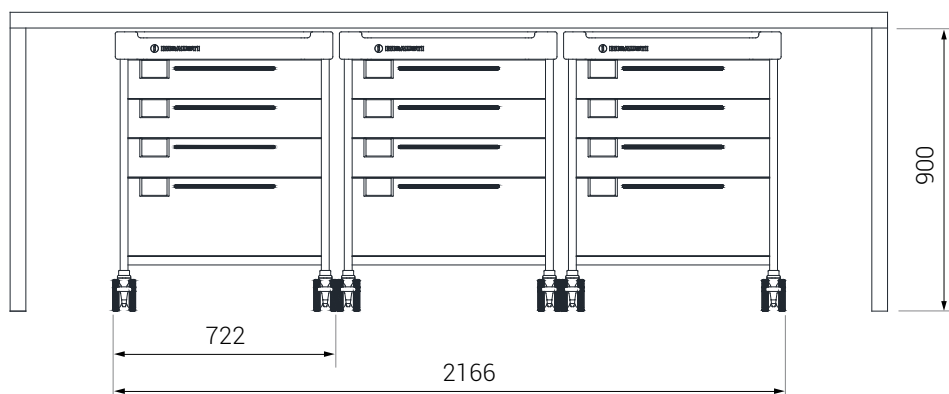

ISO

LOW DOUBLE TROLLEYS НИЗЬКІ ПОДВІЙНІ ВІЗКИ

900 x 630 mm мм



STATIC TROLLEYS

МАЛОМОБІЛЬНІ ВІЗКИ



N361M10LW



N362M10LW



N364M10LW



N365M10LW



N366M10LW

SQUARE TROLLEYS КВАДРАТНІ ВІЗКИ

SQM SERIES СЕРІЯ СЄ

~~ISO~~

480 x 480 mm мм



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

SIMPLE WHEELS ПРОСТІ ВІЗКИ Ø 125 mm



SQ121

SQ121TXQ

Keyboard drawer, cable
lead through

Шухляда для клавіатури,
кабельний канал



SQ122



SQ132



SQ133



SQ161

SQ161TXQ

Keyboard drawer, cable
lead through

Шухляда для клавіатури, кабельний канал



SQ165

SIMPLE TROLLEYS ПРОСТІ ВІЗКИ

100 SERIES СЕРІЯ СЕ

ISO
640 x 480 mm мм



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
МОБІЛЬНІ ВІЗКИ

M6 Structure for 6 100 mm ISO drawers

M6 Конструкція для 6 шухляд ISO 100 мм



122 W.AXWD12.WS12
Ø 125 mm simple wheels
Прості колеса Ø 125 мм



133 W.AXWD12.WS12
Ø 125 mm simple wheels
Прості колеса Ø 125 мм



164



165



166



162M6
162M6TX
Keyboard drawer, cable
lead through
Шухляда для клавіатури,
кабельний канал



164M6



165M6



166M6

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ







SQUARE TROLLEY DIVIDERS КВАДРАТНІ РОЗДІЛЮВАЧІ ВІЗКІВ

PC, polycarbonate PC, полікарбонат

DMQ - Height Висота 57 мм



DSQ - Height Висота 130 мм

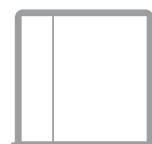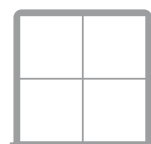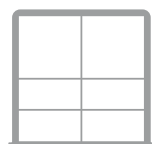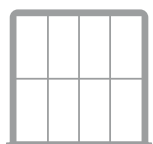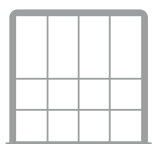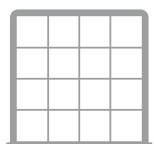

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

ISO DRAWER DIVIDER SET НАБІР РОЗДІЛЮВАЧІВ ШУХЛЯД ISO

Dividers for 600 x 400 mm ISO drawers

PC, polycarbonate

Розділювачі для шухляд ISO 600 x 400 мм PC,

полікарбонат

Drawer Шухляда 50 мм

DL5, DS5

Drawer Шухляда 100 мм


DL10, DS10

Drawer Шухляда 200 мм

DL20, DS20

DS5 400 mm

DL5 600 mm

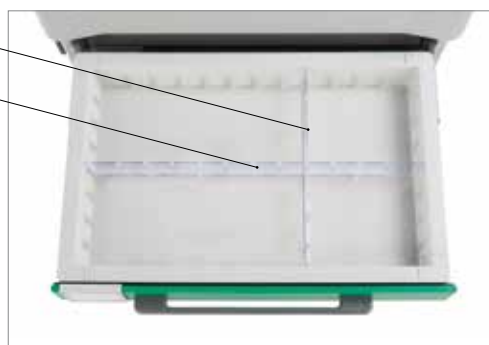

CLIP FOR DIVIDERS

ЗАЖИМ ДЛЯ РОЗДІЛЬНИКІВ




DT




H5/16


ISO drawer Шухляда ISO 50 мм

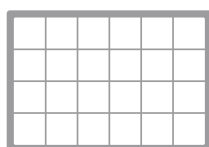


H5/24

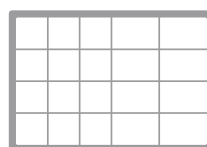


H5/20

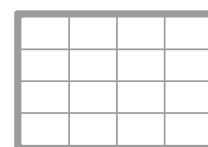


H5/16

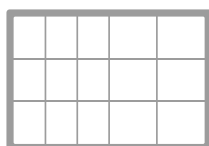


H5/15

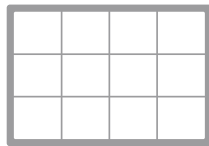


H5/12, H10/12

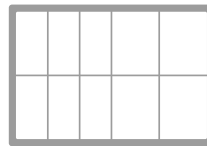


H5/10, H10/10

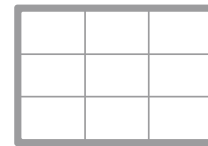


H5/9, H10/9, H20/9

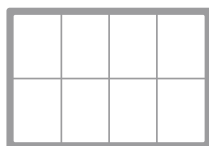


H5/8, H10/8, H20/8

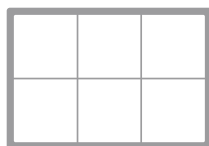

H5/6, H10/6, H20/6

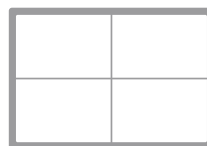

H10/4, H20/4

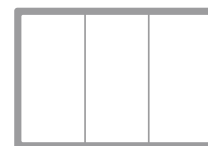

H10/3, H20/3

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

KEY LOCKING БЛОКУВАННЯ НА КЛЮЧ



10 Square, simple trolley, total locking
Квадратний, простий візок, повне замикання

10N2 Double trolley, total locking
Left side, right side
Подвійний візок, повне замикання
Ліва сторона, права сторона



10D Square trolley, 2 57 mm drawers locking Simple trolley, 2 50/100 mm ISO drawers locking
Квадратний візок, 2 шухляди 57 мм, які замикаються
Простий візок, 2 шухляди ISO 50/100 мм із замком

10DN2 Double trolley, 4 ISO drawers locking
50/100 mm left side, 50/100 mm right side
Подвійний візок, 4 шухляди ISO з замком
50/100 мм ліва сторона, 50/100 мм права сторона



10M2 Square trolley, 2 130 mm drawers locking Simple trolley, 2 100 mm ISO drawers locking
Квадратний візок, 2 шухляди 130 мм, які замикаються
Простий візок, 2 ящики ISO 100 мм із замком

10JK Set of 4 keys
Набір з 4 ключів

All the locks include 4 keys Всі замки містять 4 ключа

CODE LOCKING КОДОВЕ БЛОКУВАННЯ



10COD
Square, simple trolley, total locking
Квадратний, простий візок, повне замикання

10CODN2
Double trolley, total locking Left side, right side
Подвійний візок, повне замикання
Ліва сторона, права сторона

10CK
Security key for code locking
Ключ безпеки для кодового замка

The lock includes 1 key До замку входить 1 ключ

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

SEAL LOCKING БЛОКУВАННЯ НА ПЛОМБИ



12 Square, simple trolley, total locking
Квадратний, простий візок, повне замикання

12N2 Double trolley, total locking
Left side, right side
Подвійний візок, повне замикання
Ліва сторона, права сторона



12D Square trolley, 2 57 mm drawers locking
Simple trolley, 2 50/100 mm ISO drawers locking
Квадратний візок, 2 шухляди 57 мм, які замикаються
Простий візок, 2 шухляди ISO 50/100 мм із замком

12DN2 Double trolley, 4 ISO drawers locking
50/100 mm left side, 50/100 mm right side
Подвійний візок, 4 шухляди ISO з замком
50/100 мм ліва сторона, 50/100 мм права сторона

INDIVIDUAL SEAL LOCKING ІНДИВІДУАЛЬНЕ БЛОКУВАННЯ НА ПЛОМБИ



12B Square, simple trolley, maximum 11 seals
Квадратний, простий візок, максимум 11 пломб

12BN2 Double trolley, maximum 22 seals 11
left side, 11 right side
Подвійний візок, максимум 22 пломби
11 ліва сторона, 11 права сторона

NUMBERED DISPOSABLE SEALS ОДНОРАЗОВІ ПЛОМБИ З НОМЕРОМ



14 Number for the control of hospital emergencies
100 units

Номер для контролю лікарняних екстрених
ситуацій
100 одиниць

RIGHT SIDE ACCESSORIES АКСЕСУАРИ ПРАВОЇ СТОРОНИ

FOLD DOWN TRAY СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

Polyethylene Поліетилен

Protection on all 4 sides Захист з усіх 4 сторін

Trolley Візок 480 x 480 мм
640 x 480 мм



30

SUCTION UNIT SUPPORT

ОПОРА ДЛЯ АСПІРАТОРА

Useful dimensions Габаритні розміри 250 x 420 мм

Max. 12 кг

Epoxy painted steel Сталь з епоксидним покриттям



39

13 LITRES BIN

ВІДРО 13 ЛІТРІВ ДЛЯ СМІТТЯ



50

TWO 13 LITRES BINS

ДВА ВІДРА ПО 13 ЛІТРІВ



50B

26 LITRES BIN

ВІДРО 26 ЛІТРІВ ДЛЯ СМІТТЯ



51

25 LITRES PEDAL BIN

ВІДРО 25 ЛІТРІВ З ПЕДАЛЬЮ



57

LEFT SIDE ACCESSORIES АКСЕСУАРИ ЛІВОЇ СТОРОНИ

3 GLOVE BOX HOLDER

ТРИМАЧ ДЛЯ КОРОБОК З РУКАВИЧКАМИ

Depth Глибина 87 мм

Adjustable width Ширина регулюється 200 - 260 мм



46

460P Open trolley Відкритий візок

GAS BOTTLE STAND

ТРИМАЧ ГАЗОВОГО БАЛОНУ

Ø 110 мм / Ø 140 мм. Max. 18 кг

Supported with ref. 44L, 46, 59L

Підтримується за артикулами. 44L, 46, 59L



36

LEFT - RIGHT SIDE ACCESSORIES

АКСЕСУАРИ ЛІВО-ПРАВОЇ СТОРОНИ

CATHETER CONTAINER

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАТЕТЕРА

Height Висота 420 мм

Not supported with Не підтримується з арт. 30, 46



44L Left Ліворуч

44R Right Праворуч

D44 Divider Роздільник

A4 DOCUMENT HOLDER

ТРИМАЧ ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ А4

Height Висота 240 мм

Dimensions Розміри 235 x 55 мм



59L Left Ліворуч

59R Right Праворуч

LEFT - RIGHT SIDE ACCESSORIES

АКСЕСУАРИ ЛІВО-ПРАВОЇ СТОРОНИ

DISPOSABLE CONTAINER SUPPORT

ПІДСТАВКА ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО
КОНТЕЙНЕРА

Max. 10 litres 10 літрів

Epoch painted steel Сталь з епоксидним покриттям

↑ Variable height, bridle attachment
↓ Змінна висота, вуздечка кріплення



33L Left Ліворуч

33R Right Праворуч

SIDE SUPPORT БІЧНА ПІДТРИМКА

Width Ширина 155 мм



Square, simple trolley Квадратний, простий візок

32L Left Ліворуч

32R Right Праворуч

Double trolley Подвійний візок

32NL Left Ліворуч

32NR Right Праворуч

FIXING RAIL РЕЙКА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ

25 x 10 мм Max. 20 кг

Stainless steel Нержавіюча сталь



Square, simple trolley Квадратний, простий візок

37L Left Ліворуч

37R Right Праворуч

Double trolley Подвійний візок

37NL Left Ліворуч

37NR Right Праворуч

BACK SIDE ACCESSORIES АКСЕСУАРИ ЗАДНЬОЇ СТОРОНИ

BACK FIXING RAIL

ЗАДНЯ ФІКСУЮЧА РЕЙКА

25 x 10 mm Max. 20 kg
Stainless steel Нержавіюча сталь



37QT Square квадратний

37T Simple простий

CPR BOARD

CPR Дошка

(СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВА РЕАНІМАЦІЯ)

Dimensions Розміри 660 x 440 mm



34

ELECTRICAL CONNECTION BASE

ОСНОВА ЕЛЕКТРИЧНОГО З'ЄДНАННЯ

3 metres cable Кабель 3 метри
Integrated cable support Вбудований
електричний подовжувач



38EU SCHUKO, type F Тип F

38US USA, type B Тип B

38UK UK, type G Тип G

38CH Switzerland, type J

Швейцарський, тип J

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

GLASS DISPENSER

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОДНОРАЗОВИХ СКЛЯНОК

For glasses of Для склянок 150, 200, 220 мл
Max. 70 glasses 70 склянок



47L Left Ліворуч

47R Right Праворуч

47 Left side assembly in elevated accesory
Збірка лівої сторони в підвищеному аксесуарі

HANGER SUPPORT

ГАЧОК

Max. 6 kg



58

SERUM HOLDER ІНФУЗІЙНА СТІЙКА



Stainless steel Нержавіюча сталь
Max. 4 kg
Adjustable height Висота
регулюється



40

ELEVATED HANGER SUPPORT ФІКСОВАНА ІНФУЗІЙНА СТІЙКА



Stainless steel Нержавіюча сталь
Max. 4 kg
For serum preparation Для приготування розчинів



41

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

GEL DISPENSER

ДОЗАТОР ГЕЛЮ

500 ml rechargeable jar

Банка ємністю 500 мл



48L Left Ліворуч

48R Right Праворуч

DRIP TRAY

ПІДДОН ДЛЯ КРАПЕЛЬ

Manually removable

Знімається вручну



GT



48Q Square trolley Квадратний візок
Assembly збірка RA5Q, RA4Q



48 Right side assembly in elevated accessory
Монтаж з правої сторони у піднятому аксесуарі

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

ROTATING ARM FOR DEFIBRILLATOR ПОВОРОТНА ПІДСТАВКА ДЛЯ ДЕФІБРИЛЯТОРА

Right side assembly

Two rotation axles

Fixing strap

Збірка правого боку

Дві осі обертання

Фіксуєчий ремінь

Useful dimensions Розміри 350 x 350 мм Max. 10 кг



28



28EV Assembly in elevated accessory
Монтаж у піднятому аксесуарі

LAPTOP BASE ПІДСТАВКА ДЛЯ НОУТБУКА

Left side assembly

Rotating and tilting base

Padlock with security cable

Збірка лівого боку

Основа, що обертається і нахиляється

Навісний замок з тросом безпеки

Width Ширина 398 - 308 мм Depth Глибина 270 мм



27



27EV Assembly in elevated accessory
Монтаж у піднятому аксесуарі

ACCESSORIES АКСЕСУАРИ

TABLET SUPPORT ПІДТРИМКА ПЛАНШЕТІВ

Variable height Змінна висота

Width Ширина 195 - 300 мм

Tablets from 7" to 11" Планшети від 7" до 11"

Anti-theft system with key Система захисту від крадіжок з ключем

Система захисту від крадіжок з ключем



63L Left Ліворуч

63R Right Праворуч

63 Assembly in elevated accessory Збірка в підвищеному аксесуарі

MONITOR SUPPORT ПІДТРИМКА ДЛЯ МОНІТОРІВ

3 Positions, height adjustable

Tilt and rotation adjustable

Epoxy painted steel

3 положення, регулюється по висоті

Нахил і поворот регулюються

Сталь з епоксидним покриттям

VESA 75 / 100 мм



26M(R75QM) Square Квадратний

26M(R75M) Simple Простий

ELEVATED ACCESSORIES ПІДНЯТИ АКЕСУАРИ

ELEVATED TUBE SET

НАБІР ПІДНЯТИХ ТРУБ



26LW



26



26HE



RA3FQ.A5F Square Квадратний
RA3F.A5F Simple

FIFO

BINS DISPENSER

ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ



RA5Q Square Квадратний
RA5 Simple
RA5N Double Подвійний



RA4Q Square Квадратний
RA4 Simple
RA4N Double Подвійний

CENTRAL SUPPORT

ЦЕНТРАЛЬНА ПІДТРИМКА

Epoxypainted steel

Сталь з епоксидним покриттям

Depth Глибина 150 mm

Max. 22 kg



R1Q Square Квадратний
R1 Simple
R1N Double Подвійний

CENTRAL SHELF

ЦЕНТРАЛЬНА ПОЛИЧКА

Epoxypainted steel

Сталь з епоксидним покриттям

Depth Глибина 230 mm

Max. 22 kg



R2Q Square Квадратний
R2 Simple
R2N Double Подвійний

CENTRAL RAIL

ЦЕНТРАЛЬНА РЕЙКА

Stainless steel Нержавіюча сталь

25 x 10

mm Max. 15 kg



R7Q Square Квадратний
R7 Simple
R7N Double Подвійний

ELEVATED ACCESSORIES ПІДНЯТИ АКСЕСУАРИ

480 x 480 mm
640 x 480 mm
900 x 630 mm

↑ Variable height, bridles attachment
 ↓ Змінна висота, вуздечка кріплення



26LW(R1Q) Square Квадратний
26LW(R1) Simple
26LW(R1N) Double Подвійний



26LW(R2Q) Square Квадратний
26LW(R2) Simple
26LW(R2N) Double Подвійний



26LW(R7Q) Square Квадратний
26LW(R7) Simple
26LW(R7N) Double Подвійний



26(R7Q) Square Квадратний
26(R7) Simple
26(R7N) Double Подвійний



26(R1Q.R1Q) Square Квадратний
26(R1.R1) Simple
26(R1N.R1N) Double Подвійний



26(R2Q.R2Q) Square Квадратний
26(R2.R2) Simple
26(R2N.R2N) Double Подвійний



26(R7Q.R7Q) Square Квадратний
26(R7.R7) Simple
26(R7N.R7N) Double Подвійний



26(R2Q.R1Q) Square Квадратний
26(R2.R1) Simple
26(R2N.R1N) Double Подвійний




26(R2Q.R7Q) Square Квадратний
26(R2.R7) Simple
26(R2N.R7N) Double Подвійний


ELEVATED ACCESSORIES ПІДНЯТИ АКСЕСУАРИ

480 x 480 mm
640 x 480 mm


↑ Variable height, bridles attachment
↓ Змінна висота, кріплення вуздечок

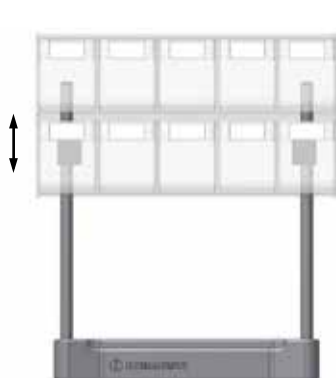


26(RA5Q.A5) Square Квадратний
26(RA4Q.A5) Square Квадратний

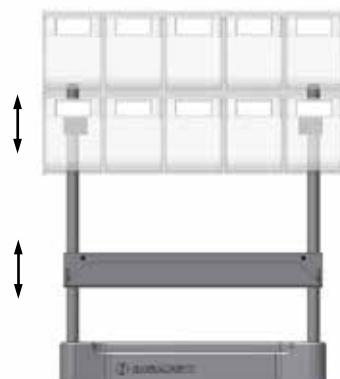

26(RA5Q.A5.R1Q) Square Квадратний
26(RA4Q.A5.R1Q) Square Квадратний

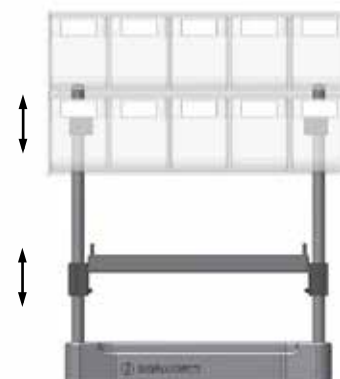


26(RA5Q.A5.R2Q) Square Квадратний
26(RA4Q.A5.R2Q) Square Квадратний

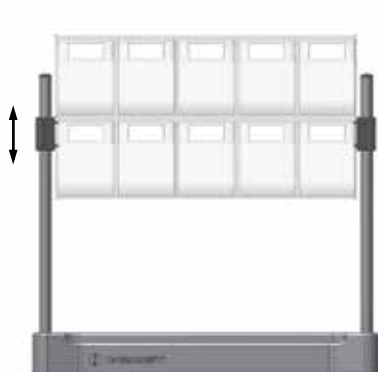

26(RA5.A5) Simple




26(RA4.A5) Simple

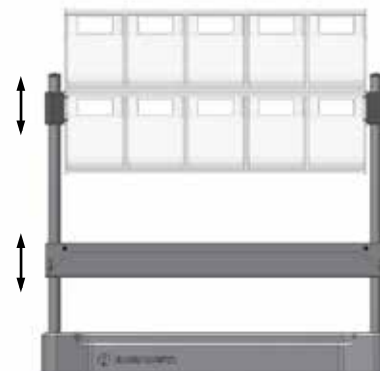


26(RA5.A5.R1) Simple



26(RA4.A5.R1) Simple

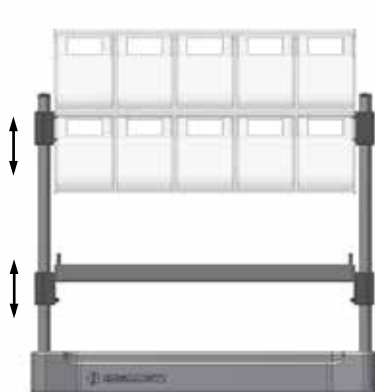

26(RA5.A5.R2) Simple

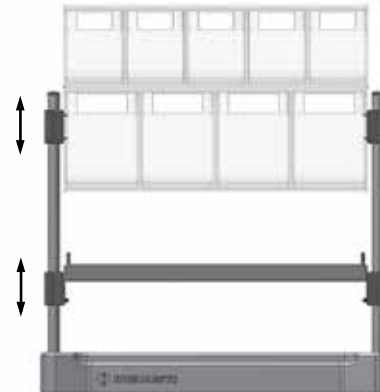


26(RA4.A5.R2) Simple


ELEVATED ACCESSORIES ПІДНЯТИ АКСЕСУАРИ

900 x 630 mm


↑ Variable height, bridles attachment
 ↓ Змінна висота, кріплення вуздечок

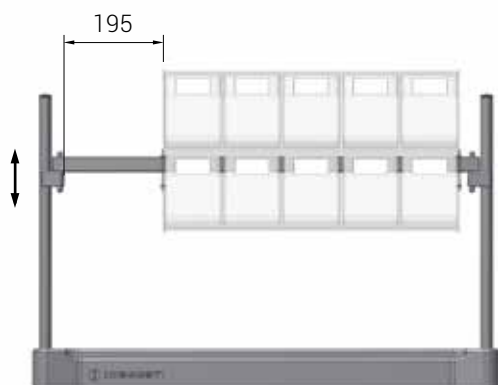


26(RA5N.A5) Double Подвійний

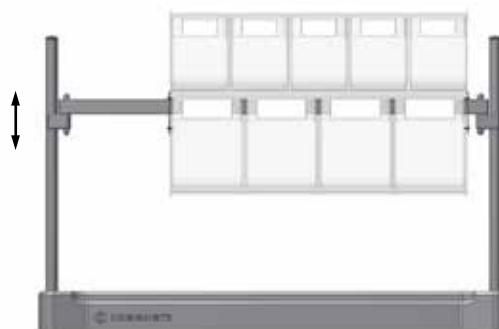


26(RA4N.A5) Double Подвійний

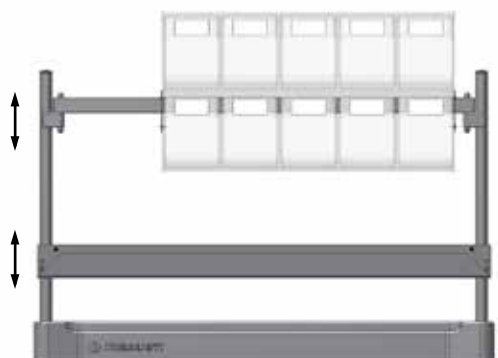


26(RA5N.A5.R1N) Double Подвійний

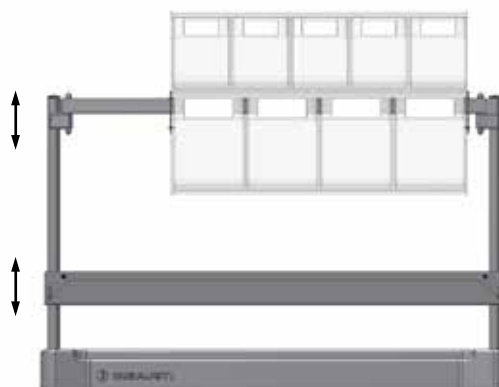

26(RA4N.A5.R1N) Double Подвійний

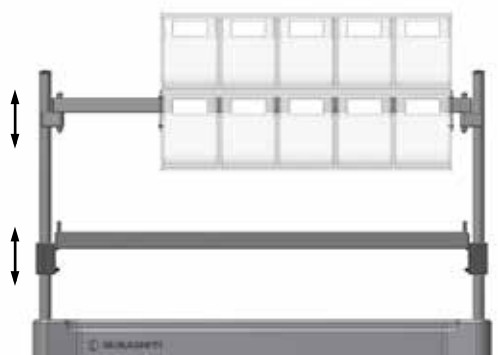

26(RA5N.A5.R2N) Double Подвійний

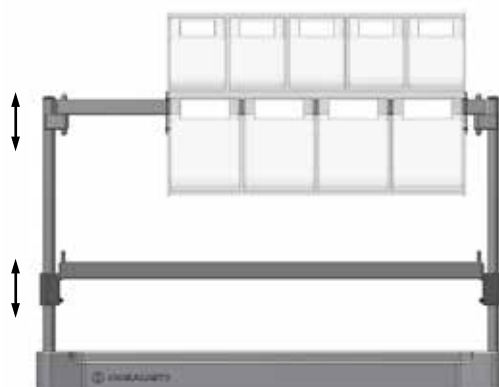

26(RA4N.A5.R2N) Double Подвійний

ISO FURNITURE ACCESSORIES ISO МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА

600 x 400 mm ISO DRAWERS КОРЗИНИ ISO 600 x 400 мм

ISO DRAWER LID КРИШКА ДЛЯ КОРЗИНИ ISO



LD 2 holes for seals
2 отвори під ущільнювачі

50 mm ABS ISO DRAWER

50 мм ABS ISO КОРЗИНА

8 Litres літрів



71
71LD 2 holes for seals
2 отвори під ущільнювачі

100 mm ABS ISO DRAWER

100 мм ABS ISO КОРЗИНА

19 Litres літрів



72

100 mm ABS ISO CLOSED DRAWER

100 мм ABS ISO ЗАКРИТА КОРЗИНА

19 Litres літрів



72C

200 mm ABS ISO DRAWER

200 мм ABS ISO КОРЗИНА

33 Litres літрів



73

200 mm ABS ISO CLOSED DRAWER

200 мм ABS ISO ЗАКРИТА КОРЗИНА

33 Litres літрів



73C

ISO FURNITURE ACCESSORIES ISO МЕБЛЕВА ФУРНИТУРА

600 x 400 mm ISO DRAWERS КОРЗИНИ ISO 600 x 400 мм

CARD HOLDER FOR OPEN DRAWER

КОРЗИНИ ISO 600 x 400 мм



HCOP

NARCOTICS SECURITY BOX

ЯЩИК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ НАРКОТИКІВ

Height Висота 80 мм

Dimensions Розміри 150 x 120 мм

Key locking Блокування на ключ



CSM Separated Розділені

CSM1 Drawer іхед Шухляда фіксована

50 mm POLYCARBONATE ISO DRAWER

50 мм ПОЛІКАРБОНАТНА КОРЗИНА ISO

8 Litres літрів



71PC

100 mm POLYCARBONATE ISO DRAWER

100 мм ПОЛІКАРБОНАТНА КОРЗИНА ISO

19 Litres літрів



72PC

200 mm POLYCARBONATE ISO DRAWER

200 мм ПОЛІКАРБОНАТНА КОРЗИНА ISO

33 Litres літрів



73PC

240 mm HIGH ABS ISO DRAWER

240 мм ВИСОКА АБС ISO КОРЗИНА



73BT Loose drawer unit Блок вільної корзини

AX73.73BT Mounted on trolley

Встановлюється на візок

ISO FURNITURE ACCESSORIES ISO МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА

RAIL FOR CATHETERS РЕЙКА

ДЛЯ КАТЕТЕРІВ

Stainless steel Нержавіюча сталь

Adjustable height Висота регулюється



R7CAT3 3 hooks 3 гачки Mod. 706

R7CAT4 4 hooks 4 гачки Mod. 720

ADJUSTABLE SHELF FOR CATHETERS

РЕГУЛЬОВАНА ПОЛИЧКА ДЛЯ КАТЕТЕРІВ



60CAT 25 hooks 25 гачків Mod. 706

62CAT 15 hooks 15 гачків Mod. 720

ADJUSTABLE SHELF

РЕГУЛЬОВАНА ПОЛИЦЯ

Phenolic Фенольний Max. 22 кг



60 600 x 440 mm - Mod. 706 / 606

62 400 x 600 mm - Mod. 720 / 620

ADJUSTABLE SHELF DIVIDER

РЕГУЛЬОВАНИЙ РОЗДІЛЬНИК ПОЛИЧКИ

Epoxi painted steel Сталь з епоксидним покриттям




DV

ENDOSCOPES ADJUSTABLE SHELF

РЕГУЛЬОВАНА ПОЛИЧКА ДЛЯ ЕНДОСКОПІВ

Phenolic Фенольний

10 endoscopes 10 ендоскопів

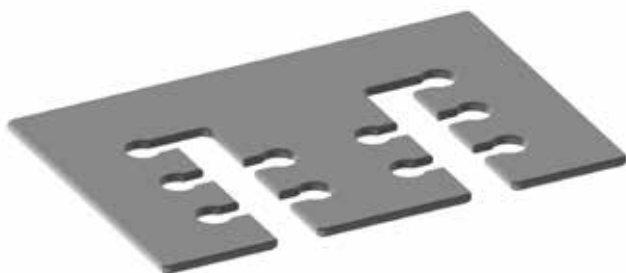

60ED

RETENTION STOP

УТРИМАННЯ СТОП

1 set per drawer 1 комплект на шухляду



TR

Faithful to our slogan "Design, Build, Innovate" Insausti has constructed a new forefront factory with the latest technology.

Inaugurated in October 2023 over a land plot of 7.700 m², the building with 4.600 m² houses a logistic plant, components assembly area and several production lines.

Дотримуючись нашого гасла «Дизайн, будівництво, інновації», компанія Insausti побудувала нову передову фабрику з використанням новітніх технологій.

Урочисто відкрито в жовтні 2023 року на земельній ділянці площею 7 700 м², будівля площею 4 600 м² містить логістичний завод, складальний майданчик компонентів і кілька виробничих ліній.





All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow regulation (EU) 2017/745
Sanitary licence 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Усі вироби зі знаком ЄС вважаються медичними виробами класу I та відповідають регламенту (ЄС)
2017/745 Санітарна ліцензія 7439-PS. SRN: ES-MF-000003261.

Guarantee period: 5 years

Гарантійний термін: 5 років

INSAUSTI reserves the right to make modifications

INSAUSTI залишає за собою право вносити зміни



User manual Інструкція користувача



Sustainability is a key part of our business.

The new photovoltaic installation generates the clean green energy needed to manufacture Insausti branded medical trolleys, a milestone in our commitment to sustainable activity.

Сталий розвиток є ключовою частиною нашого бізнесу.

Нова фотоелектрична установка генерує чисту зелену енергію, необхідну для виробництва медичних візків під брендом Insausti, що є важливою віхою в нашому прагненні до сталої діяльності.



30 YEAR SERVICE LIFE
AÑOS DE VIDA ÚTIL



Since Desde
1991



Designed and manufactured in Spain

Розроблено та виготовлено в Іспанії



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/A nave 3
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»
Уповноважений представник в
Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 360 03 00
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua



2025