

ЗБЕРІГАННЯ МЕДИКАМЕНТІВ - ПРОСТІ ВІЗКИ 100 СЕРІЯ 1835 Y - 20 ПАЦІЄНТІВ

РОЗМІРИ 640 x 480 мм

АДЕКВАТНА ВИСОТА, ЕРГОНОМІЧНІСТЬ 1005 мм (робоча поверхня - підлога).

РОБОЧА ПОВЕРХНЯ

- Поліетилен, ПЕ, Асептично, гігієнічно, легко чистити..
- Витримує спиртовмісні, м'які, дезінфікуючі засоби, хлоргексидин.
- Захист з усіх чотирьох сторін. Приємний на дотик, округлі форми.

МОНОБЛОЧНИЙ КАРКАС ВІЗКА

- Нержавіюча сталь AISI-304. Витончена обробка, асептично, гігієнічно.

ШУХЛЯДА ISO розмірів


- Повне висування.
- Сталеві підшипники з самозакриваючою системою.
- Стопер, захищає від сильних ударів при закритті.
- Максимальне навантаження шухляди 20 кг.
- Вставні корзини шухляд ISO 600 x 400 мм.
- Передня частина виготовлена з поліетилену, товщина 10 мм, 6 кольорів (Зел, Жов, Білий, Чорн, Фіол, Червон).
- Ергономічна ручка.
- Шухляди з білими картами, знімні. Норма ISO 7810.

ISO КОРЗИНИ ШУХЛЯДИ 400 x 600 мм

- Висота 50, 100, 200 мм. Знімні, ABS.
- Відповідають ISO 3394.

КАСЕТИ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТІВ, ВЗАЄМОЗАМІННІ, НА 5 ПАЦІЄНТІВ

- Ширина: 600 мм. ISO комбінування аптечних елементів в візках.
- Касети для повсякденного використання, виготовлені з поліпропілену та епоксидно-пофарбованої сталі, сірого кольору.
- Блокування касет. Ручка для транспортування. Епоксидна сталь пофарбована в сірий колір. Запобігає доступ до ліків для сторонніх осіб.
- Запобігає мимовільне відкриття бункерів при заміні касет з транспортного візка серії 600 на візок для госпіталізацій серії 100.
- Контейнери для ліків, по одному на кожного пацієнта. Сірий поліпропілен. Широкий контейнер, призначений для організаційних потреб аптек в лікарнях загального профілю.

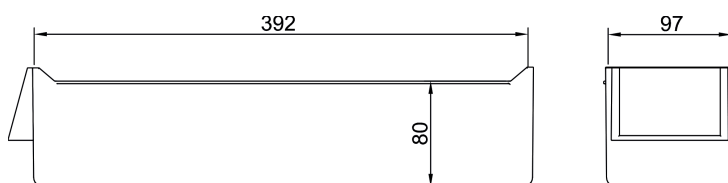

- Картка пацієнта, біла, знімна. ISO норма 7810. При блокуванні касети, верхня частина картки прихована, нижню частину видно.
- Додаткові роздільники, прозорий поліпропілен.

КЛЮЧІ БЛОКУВАННЯ

- Одноразовий або постійний замок.
- Повне блокування ящиків і касет для ліків
- Запобігання відкриванню корзин ISO, контейнерів для ліків і витяг касет

НАДЗВИЧАЙНО МОБІЛЬНІ ВІЗКИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Ручка для переміщення. Ергономічна висота 1045 мм.
- Подвійні колеса Ø 125мм. М'який протектор, тихі.
- 2 антистатичні колеса (електропровідні), 2 з гальмом в передній частині.



1835 Y - 20 ПАЦІЄНТІВ

116M6 Y.26D(RA5.A5).30.33L.46.50

АКСЕСУАРИ

26D(RA5.A5) ПРОЗОРІ ПЛАСТИКОВІ

КОНТЕЙНЕРИ-ЦЕНТРАЛЬНА ПІДСТАВКА

30 СКЛАДНА ПОЛИЧКА-ПІДСТАВКА

33L ТРИМАЧ КОНТЕЙНЕРА

46 ТРИМАЧ КОРОБОК З РУКАВИЧКАМИ

50 ПЛАСТИКОВЕ ВІДРО 13 Л

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ,
вул. Богомольця 7/14, оф. 182.
Тел./факс: +38 044 500 93 59
info@insausti.com.ua
www.insausti.com.ua
www.ren-med.com.ua