

Кресла медицинские Lojer

Надежные и легкие в эксплуатации

Гериатрическое кресло 6700 от компании Lojer – одно из наиболее универсальных из имеющихся на рынке. Основное внимание при конструировании кресла было обращено на комфортность пребывания пациента в сидячем положении и функциональность. Новые возможности выбора расцветки и задние поворотные колеса диаметром 150 мм в стандартной комплектации расширяют возможности для применения этого кресла.

В этом кресле использована ткань из микроволокна с полиуретаном на внутренней поверхности, что придает ей влагонепроницаемость. Чехол изготовлен из микроволокнистой ворсистой ткани и может быть промыт на месте применения. Возможна также обивка из кожзаменителя.

При проектировании кресла 6800 основное внимание было обращено на эргономику и конфигурацию подушек сиденья. Большие колеса в максимальной степени облегчают поворот кресла.

Бесступенчатые регулировки упрощают работу.

Кресло с помощью пневмопружин легко трансформируется в полностью лежащее положение и может быть поднято на требуемую высоту посредством гидропривода.

«Качественные,
функциональные
кресла»



Кресло медицинское гериатрическое 6700



Кресло медицинское 6800

LOJER® For easy care

■ Healthcare | Senior Care | Medical Wellness

Кресла медицинские	6700	6702	6800/ 6801
Общая ширина, см.	64	64	68
Вес, кг.	48	48	70/ 71
Диапазон регулировки высоты, см. (гидропривод)	-	-	51-77
Высота сиденья, см.	50/55	50/55	-
Ширина сиденья (между подлокотниками), см.	45 (48)	45 (48)	46
Глубина сиденья, см.	48	48	45
Наклон спинки, пневматически, бесступенчато	X	X	X
Наклон ножной секции, пневматически, бесступенчато	-	X	X
Фиксированная секция для ног	X	-	-
Подставка для ног регулируемая в трех позициях	X	-	-
Подставка для ног, регулируемая по длине бесступенчато	-	X	-
Складывающаяся подставка для ног	-	-	X
Откидывающиеся опоры для рук	X	X	X
Поворотные опоры для рук, регулируемые по высоте и углу расположения (для взятия крови)	-	-	X (для 6801)
Индивидуально-блокирующиеся ролики, мм. (передние/ задние)	125/150	125/150	150
Направляющее колесо	X	X	X
Подушка под голову	X	X	X
Отделение для размещения газет и журналов	X	X	-
Опоры для ног по Гопелю	-	-	•
Инфузионная стойка	-	-	•
Упоры для шеи и груди пациента	•	•	-
Мягкий фиксирующий ремень	•	•	-
Столик для еды	X	X	-
Кожзаменитель SKAI Fashion (13 цветов)	-	-	X
Кожзаменитель SKAI Clinic (3 цвета)	-	-	•
Покрывало - микрофибра	X	X	-
Регистрационное удостоверение МЗ России, Украины	X	X	X
Гарантия 2 года	X	X	X
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия

X = Стандарт - = Не доступно • = Опция


Кресло 6700 Бесступенчатый пневматический наклон кресла (ножная педаль), откидывающиеся подлокотники. Подставка для ног может быть поднята вверх, три положения на разной высоте. Свободно поворачивающиеся задние колеса, передние колеса в зафиксированном положении.

Кресло 6702 Бесступенчатый пневматический наклон кресла (ножная педаль), откидывающиеся подлокотники. Бесступенчатый наклон секции голени посредством пневмопружины, регулировка длины подставки для ног. Свободно поворачивающиеся колеса и направляющее колесо.

Кресло 6800 Медицинское кресло с гидравлической регулировкой высоты, с регулируемыми спинной и ножной секциями, индивидуально блокирующимися колесами и наличием направляющего колеса, откидной подставкой для ног и откидываемыми назад подлокотниками.

Кресло 6801 Медицинское кресло с гидравлической регулировкой высоты, отличающееся регулируемыми спинной и ножной секциями, индивидуально блокирующимися колесами и наличием направляющего колеса, складной подставкой для ног, подлокотниками для забора крови.


Аксессуары

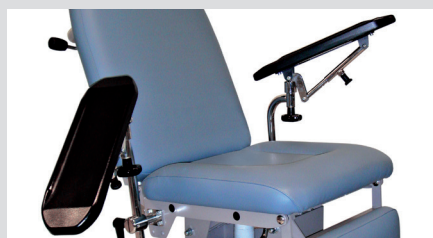

Опоры для рук для взятия крови



Подставка для ног регулируемая

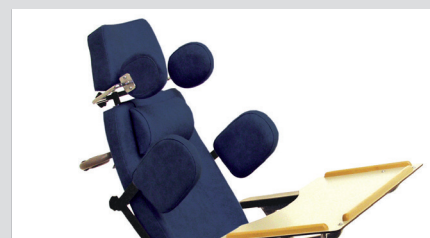

Боковые опоры для шеи и туловища, для моделей 6700 и 6702

LOJER®

© Lojer Group 2019. Всі права захищені.

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» уповноважений представник в Україні.

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182. Тел./факс: +38 044 360 03 00 info@ren-med.com.ua