

Vacuclave® 550

Наближається щось грандіозне: малий автоклав стає великим.



Чудово для навколишнього середовища.
Чудово для вас.

Більше простору. Більше переваг. Більше позитивних вражень

Для великих робіт.

З невеликими зусиллями.

MELAG показує, що означає знову і знову винаходити стерилізацію: завдяки надзвичайно великій камері та інноваціям ви будете готові до будь-яких завдань із Vacuclave® 550. Відкрийте для себе переваги нашого нового 50-літрового автоклава для енергоефективної, економної (часу та коштів) стерилізації ваших інструментів:

Опції? Не обмежені

Ваші інструменти заслуговують на велич: новий дизайн камери XL, рекордна тривалість циклу та висока завантажувальна здатність пропонують максимальну універсальність - і ще більше місця для інструментів до 25 кг і 16 лотків



З любов'ю до ваших інструментів. І довкілля.

Постійний інноваційний розвиток: завдяки запатентованій системі відновлення тепла, сушці DRYtelligence® та технології Coolify, що заощаджує воду, Vacuclave® 550 є найкращим рішенням - для вашого бюджету та навколишнього середовища!



І найкраще: ви економите гроші.

Пропонує більше, вимагає менше: Vacuclave® 550 не тільки значно дешевше купити, ніж два альтернативних невеликих автоклава, але й зменшує поточні експлуатаційні витрати на технічне обслуговування та перевірку.



Зроблено в Німеччині. Зроблено для Вас.

Ми розробляємо, виробляємо та оптимізуємо наші системні рішення для переробки інструментів у нашій штаб-квартирі в Берліні вже понад 70 років. MELAG означає мистецтво проектування та виробництва «Зроблено в Німеччині» з найвищим рівнем якості.

Велика камера. Величезні переваги.

Відкриває нові можливості:

**Більше інструментів.
У найкоротші терміни.**

Перетворить 2 в 1 - У порівнянні з двома альтернативними невеликими автоклавами, Vacuclave® 550 забезпечує значно більшу місткість при на 40% меншій площі. Відкрийте для себе переваги наших продуктів для стерилізації максимальної кількості інструментів на мінімальному просторі за рекордно короткий термін:



Вражаюча швидкість

Рекордний час роботи всього 12 хвилин (без сушіння) і найвища якість насиченої пари – ось що означає технологія Double Jacket. Патент MELAG з 2012 року.



Безкомпромісний комфорт

Однозначно розумніший! Завдяки надзвичайно великому сенсорному екрану Smart-Touch керувати так само легко, як і користуватися смартфоном.



Інтелектуальна сушка

DRYtelligence® забезпечує ідеальні результати сушіння, скорочуючи час висихання до 80 %.



Відстеження документації

До побачення, журнали стерилізації! ProControl дозволяє документувати схвалення партії безпосередньо через Smart-Touch Display без будь-якого додаткового програмного забезпечення.




Виняткова місткість

Більше місця для інструментів довжиною до 45 см: стерилізуйте до 25 кг на 16 лотках або до 10 коробок MELAstore®.

Повна гнучкість:

Ми пропонуємо 3 варіанти завантаження, щоб кожна в кожній клініці могли організувати робочий процес у найбільш зручний для них спосіб. З нашою додатковою системою направляючих ми гарантуємо найвищий рівень ергономіки, безпеки та комфорту під час завантаження та розвантаження.

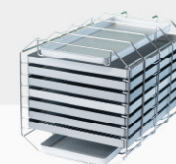


Mount Basic for up to 16 trays

for the sterilization of the maximum number of unwrapped and wrapped instruments



Loading slide for up to 10 MELAstore® Boxes

for convenient loading and unloading of the autoclave with sterilization containers

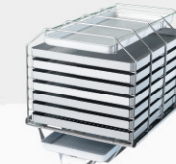

Loading slide with Mount Comfort for up to 16 trays

for maximum capacity and ergonomics when reprocessing individual instruments



Екологічне рішення:

Збережіть планету. І понад 10 000 євро.

Vacuclave® 550 доводить справжню велич: новий 50-літровий автоклав поєднує захист навколишнього середовища та економію. Заощаджуйте електроенергію, воду і, таким чином, багато грошей з нашими інноваціями, орієнтованими на майбутнє:




Відновлення

Запатентована система рекуперації тепла використовує тепло від використаної пари для отримання нової пари. Технологія відновлення не тільки зменшує споживання енергії на 15% за цикл, але й розсіювання тепла в стерилізаційній кімнаті.

DRYtelligence®

Отримуйте ідеальні результати: DRYtelligence® оптимально адаптує процес сушіння до вашого завантаження. Інтелектуальний алгоритм скорочує час сушіння до 80 % – і таким чином економить багато часу, грошей та енергії.

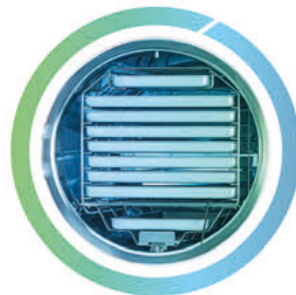


Охолодження

100% надійність без використання води для охолодження (0% охолоджуючої води) – запатентована технологія Coolify поєднує високоефективне повітряне охолодження з розумним моніторингом температури.

Енергоефективність

Vacuclave® 550 вирізняється високою енергоефективністю під час стерилізації та в режимі очікування! Power Safe переводить нагрівання та дисплей в енергозберігаючий режим між циклами стерилізації.

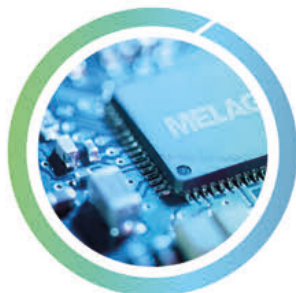

 **-2,200 €**

Більше потужності. Менше енергії!

Чотири представлені тут технології дозволяють потужному Vacuclave® 550 заощадити енергію на суму близько 2200 євро.

 **-2,600 €**

Економія води це означає: економія грошей!

Vacuclave® 550 заощаджує 1 300 000 літрів води протягом усього терміну служби порівняно зі стаціонарними автоклавами.

 **-6,100 €**

Менша кількість пристроїв призводить до менших витрат!
Зручна в обслуговуванні концепція пристрою вдвічі знижує витрати на технічне обслуговування та перевірку.

 **-10,900 €***

Це понад 10 000 вагомих причин вибрати Vacuclave® 550:
У довгостроковій перспективі зменшіть ваші експлуатаційні витрати!

* Після прибіл. 14 років (з 5 циклами на день) порівняно з двома звичайними невеликими автоклавами без представлених технологій.

Для вашої безпеки: все з одних рук.

Системне рішення MELAG.

Ваша стерилізаційна кімната – місце, де ви забезпечуєте безпеку пацієнтів!

Наші мийно-дезінфекуючі машини, пакувальні машини, автоклави та програмні рішення перетворюють ваші мрії про оптимізовані робочі процеси в реальність. Ідеальна взаємодія системних рішень MELAG дозволяє досягти більшої економії часу та коштів на повторну обробку інструментів.



Персонал:

Один контакт, щоб відповісти на всі ваші запитання щодо обробки інструментів



Ефективність:

Оптимізація витрат шляхом синхронізації обслуговування всіх пристроїв у вашій стерилізаційній кімнаті



Оптимізований процес:

Узгоджена концепція управління для запобігання збоєм у повсякденній роботі



Vacuclave® 550 – унікальний продукт, неперевершена комплексна система:



✓ Миття та дезінфекція з MELAtherm®



✓ Пакування з MELAseal® чи MELAstore®



✓ Парова стерилізація з Vacuclave® 550



✓ Документація та погодження з MELAtace®



✓ Маркування з MELAprint® 60

Аксессуары для Vacuclave® 550

Настільки універсальний, як і ваші потреби.

Різноманітність аксесуарів дозволяє зібрати конфігурацію, яка найкраще відповідає вашим потребам. Vacuclave® 550, ідеально пристосований до вашого робочого процесу, забезпечує максимальну безпеку та ефективність у боротьбі з інфекціями!



Більше ємності?

Наша серія Cliniclave® 45 забезпечує максимальну гнучкість завдяки ємності одного або двох стерилізаційних блоків (StU), а також версії пристрою з однією або двома дверцятами.




Завантаження

Для найкращого використання стерилізаційної камери ми пропонуємо ідеальні системи завантаження для різних варіантів застосування.

Стійка Basic з місткістю до 16 лотків

- ✓ Для 7 лотків для Vacuclave® 550 і 2 довгих лотків
- ✓ Для 14 стандартних та 2 довгих лотків

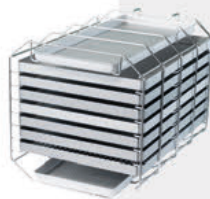


Завантажувальна система для 10 контейнерів MELAstore®

- ✓ Для 10x MELAstore® Box 100
- ✓ Для 7x MELAstore® Box 200 і 1x MELAstore® Box 100



Завантажувальна система з стійкою Comfort з місткістю до 16 лотків

- ✓ Для 7 лотків для Vacuclave® 550 і 2 довгих лотків
- ✓ Для 14 стандартних та 2 довгих лотків

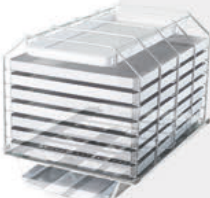

Документація

Vacuclave® 550 надає юридично коректну документацію та схвалення з інтегрованим USB та мережевим інтерфейсом.

MELAtrace®

забезпечує професійну документацію, затвердження та відстеження всієї процедури обробки без щорічної плати за ліцензію та підпис.



MELAprint® 60

друкує етикетки зі штрих-кодом для оптимального маркування інструментів і відстеження.



USB-накопичувач

швидко та легко документує всі журнали стерилізації Vacuclave® 550 на цифровому пристрої зберігання даних.



Підготовка води

Системи обробки води MELAdem® забезпечують високоякісну демінералізовану воду для захисту як вашого автоклава, так і інструментів.

MELAdem® 47

є потужною системою зворотного осмосу для забезпечення Vacuclave® 550 демінералізованою водою.



MELAdem® 53

це система очищення води з дуже високою потужністю для Vacuclave® 550, MELAtherm® і ще до двох пристроїв.



MELAJet®

дозволяє обприскувати інструменти демінералізованою водою.



Інші аксесуари

Наші додаткові аксесуари забезпечують безпечну стерилізацію, яка економить час, а також оптимальний догляд за вашим автоклавом.

Захист камери

для ретельного очищення поверхонь з нержавіючої сталі. Набір для очищення камери містить потужний очищувач, 50 ганчірок без ворсу та 1 серветку з мікрофібри.



MELAcontrol® Helix

250 індикаторних смужок забезпечують надійне підтвердження результатів стерилізації.



MELAstore®

гарантує процес пакування з величезною економією часу завдяки стандартизації, а також зниженням матеріальних витрат і відходів.



Короткий огляд фактів і цифр

Технічні характеристики

Vacuclave® 550 гарантує швидку стерилізацію великої кількості інструментів з широким спектром програм:

Програми		Час роботи	Сушка	
			DRYtelligence® *	Time-controlled
Universal-B	134 °C, Час стерилізації: 5,5 хв	13 – 43 хв	> 4 хв	13 хв
Quick-S	134 °C, Час стерилізації: 3,5 хв	12 – 33 хв	> 4 хв	13 хв
Gentle-B	121 °C, Час стерилізації: 20,5 хв	25 – 62 хв	> 4 хв	13 хв
Prion-B	134 °C, Час стерилізації: 20,5 хв	28 – 58 хв	> 4 хв	13 хв

* DRYtelligence® автоматично адаптує процес сушіння до вашого завантаження. Завдяки розумній сушінні завжди досягаються оптимальні результати сушіння.

Vacuclave® 550 можна швидко та легко встановити як настільний автоклав у будь-якій стерилізаційній кімнаті. Нижче наведено список вимог до встановлення:

	Версія 15 ампер	Версія 13 ампер
Артикул	ME10550	
Розмір камери	ø 38 см x 45 см глибина	
Ємність камери	53 літрів	
Завантаження	25 кг не запакованих, 11 кг запакованих, 17,5 кг з MELAstore®, 3,5 кг текстилю	17,5 кг не запакованих, 9 кг запакованих, 14 кг з MELAstore®, 2 кг текстилю
Розміри пристрою (Ш x В x Г)	63,6 x 59,0 x 71,5 см висота вкл. дисплей 65 см пристрій підходить на стільниці 60 см	
Вага	98 кг (робоча вага до 127 кг)	
Живлення	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	
Споживана потужність	3.400 Watts	2.700 Watts
Інтерфейси документації	USB, мережа	



ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ» Офіційний дилер в Україні
01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, офіс 182 Тел.: +38 044 360 03 00, +38 067 826 57 70
E-mail: info@ren-med.com.ua www.ren-med.com.ua

MELAG
competence in hygiene

Further information at: www.melag.com