




PENTALED  
**30E LIGHT**

**RIMSA**  
Brightenin ideas

[www.rimsa.it](http://www.rimsa.it)

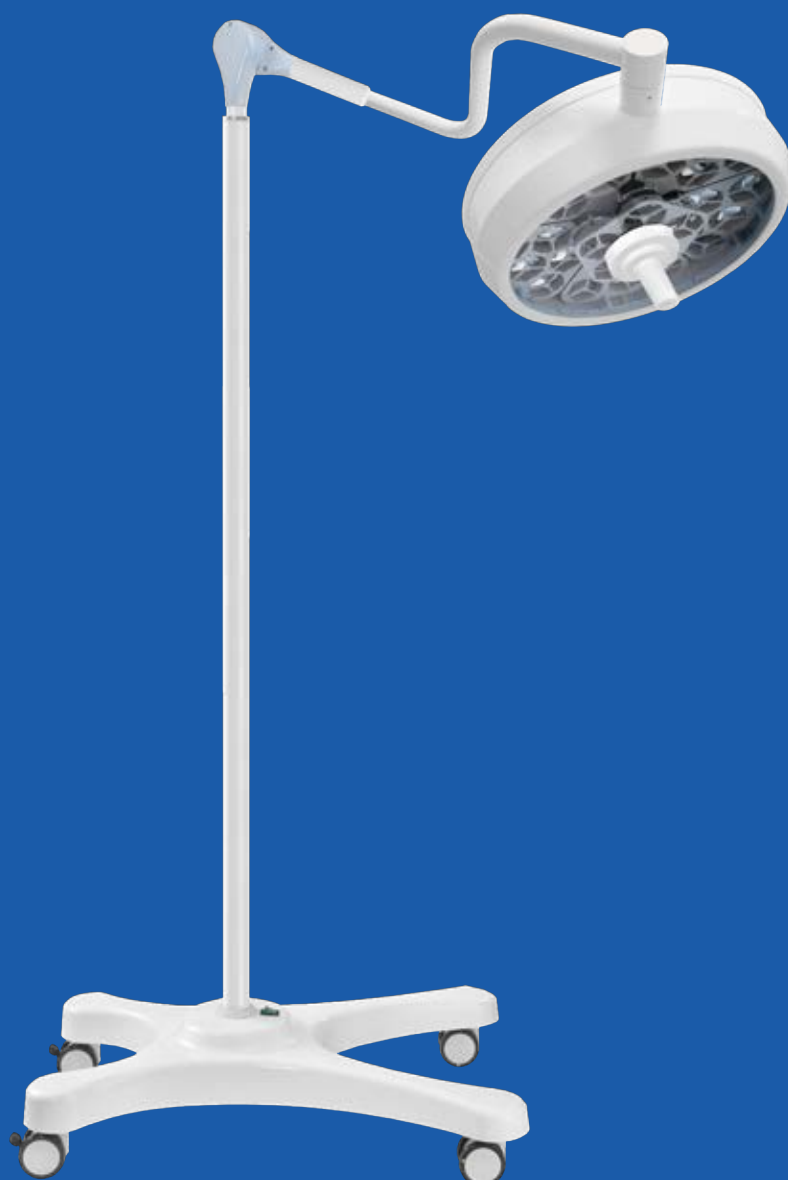

**Інноваційний дизайн:**



поєднання відомого купола від PentaLED 30E з більш легкою конструкцією зробило світильник ще економічнішим без шкоди для якості світла.

**Неперевершена якість:** Зобов'язання PentaLED щодо якості залишаються непохитними, гарантуючи, що ви можете покластися на наші рішення з освітлення для найважливіших хірургічних процедур.

**Конкурентні ціни:** ми розуміємо важливість економічної ефективності в охороні здоров'я. PENTALED 30E LIGHT пропонує виняткову цінність та якість за конкурентоспроможною ціною.

PENTALED 30E LIGHT найкраще підходить для операційних, де хірургу потрібна лампа меншого розміру, щоб уникнути перешкод з іншим обладнанням вгорі. Чудово підходить для щелепно-лицевої та пластичної хірургії.



Світильник хірургічний забезпечує 160 000 люкс і має 30 еліптичних відбивачів, розділених на 6 модулів, кожен з яких містить 5 світлодіодів.

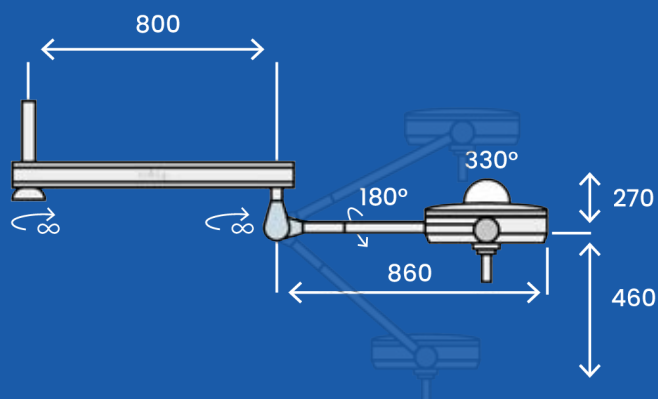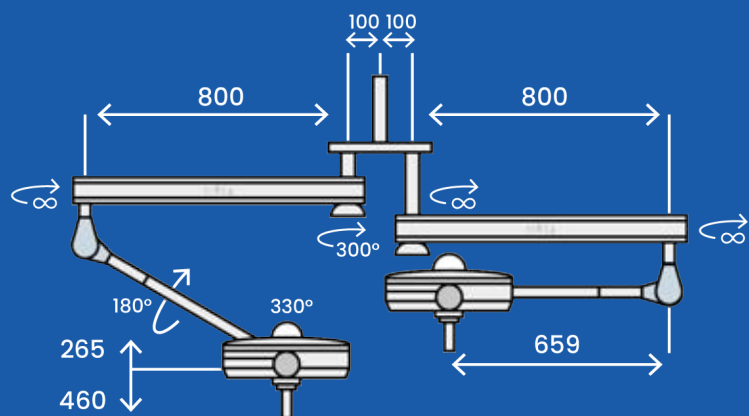

**Непряме світло:** непряме світло, що забезпечується всіма світильниками PentaLed, гарантує холодне світло, глибину та відсутність напруги чи засліплення для хірурга. Це забезпечується спеціально розробленим параболічними чашам, які точково, без розсіювання, відбивають весь спектр світла, випромінюваного кожним світлодіодом.

**Світло завжди у фокусі:** «E-View» — це лінза, яка дозволяє хірургу розширювати/звужувати освітлене операційне поле електронним способом, не змінюючи інтенсивності світла в центрі поля (Ec). Регулювання світлового поля є однією з першочергових вимог до хірургічної лампи.

**EndoLed:** Функція EndoLed забезпечує комфортне освітлення під час ендоскопічної операції. При включенні цієї функції підсвічується один модуль, інтенсивність світла та колірну температуру якого можна регулювати за бажанням.

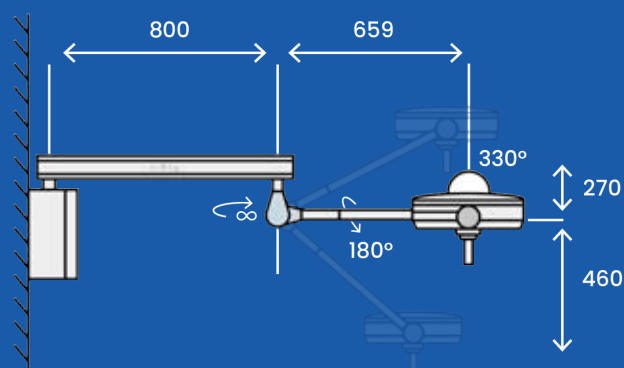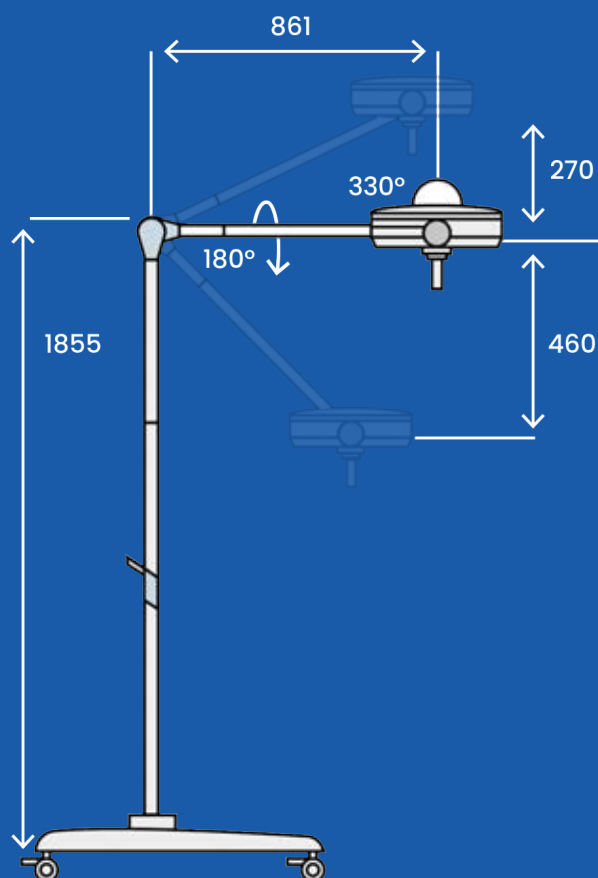

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                              |                       |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Інтенсивність світла на відстані 1м (Ес)                     | люкс (lux)            | 160.000     |
| Колірна температура                                          | К (K)                 | 4.500-5.000 |
| Індекс передачі кольору (CRI)                                | Ra                    | 96          |
| Регулювання діаметру                                         | -                     | Electronic  |
| Діаметр світлового поля регулюється від – до -               | мм (mm)               | 140-260     |
| Опроміненість Ес коли освітлення досягає максимального рівня | Вт/м² (W/m²)          | 627         |
| Співвідношення між опроміненістю Ес та освітленістю Ес       | мВт/м²люкс (mW/m²lux) | 3,9         |

## ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                        |             |           |
|----------------------------------------|-------------|-----------|
| Первинна змінна напруга (а.с.)         | В (V)       | 100 - 240 |
| Частота                                | Гц (Hz)     | 50/60     |
| Споживана потужність                   | Вт (W)      | 52        |
| Діаметр купола                         | см (cm)     | 40        |
| Кількість світлодіодів                 | LED         | 30        |
| Середня тривалість роботи світлодіодів | год (hours) | >60.000   |

ТОВ «РЕНЕССАНС-МЕДИКАЛ»

Уповноважений представник в Україні

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182, Тел./факс +38 044 360 03 00

info@ren-med.com.ua    www.ren-med.com.ua

Via Monterosa 18-20-22, Seregno, 20831, MB, Italia

Tel. (+39) 0362 325709 | Fax (+39) 0362 328559 | E-mail info@rimsa.it

RIMSA залишає за собою право покращувати продукти в каталозі без попередження. Часткове або повне відтворення заборонено.



Research & Components  
MADE IN ITALY

**RIMSA**  
società benefit

www.rimsa.it