

Scandia SC440 Prime
Операційний стіл



LOJER® *For easy care*





Група компаній Lojer – більше 30 років досвіду виробництва операційних столів

Якість операційних столів Lojer високо цінується хірургами по всьому світу. Операційні столи виробляються в Фінляндії на підприємстві з багаторічним досвідом. При розробці своєї продукції компанія Lojer на перше місце ставить безпеку пацієнта, ергономіку, простоту використання та обробки. Додавши до цих якостей першокласний сервіс і орієнтованість на потреби хірургів, ви отримаєте сучасний операційний стіл.

www.lojer.com



A photograph of a modern operating room. In the center is a Scandia SC440 Prime operating table, which is a multi-sectioned, motorized table on wheels. Above the table is a large, circular surgical light. To the left of the table is a tall, adjustable stand with various attachments. In the background, there are shelves with medical supplies and a wall with a window covered by horizontal blinds. The overall lighting is dim, with the surgical light providing the main illumination.


Scandia SC440 Prime

Відмінне поєднання ціни і якості

Стіл Scandia SC440 – відмінний вибір для тих, хто шукає високоякісний універсальний операційний стіл. Він має всі необхідні сучасні характеристики з відмінним співвідношенням ціна-якість.

Як приклад високої якості – нова система електроприводів дозволяє одночасно здійснювати рух декількох секцій при використанні попередньо запрограмованого або нульового положення, що прискорює регулювання столу.

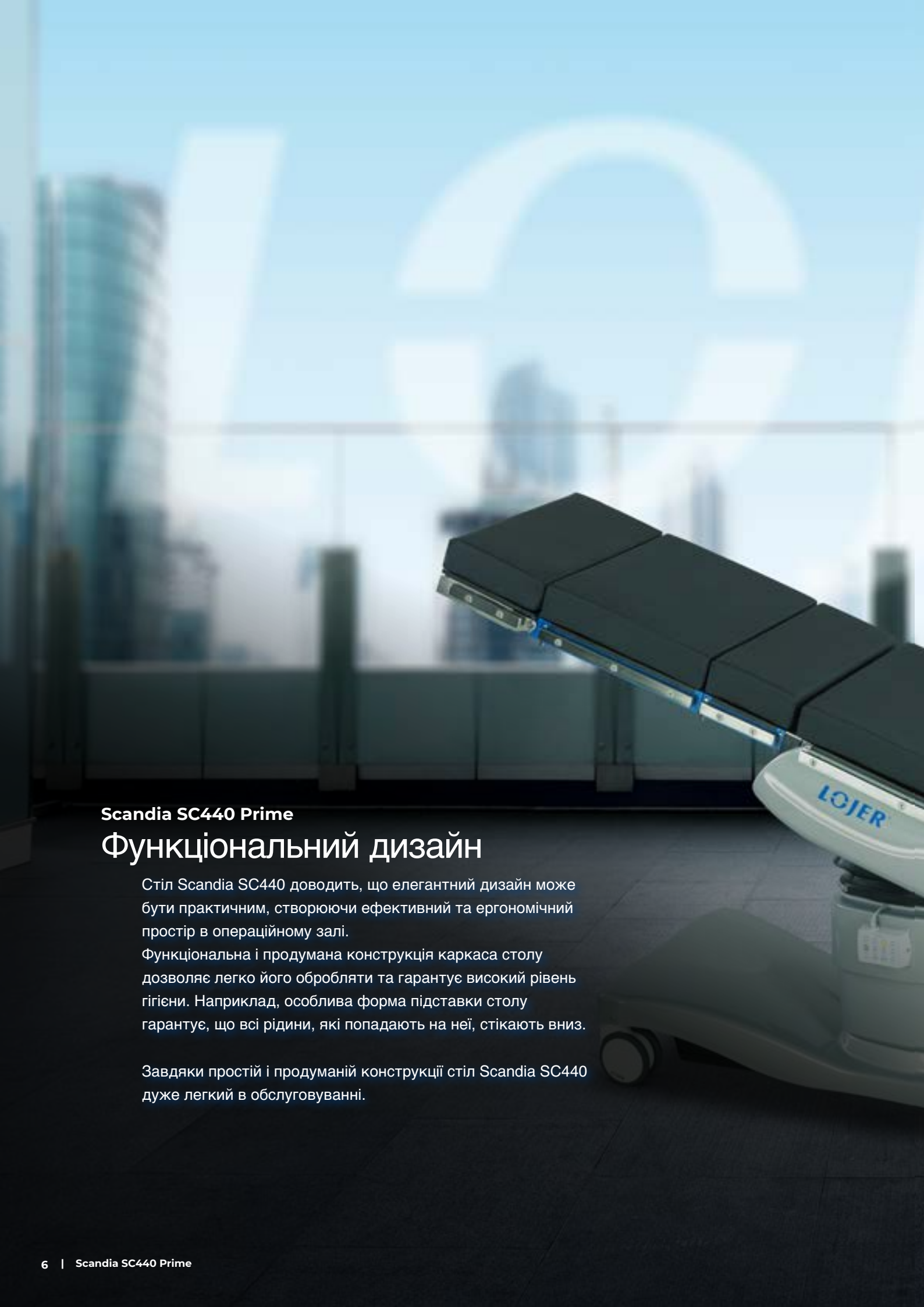

A black and white photograph of a Scandia SC440 Prime operating table. The table is tilted upwards, showing its segmented top and the base with the 'LOJER' brand name. The background is a blurred view of a modern building with large windows and a glass railing.

Scandia SC440 Prime

Функціональний дизайн

Стіл Scandia SC440 доводить, що елегантний дизайн може бути практичним, створюючи ефективний та ергономічний простір в операційному залі.

Функціональна і продумана конструкція каркаса столу дозволяє легко його обробляти та гарантує високий рівень гігієни. Наприклад, особлива форма підставки столу гарантує, що всі рідини, які попадають на неї, стікають вниз.

Завдяки простій і продуманій конструкції стіл Scandia SC440 дуже легкий в обслуговуванні.





Scandia SC440 Prime Різні хірургічні положення

Модульна конструкція столу разом з поздовжнім зміщенням стільниці дозволяють встановлювати операційний стіл в різні хірургічні положення, включаючи flex і reflex. Широкий вибір додаткових аксесуарів гарантує ергономічне і анатомічно коректне позиціонування пацієнта.

Стіл має 4 програмованих положення і "нульову" позицію.





i Зверніть увагу на каталог
додаткового приладдя!





Гарантія якості

Операційні столи Scandia SC 440 Prime виробляються в Фінляндії на сучасному підприємстві відповідно до усіх стандартів якості. Сертифікати ISO 9001 (з 1994 року) та ISO 13485 підтверджують відповідальне ставлення компанії Lojer до своєї справи. Наша продукція проходить фінальний контроль якості перед доставкою клієнту, щоб гарантувати відповідність найвищим вимогам. Вся продукція маркована CE – знаком якості, відповідальності та безпеки.



ПРИКЛАДИ ХІРУРГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ

Хірургія верхніх кінцівок,
положення лежачи на спині



ЛОР, Офтальмологічні і пластичні операції,
положення лежачи на спині



Артроскопія коліна,
положення лежачи на спині













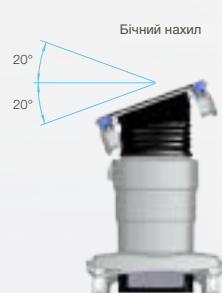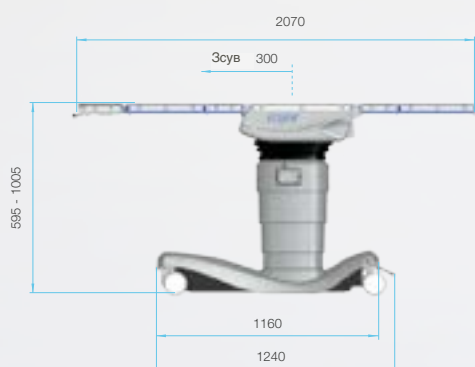




Scandia SC440 Prime

Технічні характеристики

Загальна довжина	2070 мм
Ширина вкл. бічні рейки	622 мм
Ширина матраца	550 мм
Загальна вага	200 кг
Безпечне робоче навантаження	250 кг
Діапазон регулювання висоти	595–1005 мм
Колеса	Чотири подвійних колеса з центральним блокуванням Ø 125 мм
Секція для голови	-58° ... +37°, 135 мм
Спинна секція	-10° ... +70°
Секція для ніг	-80° ... +10°
Бічний нахил	20° / 20°
Тренделенбург/ АнтиТренделенбург	30° / 20°
Поздовжній зсув (опція)	300 мм
Положення flex/reflex	220° / 120°
Електрична система	24 VDC, акумулятор 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Управління	Ручний пульт, пульт управління на колоні
Програмування положень	Чотири положення
Гарантія	2 роки
Країна виробництва	Фінляндія
Маркування CE	Так

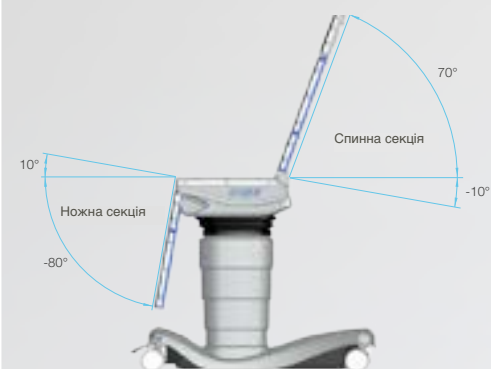

Компанія Lojer залишає за собою право на модифікації продукту.



Група компаній Lojer – найбільший виробник медичних меблів та обладнання в країнах Північної Європи. На наших заводах у Фінляндії ми виробляємо лікарняні ліжка, операційні столи, оглядові і масажні столи. Компанія успішно працює вже понад 100 років. Продукти Lojer використовуються в більш ніж 110 країнах світу.

www.lojer.com

www.ren-med.com.ua

© Lojer Group 2019. Всі права захищені.

ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДИКАЛ» уповноважений представник в Україні.

01024, Україна, м. Київ, вул. Богомольця 7/14, оф. 182. Тел./факс: +38 044 360 03 00 info@ren-med.com.ua